

AUSTRIA

Bauerfeind Ges.m.b.H.
Hainburger Straße 33
1030 Wien
P +43 (0) 800 4430-130
F +43 (0) 800 4430-131
E info@bauerfeind.at

BENELUX

Bauerfeind Benelux B.V.
Waarderveldweg 1
2031 BK Haarlem

THE NETHERLANDS
P +31 (0) 23 531-9427
F +31 (0) 23 532-1970
E info@bauerfeind.nl

BELGIUM
P +32 (0) 2 527-4060
F +32 (0) 2 792-5345
E info@bauerfeind.be

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Bauerfeind d.o.o.
Meše Selmovića 19
71000 Sarajevo
P +387 (0) 33 710-100
F +387 (0) 33 619-422
E info@bauerfeind.ba

CROATIA

Bauerfeind d.o.o.
Goleška 20
10020 Zagreb
P +385 (0) 1 6542-855
F +385 (0) 1 6542-860
E info@bauerfeind.hr

FRANCE

Bauerfeind France S.A.R.L.
B.P. 59258
95957 Roissy CDG Cedex
P +33 (0) 1 4863-2896
F +33 (0) 1 4863-2963
E info@bauerfeind.fr

ITALY

Bauerfeind Italia Srl
Piazza Don Enrico Mapelli 75
20099 Sesto San Giovanni (MI)
P +39 02 8977 6310
F +39 02 8977 5900
E info@bauerfeind.it

NORDIC

Bauerfeind Nordic AB
Storgatan 14
114 55 Stockholm
P +46 (0) 774 100 020
E info@bauerfeind.se

REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Bauerfeind Dooel Skopje
50 Divizija 24 a
1000 Skopje
P +389 (0) 2 3179-002
F +389 (0) 2 3179-004
E info@bauerfeind.mk

SERBIA

Bauerfeind d.o.o.
102 Omladinskih brigada
11070 Novi Beograd
P +381 (0) 11 2287-050
F +381 (0) 11 2287-052
E info@bauerfeind.rs

SINGAPORE

Bauerfeind Singapore Pte Ltd.
Blk 41 Cambridge Road #01-21
Singapore 210041
P +65 6396-3497
F +65 6295-5062
E info@bauerfeind.com.sg

SLOVENIA

Bauerfeind d.o.o.
Dolenjska cesta 242 b
1000 Ljubljana
P +386 (0) 1 4272-941
F +386 (0) 1 4272-951
E info@bauerfeind.si

SPAIN

Bauerfeind Ibérica, S.A.
C / San Vicente Mártir,
nº 71 – 4º – 7ª
46007 Valencia
P +34 96 385-6633
F +34 96 385-6699
E info@bauerfeind.es

SWITZERLAND

Bauerfeind AG
Vorderi Böde 5
5452 Oberrohrdorf
P +41 (0) 56 485-8242
F +41 (0) 56 485-8259
E info@bauerfeind.ch

UNITED ARAB EMIRATES

Bauerfeind Middle East FZ LLC
Dubai Healthcare City
Building 40, Office 510
Dubai
P +971 4 4335-684
F +971 4 4370-344
E info@bauerfeind.ae

UNITED KINGDOM

Bauerfeind UK
85 Tottenham Court Road
London
W1T 4TQ
P +44 (0) 121 446-5353
F +44 (0) 121 446-5454
E info@bauerfeind.co.uk

USA

Bauerfeind USA, Inc.
75 14th St NE
Suite 2350
Atlanta, GA 30309
P +1 800 423-3405
P +1 404 201-7800
F +1 404 201-7839
E info@bauerfeindusa.com



30 °C
86 °F

 **BAUERFEIND AG**
Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
P +49 (0) 36628 66-4000
F +49 (0) 36628 66-4499
E info@bauerfeind.com
BAUERFEIND.COM




SacroLoc®

Beckenorthese
Pelvic orthosis
Orthèse pour le bassin
Ortesis pélvica
Tutore stabilizzante per il bacino



All instructions for use:
www.bauerfeind.com/downloads

de	deutsch.....	2	hr	hrvatski.....	19
en	english.....	3	sr	srpski.....	20
fr	français.....	4	ro	romanian.....	22
nl	nederlands.....	5	el	ελληνικά.....	23
it	italiano.....	6	tr	türkçe.....	24
es	español.....	8	ru	русский.....	25
pt	português.....	9	et	eesti.....	26
sv	svenska.....	10	lv	latviešu.....	27
no	norsk.....	11	lt	lietuvių.....	28
fi	suomi.....	12	he	עברית.....	30
da	dansk.....	13	ja	日本語.....	31
pl	polski.....	14	ko	한국어.....	32
cs	česky.....	16	ar	عربي.....	33
sk	slovensky.....	17	zh	中文.....	35
hu	magyar.....	18			



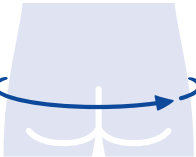


**Beckenumfangsmaß
im Stehen**
Pelvic circumference
while standing

SacroLoc®

Größe	Size	1	2	3	4	5	6	7
Beckenumfang	Pelvic circumf. (cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130	130–140
Beckenumfang	Pelvic circumf. (inch)	27½–31½	31½–35½	35½–39¼	39¼–43¼	43¼–47¼	47¼–51¼	51¼–55

Körpermaße im Grenzbereich: kleinere Größe wählen. If between two sizes, choose the smaller size.

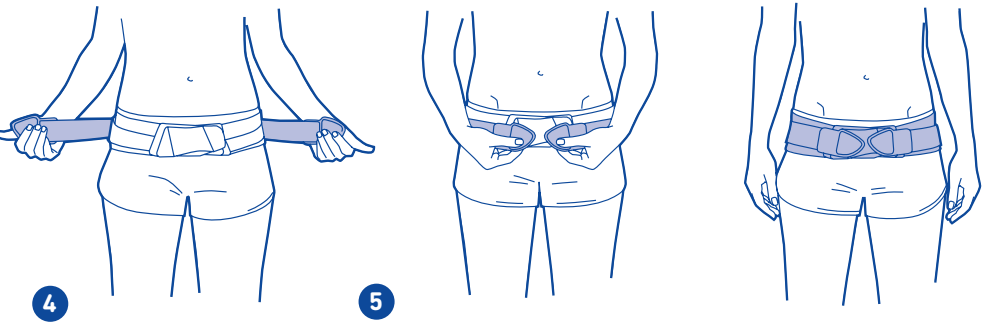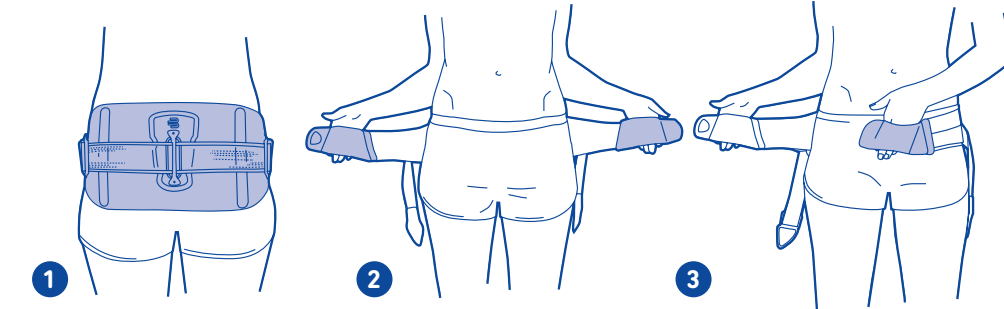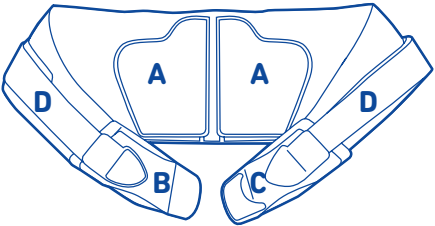

(de) deutsch

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Bauerfeind Produkt entschieden haben.

Jeden Tag arbeiten wir an der Verbesserung der medizinischen Wirksamkeit unserer Produkte, denn Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen.
Bitte lesen und beachten Sie die **Gebrauchsanweisung** sorgfältig.
Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihr Fachgeschäft.

Zweckbestimmung

SacroLoc ist ein Medizinprodukt. Sie ist eine Orthese¹ zur Stabilisierung des Beckens und gezielten Entlastung der Iliosakralgelenke.

Indikationen

- Erkrankungen des Iliosakralgelenks (ISG-Syndrom, ISG-Arthrose, ISG-Instabilität)
- Beckenringinstabilität, z.B. Symphysensprengung und -lockerung
- Iliosakralgelenk-Blockierung (akut und prophylaktisch)
- Myalgien und Tendopathien der Beckenregion
- Gefügestörung nach Spondylodesen (im Übergang L5–S1)
- Konservative Behandlung nach Beckenfrakturen

Anwendungsrisiken

⚠ Vorsicht*

Bitte beachten Sie die Vorgaben dieser Gebrauchsanweisung und die Hinweise des Fachpersonals genauestens.

- SacroLoc ist nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung und den aufgeführten Anwendungsgebieten (Einsatzort) zu tragen.
- Bei unsachgemäßer oder zweckentfremdeter Anwendung ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.
- Die Eignung und Anwendung der Orthese¹ während der Dauer der Schwangerschaft ist ärztlich im Einzelfall abzustimmen. Wird das Tragen der Orthese¹ im Verlaufe der Schwangerschaft als unangenehm empfunden, sind Größeneinstellungen und Anlegetechnik zu prüfen, ärztliche Rücksprache zu nehmen und ggf. von einer weiteren Anwendung abzusehen. Nebenwirkungen für Mutter und Fötus sind nicht bekannt.
- Die Einweisung darf nur durch Fachpersonal² erfolgen.
- Sprechen Sie eine Kombination mit anderen Produkten, z.B. im Rahmen einer Kompressionstherapie (Kompressionsstrümpfe) vorher mit Ihrem behandelnden Arzt ab.
- Tragen Sie die SacroLoc über Ihrem T-Shirt oder Unterhemd.
- Nehmen Ihre Beschwerden zu oder stellen Sie außergewöhnliche Veränderungen an Ihrem Körper fest, suchen Sie bitte umgehend Ihren Arzt auf.
- Lassen Sie das Produkt nicht mit fett- und säurehaltigen Mitteln, Salben und Lotionen in Berührung kommen.
- Nebenwirkungen, die den gesamten Organismus betreffen, sind bis jetzt nicht bekannt. Das sachgemäße Anwenden / Anlegen wird vorausgesetzt. Legen Sie die SacroLoc nicht zu fest an, da es sonst zu lokalen Druckscheinungen kommen kann. In seltenen Fällen ist eine Einengung von Blutgefäßen und Nerven möglich.

Kontraindikationen

Überempfindlichkeiten von Krankheitswert sind bis jetzt nicht bekannt. Bei nachfolgenden Krankheitsbildern ist das Anlegen und Tragen eines solchen Hilfsmittels nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt angezeigt:

- Hauterkrankungen / -verletzungen im versorgten Körperabschnitt, insbesondere bei entzündlichen Erscheinungen, ebenso aufgeworfene Narben mit Anschwellung, Rötung und Überwärmung
- Empfindungsstörungen und Bewegungsstörungen z.B. bei Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)

Anwendungshinweise

- A – Rückenpelotte (Massagepolster)
- B – rechte Verschlusshälfte mit Fingerlasche
- C – linke Verschlusshälfte mit Fingerlasche
- D – Zuggurte

Anlegen

- ➊ Positionieren Sie die Orthese¹ mittig auf dem Becken, so dass der obere Rand der Orthese¹ den oberen Rand des Beckenkamms nicht übersteigt bzw. in die Taille hineinreicht.
- ➋ Schieben Sie nun die Finger von oben in die dafür vorgesehene Fingerlasche am Verschluss und ziehen Sie den Verschluss gleichmäßig nach vorn.
- ➌ Pressen Sie nun die linke Verschlusshälfte auf den Bauch und legen Sie die rechte Verschlusshälfte soweit über die linke, bis Sie diese aufkletten können. Beim Aufkletten zuerst die Finger aus der linken und dann aus der rechten Fingerlasche ziehen.
- ➍ Nehmen Sie nun beide Zuggurte in beide Hände und ziehen Sie diese gleichzeitig und gleichmäßig nach vorn, bis die gewünschte Krafteinwirkung (Stabilisierung) aufgebaut ist.
- ➎ Anschließend kletten Sie beide Zuggurte dicht nebeneinander auf den großen Verschluss.

Reinigungshinweise

Hinweis: Setzen Sie die SacroLoc nie direkter Hitze (z.B. Heizung, Sonneneinstrahlung, Lagerung im Pkw) aus! Schäden am Material sind möglich. Dies kann die Wirksamkeit der SacroLoc beeinträchtigen.

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Einnähetikett Ihrer SacroLoc. Dieses befindet sich im Innenteil des Gestricks.

Bei Bedarf können Sie SacroLoc mit einem milden Waschmittel per Handwäsche reinigen. Lassen Sie die Orthese¹ lufttrocknen.

Einsatzort

Entsprechend den Indikationen (Becken, Iliosakralgelenke). Siehe Zweckbestimmung.

Wartungshinweise

Bei richtiger Handhabung und Pflege ist das Produkt praktisch wartungsfrei.

Zusammenbau- und Montageanweisung

Die SacroLoc wird in Standardgröße gebrauchsfertig geliefert.

Technische Daten / Parameter

Die SacroLoc besteht aus einem Gestrick mit festen Zuggurten und abnehmbaren Rückenpelotten. Die Rückenpelotten sind untrennbar mit einer Frotteehülle verbunden. Die Rückenpelotten sind als Ersatzteil lieferbar.

Hinweise zum Wiedereinsatz

Das Produkt ist zur Individualversorgung eines Patienten oder einer Patientin vorgesehen.

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall, wenden Sie sich bitte zunächst direkt an denjenigen, von dem Sie das Produkt erworben haben. Das Produkt ist vor Gewährleistungsanzeige zu reinigen. Wurden die Hinweise zum Umgang und zur Pflege der SacroLoc nicht beachtet, kann die Gewährleistung beeinträchtigt oder ausgeschlossen sein.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen bei:

- nicht indikationsgerechter Anwendung
- Nichtbefolgen der Anweisung des Fachpersonals
- eigenmächtiger Produktveränderung

Meldepflicht

Aufgrund regionaler gesetzlicher Vorschriften sind Sie verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall bei Anwendung dieses Medizinproduktes sowohl dem Hersteller als auch dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) unverzüglich zu melden. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

Entsorgung

Sie können das Produkt entsprechend den nationalen gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

(zh) 简体中文

尊敬的顾客：

非常感谢您选择 Bauerfeind 的产品。

我们始终致力于不断改善产品的疗效，因为您的健康是我们最深切的追求。请您仔细阅读并严格遵守本使用说明。如有疑问，请咨询您的主治医生或专业商店。

用途

SacroLoc 为一款医疗器械产品。该产品为一款用于稳定骨盆并有针对性地减轻髋膝关节负荷的矫形器¹。

适应症

- 髋膝关节疾患 (髋膝关节综合症, 髋膝关节炎, 髋膝关节不稳定)
- 骨盆环不稳定, 例如耻骨分裂和耻骨松弛
- 髋膝关节功能障碍 (急性及预防性)
- 骨盆部位的肌痛和肌腱疾病
- 脊椎融合手术后的内部结构障碍 (L5–S1 过渡部位)
- 骨盆骨折后的保守治疗

使用风险

⚠ 注意*

请严格遵守本使用说明中的规定和专业人员的提示。

- 请务必根据本使用说明以及针对本产品列出的适应症穿戴和使用 SacroLoc。
- 对于不按规定使用产品或者将产品用于其它用途所造成的后果，本公司不承担产品责任。
- 孕期是否能够使用、如何正确使用该矫形器¹ 须作为个别情况遵循医嘱。如在孕期发现穿戴矫形器¹ 带来不适, 则须检查尺寸设置和穿戴方式、咨询医生, 必要时留至以后使用。未发现对母亲及胎儿存在副作用。
- 必须由专业人员² 给予指导。
- 若要与其它产品 (如压力治疗中使用的压力袜) 组合使用, 请务必事先咨询主治医生。
- 将 SacroLoc 穿在 T 恤或内穿衣物的外面。
- 如果伤痛加剧或者身体出现异常, 请立即向医生咨询。
- 避免本产品与油脂类物质, 酸性物质, 软膏和乳液等物质接触。
- 避免有损害身体的不良反应报告。前提是一定要按规定正确地使用 / 穿戴本产品。不要将 SacroLoc 绑得太紧, 否则有可能导致局部血液循环不畅。个别情况下还可能会引起血管或神经收缩。

禁忌症

- 尚未有过敏性反应的临床报告。对于有如下症状的患者, 使用和穿戴此辅助器具前请务必咨询主治医生：
- 穿戴支具的身体部位患有皮肤疾病或存在皮肤损伤 (特别是有炎症时)；
- 类似地, 伤疤出现肿大、发红、发热等症状
- 存在感觉障碍和运动失调 (如糖尿病)

使用提示

- A – 背部衬垫 (按摩垫)
- B – 带指套的右半尼龙搭扣
- C – 带指套的左半尼龙搭扣
- D – 箍带

穿戴

➊ 将矫形器¹ 放在骨盆中间位置, 注意矫形器¹ 的上沿不能超过髋嵴的上边缘或延伸至腰部。➋ 然后将双手手指从上面插入尼龙搭扣的相应指套内, 并均匀用力将尼龙搭扣向前拽。➌ 然后将左半搭扣按在腹部上, 再用力拉右半搭扣, 直至两部分重叠并能粘上。粘好以后, 先抽出左侧指套内的手指, 再抽出右手手指。➍ 然后, 双手抓住两根箍带, 同时均匀用力向前拉, 直至达到所需的力度 (稳定效果)。➎ 接着将两根箍带依次紧紧扣在大尼龙搭扣上。

护理须知

提示: 不可让 SacroLoc 直接受热 (例如靠近暖气、受阳光直射、放置在汽车中等)! 上述环境可能会损坏产品材料, 进而影响 SacroLoc 的疗效。
SacroLoc 标签上列有产品名称、规格、制造商、清洗说明和 CE 标志等信息, 缝在针织部分的内侧。
必要时可以使用柔和的洗涤剂手动清洗 SacroLoc 矫形器。将矫形器¹ 自然晾干。

使用部位

根据适应症 (骨盆和髋膝关节) 使用。
请参见 “用途” 部分。

保养提示

只要正确使用并进行适当的护理, 本产品实际上无需保养。

组合和装配说明

SacroLoc 是一款标准尺寸的产品, 开包即可使用。

技术数据 / 参数

SacroLoc 由一块针织面料、牢固的紧束带以及可拆卸的背部衬垫组成。背部衬垫与毛圈布套相连, 不可拆下。提供背部衬垫备件。

重复使用提示

本产品仅供一位患者专用。

质保

需遵守产品购买地所在国的法律规定。若出现可能需要保修的情况, 请立刻直接联系产品销售方。提出保修要求前, 应先清洁本产品。若不遵守使用 and 护理 ViscoPed S 相关的提示, 则可能影响保修或使保修失效。
若有以下情况, 则我方不再承担保修责任：
• 不遵守指示使用
• 不遵守专业人员的说明
• 擅自对产品进行更改

申报义务

依照地区法律法规, 对于在使用本医疗器械时发生的每起重大事故, 您有义务将其立即报告给制造商和主管的政府机关。我方联络方式参见本手册背面。

废弃处理

请根据国家相关法律法规规定对产品进行废弃处理。

专业人员²

一般提示

首次戴上 SacroLoc 后, 请检查穿戴位置是否合适。如有必要, 请调整穿戴位置。
必须调整好背部衬垫在骨盆上的位置, 使得背部衬垫的内侧凹坑靠在髋后上棘部位。
请指导患者练习如何正确穿戴该产品。
请勿擅自改动本产品。如不遵守此规定, 可能会影响产品疗效, 我们不对此承担产品责任。

材料组成

聚酰胺 (PA), 热塑性弹性体 (SEBS), 聚氨酯 (PUR)
弹性纤维 (EL), 聚丙烯 (PP), 聚酯 (PES), 聚甲醛 (POM)
棉花 (CO), 聚乙烯 (PE), 丙烯酸酯胶粘剂 (A)

MD – Medical Device (医疗器械)

UDI – 医疗器械唯一标识的 DataMatrix 二维码

发布日期: 2022-04

* 关于人身伤害 (受伤、健康和事故风险) 以及财产损失 (产品损坏) 的提示。

¹ 矫形器 = 骨科治疗中使用的辅助器具, 可对四肢或躯干起稳定、减轻负荷、固定、引导或矫正作用

² 专业人员是指根据适用国家的相关规定, 有资格对矫形器进行安装和调适等操作的人员。

Fachpersonal²

Allgemeine Hinweise

Überprüfen Sie nach der ersten Versorgung den optimalen und individuellen Sitz der SacroLoc. Die Rückenpelotten müssen in ihrer Position auf das Becken angepasst werden, sodass diese auf den hinteren oberen Darmbeinstacheln mit der inneren Aussparung aufliegen.

Üben Sie das richtige Anlegen mit dem Patienten.

Eine unsachgemäße Änderung am Produkt darf nicht vorgenommen werden. Bei Nichtbeachtung kann die Leistung des Produktes beeinträchtigt werden, so dass eine Produkthaftung ausgeschlossen wird.

Materialzusammensetzung

Polyamid (PA), Thermoplastisches Elastomer (SEBS), Polyurethan (PUR), Elastan (EL), Polypropylen (PP), Polyester (PES), Polyoxymethylen (POM), Baumwolle (CO), Polyethylen (PE), Acrylat-Kleber (A)

 – Medical Device

 – Kennzeichner der DataMatrix als UDI

barrierefreie Version

www.bauerfeind.de/barrierefrei

Stand der Information: 2022-04

* Hinweis auf Gefahr von Personenschäden (Verletzungs-, Gesundheits- und Unfallrisiko) ggf. Sachschaden (Schäden am Produkt).

¹ Orthese = orthopädisches Hilfsmittel zur Stabilisierung, Entlastung, Ruhigstellung, Führung oder Korrektur von Gliedmaßen oder Rumpf

² Fachpersonal ist jede Person, die nach den für Sie geltenden staatlichen Regelungen zur Anpassung und Einweisung in den Gebrauch von Orthesen befugt ist.

 english

Dear Customer,

thank you for choosing a Bauerfeind product.

We work to improve the medical effectiveness of our products every day – because your health is very important to us. Please read and observe these **instructions for use** carefully. If you have any questions, please contact your doctor or medical retailer.

Intended purpose

SacroLoc is a medical device. It is an orthosis¹ for the stabilization of the pelvis and targeted relief of the sacroiliac joints.

Indications

- Sacroiliac joint disorders (SI joint syndrome, osteoarthritis of the SI joint, SI joint instability)
- Pelvic girdle instability, e.g. symphysis rupture and loosening
- Sacroiliac joint blockage (acute and prophylactic)
- Myalgia and tendinopathy in the pelvic region
- Structural disturbances following spinal fusion (in the transition from L5 to S1)
- Non-surgical treatment following pelvic fractures

Risks of using this product

 **Caution***

Please closely observe the specifications in these instructions for use and the instructions given by the specialist.

- SacroLoc must only be worn in accordance with the specifications contained in these instructions and used for the areas of application (places of use) listed.
- No product liability is accepted in the event of improper use.
- The suitability and use of the orthosis¹ during pregnancy is to be determined by a physician on a case-by-case basis. If wearing the orthosis¹ during pregnancy feels uncomfortable, check size adjustments and application technique, seek medical advice, and refrain from further use if necessary. Side effects for the mother and fetus are not known.
- Only a specialist² may provide instruction.

- Use in combination with other products, e.g. as part of compression treatment (medical compression stockings), must be discussed beforehand with your physician.
- The SacroLoc is to be worn under your T-shirt or undershirt.
- If your symptoms get worse or you notice unusual changes to your body, please contact your physician without delay.
- Avoid the use of ointments, lotions or any substances including grease or acids.
- Side effects involving the body as a whole have not been reported to date. Correct fitting is assumed. Do not put the SacroLoc on too tightly as this could lead to local pressure symptoms. In rare cases, constriction of blood vessels and nerves may occur.

Contraindications

Hypersensitivity reactions harmful to health have not been reported to date. In the following conditions such aids should only be fitted and applied after consultation with your physician:

- Skin disorders / injuries in the relevant part of the body, particularly if inflammation is present. Likewise, any raised scars with swelling, redness and excessive heat build-up
- Impaired sensation and movement disorders, e.g. in the case of diabetes mellitus

Area of use

A – Back pad (massage cushion)

B – Right half of the fastening with finger pockets

C – Left half of the fastening with finger pockets

D – Tensioning straps

Putting the product on

① Position the orthosis¹ centrally on the pelvis, ensuring that the upper edge of the orthosis¹ is no higher than the upper edge of the iliac crest and below the waist. ② Then slide your fingers downward into the finger pockets provided on the fastening and steadily pull the fastening forward. ③ Then press the left half of the fastening onto your stomach and position the right half of the fastening on top of the left half so that it can be fastened to it on the left-hand side. When fastening the two halves, pull your fingers out of the left-hand finger pocket first and then out of the right-hand one. ④ Then take hold of the two tensioning straps and pull them forward, steadily and at the same time, until the desired level of tension (stabilization) is achieved. ⑤ Then fasten the two tensioning straps close together on the large fastening.

Care instructions

Note: Never expose the SacroLoc to direct heat (e.g. heater, sunlight, in your car, etc.)! This may cause damage to the material, which can impair the effectiveness of the SacroLoc.

The sewn-in label of the SacroLoc, containing information about the product name, size, manufacturer, washing instructions and CE identification, is located on the inside of the knitted fabric.

If necessary, you can wash the SacroLoc by hand with a mild detergent. Leave the orthosis¹ to air dry.

Part of the body this product is used for

In accordance with the indications (pelvis, sacroiliac joints). See purpose.

Maintenance instructions

If handled and cared for correctly, the product is practically maintenance-free.

Assembly and fitting instructions

The SacroLoc is supplied in a standard size and ready for use.

Technical specifications / parameters

SacroLoc is made of a knitted fabric with firm tensioning straps and removable back pads. The pack pads are attached with an unremovable terrycloth cover. The back pads can be supplied as spare parts.

Notes on reuse

This product is intended to be fitted to one patient only.

Warranty

The statutory regulations of the country of purchase apply. Please first contact the retailer from whom you obtained the product

directly in the event of a potential claim under the warranty. The product must be cleaned before submitting it in case of warranty claims. Warranty may be limited or excluded if the instructions on how to handle and care for the SacroLoc have not been observed. Warranty is excluded if:

- The product was not used according to the indication
- The instructions given by the specialist were not observed
- The product was modified arbitrarily

Duty to report

Due to regional legal regulations, you are required to immediately report any serious incident involving the use of this medical device to both the manufacturer and the responsible authority. Our contact details can be found on the back of this brochure.

Disposal

You can dispose of the product in accordance with national legal requirements.

Specialists²

General notes

Check the optimal and individual fit of the SacroLoc after the first fitting. Adjust the position of the back pads against the pelvis so that the pads are lying with the inner recess at the posterior superior iliac spine. Practice the correct procedure for putting on the orthosis with the patient. The product must not be changed in any improper way. Failure to comply with this requirement may adversely affect product performance, thereby voiding any product liability.

Material content

Polyamide (PA), Thermoplastic elastomer (SEBS), Polyurethane (PUR), Spandex (EL), Polypropylene (PP), Polyester (PES), Polyoxymethylene (POM), Cotton (CO), Polyethylene (PE), Acrylic Adhesive (A)

MDI – Medical Device
 UDI – DataMatrix Unique Device Identifier UDI

Version: 2022-04

* Note on the risk of personal injury (risk of injury, harm to health and accidents) or damage to property (damage to the product).

¹ Orthosis = orthopaedic appliance used to stabilize, relieve, immobilize, control or correct the limbs or the torso

²A specialist is any person who is authorized according to the state regulations for fitting and instruction in the use of orthoses which are relevant to you.

fr français

Chère cliente, cher client,

merci d’avoir choisi un produit Bauerfeind.

Tous les jours, nous travaillons à l’amélioration de l’efficacité médi-cale de nos produits, car votre santé nous tient particulièrement à cœur. Veuillez lire attentivement la **notice d’utilisation**. Pour toutes questions, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre reven-deur spécialisé.

Utilisation

SacroLoc est un dispositif médical. Il s’agit d’une orthèse¹ visant à stabiliser le bassin et à soulager de manière ciblée les articulations sacro-iliaques.

Indications

- Maladies de l’articulation sacro-iliaque (syndrome sacro-iliaque, arthrose sacro-iliaque, instabilité sacro-iliaque)
- Instabilité de la ceinture pelvienne, par ex. disjonction et relâche-ment symphysaires
- Blocage de l’articulation sacro-iliaque (aigu et prophylactique)
- Myalgies et tendopathies dans la région du bassin

- Lésions tissulaires après des spondylodèses (au niveau de la transition L5–S1)
- Traitement conservateur après des fractures du bassin

Risques d’utilisation

Attention*

- SacroLoc doit être porté conformément aux recommandations de cette notice d’utilisation et dans le respect des indications données (positionnement).
- Nous déclinons toute responsabilité en cas d’utilisation impropre ou inadaptée.
- La pertinence et l’utilisation de l’orthèse¹ pendant la grossesse doivent être, dans certains cas, approuvées par un médecin. Si le port de l’orthèse¹ est ressenti comme désagréable au cours de la grossesse, les paramètres concernant la taille et la technique de pose doivent être vérifiés, il faut prendre rendez-vous avec le médecin et, le cas échéant, prévoir une autre application. Les effets secondaires chez la mère et le fœtus ne sont pas connus.
- Seul le professionnel formé² est habilité à procéder à la mise en place.
- Une combinaison avec d’autres produits, par ex. dans le cadre d’un traitement de compression médicale veineuse (bas de compression), doit préalablement faire l’objet d’une consultation auprès de votre médecin traitant.
- Portez SacroLoc par dessus un t-shirt ou un maillot de corps.
- Si vous deviez constater une aggravation des problèmes ou des changements hors du commun au niveau de votre corps, veuillez consulter immédiatement votre médecin.
- Le produit ne doit pas être utilisé au contact de substances grasses ou acides, de crèmes ou de lotions.
- Aucun effet secondaire sur l’organisme en général n’est connu à ce jour. Il est cependant indispensable que ce dispositif soit correctement mis en place et utilisé. SacroLoc ne doit pas être porté trop serré afin d’éviter des pressions locales excessives. Une compression des vaisseaux sanguins et des nerfs est possible dans de rares cas.

Contre-indications

Aucune hypersensibilité cliniquement significative n’est connue à ce jour. En cas d’existence ou d’apparition des symptômes cités ci-après, l’utilisation de ce produit doit préalablement faire l’objet d’une consultation auprès de votre médecin habituel :
• Dermatoses / lésions cutanées dans la zone en contact avec l’appareillage, notamment en cas d’inflammations:cicatrices avec enflure, rougeur et hyperthermie.
• Troubles sensoriels et troubles moteurs, par ex. en présence d’un diabète sucré.

Utilisation

- A – Pelote dorsale (coussinet de massage)
- B – Côté droit de fermeture avec passant
- C – Côté gauche de fermeture avec passant
- D – Sangles de traction

Mise en place

❶ Positionnez l’orthèse¹ au centre du bassin, de sorte que le bord supérieur de l’orthèse¹ ne se situe pas au-dessus du bord supérieur de la crête iliaque ou n’aïlle pas jusqu’à la taille. **❷** Passez les doigts dans le passant prévu à cet effet au niveau de la fermeture et tirez de manière régulière la fermeture vers l’avant. **❸** Pressez maintenant le côté gauche de fermeture sur le ventre et amenez le côté droit de fermeture par dessus le côté gauche, de sorte à pouvoir fixer le « velcro ». Lors de la fixation du « velcro », retirez d’abord le doigt du passant gauche puis celui du passant droit. **❹** Prenez maintenant les deux sangles de traction dans vos deux mains et tirez-les vers l’avant de manière régulière jusqu’à obtenir l’effet (force) souhaité (stabilisation). **❺** Attachez ensuite par « velcro » les deux sangles de traction tout proche sur la grande fermeture l’une à côté de l’autre.

Entretien

Remarque : N’exposez jamais SacroLoc à la chaleur directe (par ex. chauffage, soleil, dans une voiture) ! La chaleur peut endommager le matériau. Cela peut limiter l’efficacité de SacroLoc. L’étiquette cousue de SacroLoc comprenant des informations sur le nom du produit, sa taille, le fabricant, les consignes de lavage et le sigle CE se trouve côté intérieur du tricot.

Au besoin, il est possible de nettoyer l’orthèse SacroLoc à la main avec un détergent doux. Laissez sécher l’orthèse¹ à l’air.

Position d’utilisation

Bassin, articulations sacro-iliaques suivant indications. Voir Indications.

Conseils d’entretien

Le produit n’exige pratiquement pas de maintenance particulière lorsqu’il est manipulé et entretenu correctement.

Instructions d’assemblage et d’adaptation

SacroLoc est livrée en taille standard, prête à l’emploi.

Caractéristiques techniques / Paramètres

La SacroLoc se compose d’un tricot avec des sangles de traction fixes et des pelotes dorsales amovibles. Les pelotes dorsales sont recouvertes de tissu éponge inséparable. Les pelotes dorsales sont disponibles sous forme de pièces de rechange.

Conseils pour une réutilisation

Ce dispositif est réservé à la prise en charge individuelle d’un seul patient ou d’une seule patiente.

Garantie

La législation en vigueur est celle du pays où le produit a été acheté. Si un cas de garantie est présumé, veuillez vous adresser premièrement à la personne à qui vous avez acheté le produit. Le produit doit être nettoyé avant de notifier un cas de garantie. En cas de non-respect des indications sur le maniement et l’entretien de la SacroLoc, la garantie peut être compromise, voire devenir nulle et non avenue.

La garantie est caduque dans les cas suivants :

- Utilisation non conforme aux indications
- Non-respect des consignes du professionnel formé
- Altération arbitraire du produit

Obligation de déclaration

Conformément aux dispositions légales en vigueur à l’échelle régionale, il vous incombe de signaler immédiatement, aussi bien au fabricant qu’aux autorités compétentes, tout incident grave lié à l’utilisation de ce produit médical. Vous pourrez trouver nos coordonnées au verso de cette brochure.

Élimination

Vous pouvez éliminer le produit conformément aux dispositions légales en vigueur dans votre pays.

Personnel formé²

Généralités

Vérifiez, lors de la première prise en charge, le positionnement optimal et individuel de SacroLoc.

Les pelotes dorsales doivent être bien ajustées à leur place sur le bassin de façon à reposer sur les épinés iliaques postéro-supérieures avec l’évidement intérieur.

Cherchez le bon positionnement avec le patient.

Aucune modification inadéquate du produit n’est autorisée. En cas de non-respect, les propriétés du produit peuvent en être affectées et notre responsabilité déagée.

Composition

Polyamide (PA), Élastomère thermoplastique (SEBS), Polyuréthane (PUR), Élasthanne (EL), Polypropylène (PP), Polyester (PES), Polyoxyméthylène (POM), Coton (CO), Polyéthylène (PE), Adhésif acrylique (A)

MDI – Medical Device (Dispositif médical)
 UDI – Identifiant de la matrice de données comme UDI

Mise à jour de l’information : 2022-04

* Informations sur les risques de dommages corporels (risques de blessures et d’accidents, dangers pour la santé), le cas échéant dommage matériel (sur le produit).

¹ Orthèse = dispositif orthopédique pour stabiliser, décharger, immobiliser, guider ou corriger un membre ou le tronc

² Un personnel formé est une personne qui est formée à l’utilisation des orthèses conformément aux réglementations nationales en vigueur dans chaque pays concernant l’adaptation et la mise en place de ce type de produit.

nl nederlands

Geachte klant,

hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van Bauerfeind.

Elke dag werken wij aan de verbetering van de medische effectiviteit van onze producten. Gelieve deze **gebruiksaanwijzing** zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Neem voor vragen contact op met uw arts of uw speciaalzaak.

Beoogd gebruik

SacroLoc is een medisch hulpmiddel. Het is een orthese¹ voor de stabilisatie van het bekken en een gerichte ontlasting van de SI-gewrichten (sacro-iliaaal-gewrichten).

Indicaties

- Aandoeningen van het SI- gewricht (SI-syndroom, SI-artrose, SI-instabiliteit)
- Instabiliteit van de bekkengordel, bijv. verharding en verslapping van de symfyse
- Blokkering SI-gewricht (acuut en profylactisch)
- Myalgieën en tendopathieën in het bekkengebied
- Structuuranomalie na spondylodese (bij de overgang L5–S1)
- Conservatieve behandeling na bekenfracturen

Gebruiksrisico's

Opgelet*

Gelieve de instructies van deze gebruiksaanwijzing en de opmerkingen van het geschoolde personeel heel nauwkeurig op te volgen.

- SacroLoc mag slechts volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing en de genoemde toepassingsgebieden (inzetgebied) worden gedragen.
- Bij onjuist gebruik of gebruik voor andere doeleinden kan Bauerfeind niet aansprakelijk worden gesteld.
- De geschiktheid en toepassing van de orthese¹ tijdens de duur van de zwangerschap moet voor elke patiënt afzonderlijk met de arts worden afgestemd. Indien het dragen van de orthese¹ tijdens de zwangerschap als onaangenaam wordt ervaren, kunnen de grootte en manier van aantrekken worden aangepast, contact worden opgenomen met de arts of eventueel worden afgezien van het dragen van de orthese¹. Er zijn geen bijwerkingen bekend voor moeder en foetus.
- De eerste keer mag de orthese alleen worden aangetrokken onder begeleiding van geschoold personeel².
- Bespreek eventuele combinaties met andere producten bijv. in het kader van een compressietherapie (therapeutische compressiekousen) vooraf met Uw behandelend arts.
- Draag de SacroLoc over Uw T-shirt of hemd.
- Indien de klachten verergeren of indien u bijzondere veranderingen aan uw lichaam constateert, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
- Geen vet en zuurhoudende middelen, zalf of lotion gebruiken.
- Bijwerkingen, die het gehele lichaam betreffen, zijn tot op heden niet bekend. Voorwaarde hiervoor is dat het hulpmiddel vakkundig wordt aangelegd. Doe de SacroLoc niet te strak om, hierdoor kunnen lokale drukverschijnselen ontstaan. In enkele gevallen is afknellen van bloedvaten en zenuwen mogelijk.

Contra-indicaties

Over het ziekteverschijnsel overgevoeligheid is tot nu toe niets bekend. Bij de volgende ziektebeelden is het raadzaam vóór het aanpassen en dragen van hulpmiddelen eerst met Uw arts te overleggen:

- Huidaandoeningen / -verwondingen van het te behandelen lichaamsdeel, vooral bij ontstekingen.
- Gevoels- en bewegingsstoornissen, bijv. suikerziekte (diabetes mellitus).

Toepassingsgebied

A – rugpelotte (massagekussen)

B – rechtersluiting met vingeropening

C – linkersluiting met vingeropening

D – klittenband

Aanleggen

1 Plaats de orthese¹ in het midden van het bekken zodat de bovenste rand van de orthese¹ niet boven de bekkenrand komt of in de taille zit.
2 Schuif Uw hand nu van bovenaf in de hiervoor bedoelde handgreep op de sluiting en trek de sluiting gelijkmatig naar voren.
3 Druk de linkersluiting nu op Uw buik en leg de rechtersluiting zover over de linker heen tot U de rechtersluiting op de linkersluiting kunt vastplakken. Haal bij het vastplakken eerst Uw hand uit de linkerhandgreep en dan uit de rechterhandgreep.
4 Neem de twee klittenbanden nu in Uw handen en trek ze tegelijkertijd en gelijkmatig naar voren tot de gewenste kracht (stabilisering) is opgebouwd.
5 Daarna plakt u de twee klittenbanden dicht naast elkaar op de grote sluiting.

Wasvoorschrift

Aanwijzing: Stel de SacroLoc nooit bloot aan directe hitte (bv. verwarming, zonlicht, opslag in personenauto)! Het materiaal kan beschadigd raken. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de goede werking van de SacroLoc.

Het ingenaaide etiket van de SacroLoc met informatie over productnaam, maat, fabrikant, wasinstructies en CE-keurmerk bevindt zich aan de binnenkant van het breiwerk.

Indien nodig kunt u SacroLoc met de hand met een mild wasmiddel reinigen. Laat de orthese¹ aan de lucht drogen.

Inzetgebied

Overeenkomstig de indicaties (bekken, SI-gewrichten). Zie beoogd gebruik.

Onderhoudsinstructies

Bij juist gebruik en de nodige reiniging is het product praktisch onderhoudsvrij.

Montageaanwijzing

De SacroLoc wordt in 1 maat, gebruiksklaar geleverd.

Technische gegevens / Parameters

De SacroLoc bestaat uit een breiwerk met vaste klittenbanden en verwijderbare rugpelottes. De rugpelottes zitten vast aan een omhulsel van frottéweefsel. De rugpelottes zijn ook verkrijgbaar als reserveonderdeel.

Aanwijzingen voor hergebruik

Het product is bedoeld voor individueel gebruik door één patiënt(e).

Garantie

De wettelijke bepalingen van het land waar het product is gekocht gelden. Als u meent dat u aanspraak op garantie kunt maken, neem dan in eerste instantie contact op met degene van wie u het product hebt gekocht. Het product dient te worden gereinigd vóór de aansprakelijkstelling. Indien de aanwijzingen over het gebruik en het onderhoud van de SacroLoc niet zijn nageleefd, kan de garantie worden beperkt of uitgesloten.

De garantie is uitgesloten bij:

- Oneigenlijk gebruik
- Het niet opvolgen van de aanwijzingen van geschoold personeel
- Eigenmachtige productwijziging

Meldingsplicht

Op grond van de regionale wettelijke voorschriften bent u verplicht elk ernstig voorval bij gebruik van dit medische hulpmiddel, onmiddellijk te melden bij zowel de fabrikant als de bevoegde instantie. Onze contactgegevens vindt u op de achterkant van deze brochure.

Verwijderen

U kunt het product volgens de nationale wettelijke voorschriften laten verwijderen.

Geschoold personeel²

Instructies voor gebruik

Controleer na de eerste verzorging of de SacroLoc optimaal en goed aangepast zit. De rugpelotten moeten zo op het bekken gepositioneerd worden dat ze met de binnenste uitsparing op de achterbovenste darmbeensdoornen liggen. Oefen het correct omdoen met de patiënt. Er mag geen ondeskundige verandering aan het product worden uitgevoerd. Wanneer dit gebeurt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties van het product. Daarom is in dergelijke gevallen een productaansprakelijkheid uitgesloten.

Materiaalsamenstelling

Polyamide (PA), Thermoplastisch elastomeer (SEBS), Polyurethaan (PUR), Elastaan (EL), Polypropeen (PP), Polyester (PES), Polyoxymethyleen (POM), Katoen (CO), Polyetheen (PE), Acrylaaltlijm (A)

– Medical device (Medisch hulpmiddel)

– Identificatiecode van de DataMatrix als UDI

Datering: 2022-04

^{*} Informatie over gevaar voor persoonlijk letsel (verwondingen, gezondheids- en ongevallennisico) en eventueel materiële schade (schade aan het product).

¹ Orthese = orthopedisch hulpmiddel ter stabilisatie, ontlasting, immobilisatie, geleiding of correctie van ledematen of van de romp

² Geschoold personeel is iedere persoon die volgens de regels die voor hem van toepassing zijn, bevoegd is om ortheses aan te meten en patiënten te instrueren over het gebruik ervan.

it italiano
Gentile cliente, la ringraziamo per aver scelto un prodotto Bauerfeind. Ogni giorno lavoriamo per migliorare l'efficacia medicale dei nostri prodotti, al fine di garantirle la massima soddisfazione. La preghiamo leggere e osservare attentamente queste istruzioni per l'uso. Per eventuali domande contatti il suo medico o il suo rivenditore specializzato. Destinazione d'uso SacroLoc è un prodotto medicale. È un'ortesi¹ per la stabilizzazione del bacino e lo scarico mirato dell'articolazione sacroiliaca. Indicazioni - Patologie dell'articolazione sacroiliaca (sindrome sacroiliaca, artrosi sacroiliaca, instabilità sacroiliaca) - Instabilità del cingolo pelvico, per es. diastasi e rottura della sinfisi pubica - Blocco sacroiliaco (forme acute e profilassi) - Mialgie e tendinopatie a carico della regione del bacino - Anomalia strutturale in seguito a spondilodesi (nel passaggio L5–S1) - Trattamento conservativo in seguito a fratture del bacino Rischi d'impiego ⚠ Cautela* Si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni della presente istruzione per l'uso e alle avvertenze del personale specializzato. - SacroLoc deve essere indossato solo secondo le indicazioni fornite nelle presenti istruzioni per l'uso e per i campi di applicazione indicati. - L'uso improprio o non conforme allo scopo previsto non è coperto da garanzia.

- L'idoneità e l'applicazione dell'ortesi¹ per la durata della gravidanza dovrà essere valutata su base individuale da un medico. Qualora indossare l'ortesi¹ dovesse risultare scomodo durante la gravidanza, è opportuno agire sulle regolazioni, adattare la tecnica per indossare l'ortesi stessa, consultare un medico ed eventualmente interrompere l'utilizzo. Non sono noti effetti collaterali a carico della madre e del feto.
- Le spiegazioni al paziente devono essere affidate unicamente a personale specializzato².
- Discutere dell'eventuale combinazione con altri prodotti, per es. nell'ambito di una terapia di compressione (calze di compressione), con il proprio medico curante.
- Indossare SacroLoc al di sopra della T-shirt o della biancheria intima.
- Qualora i dolori aumentino o nel caso in cui si osservino cambiamenti fisici inusuali, consultare immediatamente il proprio medico curante.
- Evitare il contatto del prodotto con pomate e lozioni contenenti acidi e grassi.
- Non sono noti effetti collaterali a carico dell'intero organismo. Si presuppone un uso appropriato del prodotto. Non indossare SacroLoc troppo stretto, poiché potrebbe provocare fenomeni di compressione locale. In casi rari, è possibile una costrizione di vasi sanguigni e nervi.

Controindicazioni

- Ipersensibilizzazioni di entità patologica o controindicazioni sistemiche sono per ora ignote. Nel caso delle malattie seguenti l'impiego di questo ausilio è consentito solo previa consultazione del medico:
- Dermatiti o lesioni della zona bendata, in particolare nei casi di manifestazioni infiammatorie; nonché in caso di cicatrici sporgenti con gonfiore, surriscaldate e arrossate
- Paralgesie e disturbi del movimento, per es. in caso di diabete mellito

Campo di applicazione

A – Pelotta dorsale (imbottitura massaggiante)

B – Metà destra della chiusura con taschino per le dita

C – Metà sinistra della chiusura con taschino per le dita

D – Cinturini di trazione

Come indossare l'ortesi

1 Posizionare l'ortesi¹ al centro del bacino in modo che il bordo superiore dell'ortesi¹ stessa non superi il bordo superiore della cresta iliaca e non arrivi fino alla vita.
2 Infilare ora le dita negli appositi taschini delle due metà della chiusura e tirare avanti a sé le due metà della chiusura in modo uniforme.
3 Premere la metà sinistra della chiusura sull'addome e tirare la metà destra sopra alla sinistra fino a che non si riesca a fissarla sopra di essa. Nel fissaggio, togliere le dita prima dal taschino sinistro e successivamente dal taschino destro.
4 Ora afferrare i due cinturini di trazione e tirarli contemporaneamente e uniformemente avanti a sé fino ad applicare la la forza desiderata (stabilizzazione).
5 Quindi fissare i due cinturini di trazione uno accanto all'altro sulla chiusura più grande.

Istruzioni per la pulizia

Nota: non esporre mai SacroLoc al calore diretto (per es. termosifoni, raggi solari, conservazione in automobile)! Il materiale del prodotto potrebbe deteriorarsi, compromettendo l'efficacia di SacroLoc.

L'etichetta di SacroLoc con informazioni relative a nome del prodotto, taglia, produttore, istruzioni per il lavaggio e marchio CE è cucita sul lato interno del tessuto a maglia.

Se necessario SacroLoc può essere lavata a mano con un detergente delicato. Lasciare asciugare l'ortesi¹ all'aria.

Campo di applicazione

Secondo le indicazioni (bacino, articolazione sacroiliaca). Ved. Destinazione d'uso.

Avvertenze per la manutenzione

Se correttamente utilizzato e trattato, il prodotto non necessita di manutenzione.

Istruzioni per l'assemblaggio e il montaggio

SacroLoc è fornito pronto per l'uso in taglia standard.

Dati / parametri tecnici

SacroLoc è composto da tessuto a maglia con cinturini di trazione fissi e sostegni metatarsali dorsali rimovibili. Le pelotte dorsali non sono separabili e sono unite da un involucri in tessuto di spugna. Le pelotte dorsali sono disponibili come parti di ricambio.

Avvertenze per il riutilizzo

Questo prodotto è stato concepito per il trattamento individuale di un/a solo/a paziente.

Garanzia

Si applicano le disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui si ritenga di aver titolo per usufruire della garanzia, rivolgersi in primo luogo al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto. Prima di poter usufruire della garanzia il prodotto deve essere lavato. Qualora non fossero state rispettate le indicazioni per la cura e l'utilizzo di SacroLoc, ciò potrebbe comportare una limitazione o un'esclusione della garanzia.

La garanzia è esclusa in caso di:

- Utilizzo non conforme alle indicazioni

- Mancata osservanza delle indicazioni fornite dal personale specializzato
- Modifica arbitraria del prodotto

Obbligo di notifica

In base alle disposizioni di legge in vigore a livello regionale, qualsiasi inconveniente/incidente verificatosi durante l'uso del presente prodotto medicale deve essere immediatamente notificato al produttore e all'autorità competente. I nostri dati di contatto si trovano sul retro della presente brochure.

Smaltimento

Il prodotto può essere smaltito conformemente alle disposizioni di legge nazionali.

Personale specializzato²

Avvertenze generali

Dopo il primo trattamento, verificare che SacroLoc sia correttamente in posizione in base alla situazione individuale del paziente.

Adattare la posizione dei sostegni dorsali sul bacino di modo che le spine iliache postero-superiori risultino posizionate negli incavi interni.

Fare esercitare il paziente a indossare correttamente l'ortesi.

Il prodotto non può essere modificato in modo improprio. L'inadempienza di tale norma può comprometterne l'efficacia e precludere ogni garanzia.

Composizione del materiale

Poliammide (PA), Elastomero termoplastico (SEBS), Poliuretano (PUR), Elasthan (EL), Polipropilene (PP), Poliestere (PES), Poliossimetilene (POM), Cotone (CO), Polietilene (PE), Colla acrilica (A)

– Medical Device (Dispositivo medico)

– Identificativo della matrice di dati UDI

Informazioni aggiornate a: 2022-04

^{*} Avvertenza sul pericolo di danni alle persone (rischio di lesioni, di danni alla salute e di infortuni) o alle cose (danni al prodotto).

¹ Ortesi = supporto ortopedico per la stabilizzazione, l'alleggerimento, l'immobilizzazione, la guida o la correzione degli arti o del tronco

² Per personale specializzato si intende qualsiasi persona sia autorizzata all'adattamento e all'addestramento all'impiego al ortesi secondo le direttive nazionali vigenti nel paese di utilizzo.

Estimado / a cliente / a,

muchas gracias por haberse decidido por un producto Bauerfeind.

Una de nuestras prioridades es su salud, por lo que todos los días trabajamos para mejorar la eficacia medicinal de nuestros productos.

Por favor, lea y siga estas **instrucciones de uso** atentamente. Para cualquier pregunta, póngase en contacto con su médico o su tienda especializada.

Ámbito de aplicación

SacroLoc es un producto médico. Se trata de una ortesis¹ para la estabilización de la pelvis y descarga controlada de las articulaciones sacroilíacas.

Indicaciones

- Dolencias de la articulación iliosacra (irritaciones de la articulación iliosacra, artrosis en la articulación iliosacra, inestabilidad de la articulación iliosacra)
- Inestabilidad del anillo pélvico, p.ej. sinfisiotomía y relajación de la sínfisis
- Bloqueo de la articulación sacroilíaca (aguda y profiláctica)
- Mialgias y tendinopatías en la región pélvica
- Trastornos estructurales tras espondilodesis (en la transición L5–S1)
- Tratamientos conservadores tras fracturas de pelvis

Riesgos de aplicación

Precaución*

Observe atentamente las especificaciones de estas instrucciones de uso, así como las indicaciones del personal especializado.

- SacroLoc debe llevarse solo siguiendo las instrucciones aquí mencionadas y para las indicaciones descritas (lugar de aplicación).
- En caso de utilización inadecuada o para otro uso denegamos toda responsabilidad.
- La idoneidad y utilización de la órtesis¹ durante el período de embarazo debe consultarse en todo caso con un médico. Si la utilización de la órtesis¹ durante el embarazo origina molestias, deberán comprobarse el ajuste de talla y la técnica de aplicación, consultar con un médico y, en caso necesario, prescindir de su utilización. Se desconoce la existencia o alcance de posibles efectos secundarios para la madre y el feto.
- La instrucción solo puede ser realizada por personal competente².
- El uso en combinación con otros productos, p. ej. en el marco de una terapia de compresión (medias de compresión), solo puede realizarse previo consejo médico.
- Lleve SacroLoc sobre la camiseta o prenda interior.
- Si aumentan las molestias o detecta cambios anormales, consulte inmediatamente a su médico.
- Evite el uso de pomadas o ungüentos que contengan grasas o ácidos.
- Hasta ahora no se conocen reacciones adversas que afecten a la totalidad del organismo. siempre que el producto esté colocado y se use correctamente. No apriete demasiado SacroLoc, ya que puede producir presión local. o, rara vez, constricción en los vasos sanguíneos y los nervios.

Contraindicaciones

No se han constatado reacciones de hipersensibilidad hasta la fecha. En el caso de presentarse alguno de los cuadros clínicos que se indican a continuación, deberá consultar con su médico:

- Afecciones / lesiones cutáneas en la zona correspondiente del cuerpo, especialmente inflamaciones.También cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor
- Pérdida de sensibilidad y alteraciones en el movimiento, como en la diabetes mellitus

Componentes

A – Almohadilla lumbar (almohadilla de masaje)

B – Mitad de cierre derecha con abertura para los dedos

C – Mitad de cierre izquierda con abertura para los dedos

D – Cinturones ajustables

Colocación

❶ Coloque la órtesis¹ centrada sobre la pelvis, de modo que el borde superior derecho de la órtesis¹ no supere el borde superior de la cresta ilíaca ni llegue a la cintura.
❷ Ahora, meta los dedos desde arriba en la abertura prevista para ellos en el cierre y tire regularmente del cierre hacia delante.
❸ Presione la mitad izquierda del cierre sobre el abdomen y cúbrala con la mitad derecha del cierre hasta que pueda cerrar el Velcro®. Al cerrar el Velcro®, primero saque los dedos de la abertura izquierda y después de la derecha.
❹ Ahora, sujete los dos cinturones de ajuste con ambas manos y tire regular y simultáneamente de ellos hacia delante, hasta lograr la aplicación de fuerza deseada (estabilización).
❺ A continuación, sujete ambos cinturones de ajuste uno junto al otro sobre el cierre grande.

Cuidado del producto

Recomendación: No deje nunca SacroLoc sobre una fuente directa de calor (p. ej. calefacción, rayos del sol, en el coche) ya que se puede dañar el producto y esto puede mermar la efectividad de SacroLoc.

Lea la etiqueta cosida de SacroLoc, que contiene datos como el nombre del producto, la talla, el fabricante, instrucciones de lavado y símbolo CE, en el interior del tejido.

En caso de necesidad, la órtesis SacroLoc se puede lavar a mano con un detergente suave. Deje secar la órtesis¹ al aire.

Lugar de aplicación

Corresponde a las indicaciones (pelvis, articulación iliosacra).
Ámbito de aplicación.

Instrucciones de mantenimiento

Si se maneja y cuida de modo apropiado, el producto apenas exige mantenimiento.

Indicaciones de montaje

SacroLoc se suministra en talla estándar, listo para ser utilizado.

Datos técnicos / parámetros

SacroLoc está compuesta por un tejido con cinturones de tracción firmes y almohadillas lumbares desmontables. Las almohadillas lumbares tienen una funda de rizo que no se puede desmontar. Las almohadillas lumbares se pueden adquirir como repuestos.

Información sobre su reutilización

El producto está destinado al tratamiento individual de un paciente.

Garantía

Serán aplicables las disposiciones legales del país en el que se haya adquirido el producto. Por favor, en caso de reclamaciones de garantía, diríjase directamente al punto de venta donde haya adquirido el producto. El producto debe limpiarse antes de entregarse para la prestación de los servicios en garantía. No respetar las indicaciones sobre el uso y el cuidado de SacroLoc puede afectar o excluir la garantía.
Queda excluida la garantía en caso de:
• Uso no conforme al indicado
• No seguir las indicaciones del personal competente
• Realizar cambios arbitrarios en el producto

Obligación de informar

De conformidad a las normas legales regionales vigentes, usted tiene la obligación de informar inmediatamente sobre cualquier hecho grave aparecido durante el uso de este producto médico tanto al fabricante como a las autoridades competentes. Encontrará nuestros datos de contacto en el reverso del folleto del producto.

Eliminación

Puede eliminar el producto conforme a la normativa legal nacional.

Personal competente²

Recomendaciones generales

Tras el primer tratamiento, compruebe la óptima adaptación individual de SacroLoc.

La posición de las almohadillas dorsales debe ajustarse a la pelvis de manera que se apoyen en las espinas ilíacas posteriores superiores con el hueco interior.

Practique con el paciente la correcta colocación del producto.

No se permite realizar ninguna alteración inadecuada del producto. Si hace caso omiso a esta advertencia, la eficacia del mismo puede verse afectada y la garantía perder su validez.

Combinación de materiales

Poliamida (PA), Elastómero termoplástico (SEBS), Poliuretano (PUR), Elastano (EL), Polipropileno (PP), Poliéster (PES), Polioximetileno (POM), Algodón (CO), Polietileno (PE), Adherente acrílico (A)

 – Medical Device (Dispositivo médico)

 – Distintivo de la matriz de datos como UDI

Informaciones actualizadas de: 2022-04

*Indicación de peligro de daños personales (riesgo de lesión, para la salud y de accidente) o daños materiales (daños al producto).

¹ Ortesis = medio ortopédico para estabilizar, aliviar, inmovilizar, guiar o corregir las extremidades o el tronco

² Se considera personal competente a toda aquella persona que, conforme a la normativa estatal aplicable, esté autorizada para adaptar ortesis e instruir sobre su uso.

(pt) português

Estimado(a) cliente,

muito obrigado por ter optado por um produto da Bauerfeind.

Trabalhamos diariamente para melhorarmos a eficácia médica dos nossos produtos, pois a sua saúde é a nossa prioridade. Leia e observe estas **instruções de utilização** atentamente. Em caso de dúvida, contacte o seu médico ou a sua loja da especialidade.

Finalidade

SacroLoc é um produto médico. É uma ortótese¹ para estabilização da bacia e alívio preciso das articulações sacroilíacas.

Indicações

- Doenças das articulações sacroilíacas (síndrome da articulação sacroilíaca, artrose da articulação sacroilíaca, instabilidade da articulação sacroilíaca)
- Instabilidade do anel pélvico, por ex., disjunção da sínfise púbica
- Disfunção das articulações sacroilíacas (súbita e profilática)
- Mialgias e tendinopatias da região da bacia
- Perturbação após fusão espinal (na transição L5 – S1)
- Tratamento conservador após fraturas da bacia

Riscos inerentes à aplicação

Cuidado*

Observe cuidadosamente as especificações destas instruções de utilização e das indicações do pessoal técnico.

- O SacroLoc apenas deve ser utilizado de acordo com as indicações destas instruções de utilização e nas áreas de aplicação (local de aplicação) mencionadas.
- Não assumiremos responsabilidade pelo produto no caso de uma utilização para outra finalidade que não a indicada.
- A adequação e aplicação da ortótese¹ durante gravidez deve ser determinada clinicamente caso a caso. Em caso de desconforto durante a utilização da ortótese¹ no decurso da gravidez, verificar o ajuste de tamanho e a técnica de aplicação, consultar o médico e eventualmente interromper a aplicação. Não são conhecidos efeitos secundários para a mãe e o embrião.
- O fornecimento de instruções apenas deve ser efetuado pelo pessoal técnico².
- Se pretende combinar a utilização com outros produtos, por ex. no âmbito de um tratamento de compressão (meias de compressão), consulte previamente o seu médico.
- Utilize o SacroLoc por cima de uma t-shirt ou camisola interior.
- Caso sinta um aumento das dores ou note alterações incomuns no seu corpo, consulte imediatamente o seu médico.

- Evite a utilização de pomadas, loções ou substâncias gordurosas ou que contenham ácidos.
- Até ao momento, não são conhecidos efeitos secundários que afetem todo o organismo. Parte-se do princípio de que o produto é aplicado / colocado correctamente. Não aperte demasiado o SacroLoc, pois tal poderá provocar compressões locais. Em casos raros, pode ocorrer uma compressão dos vasos sanguíneos e nervos.

Contra-indicações

Até ao momento, não são conhecidas reacções de hipersensibilidade ao produto. Se o seu quadro clínico apresentar uma das seguintes condições, recomendamos que coloque e use a ortótese só depois de consultar o seu médico:

- Doenças de pele ou lesões na parte do corpo que está a ser tratada, especialmente se existirem sintomas inflamatórios, cicatrizes abertas com edema, vermelhidão e sensação de calor
- Alterações da sensibilidade e distúrbios de circulação, por ex. em caso de diabetes

Área de aplicação

A – Almofada lombar (superfície acolchoada de massagem)

B – Parte direita do fecho com abertura para os dedos

C – Parte esquerda do fecho com abertura para os dedos

D – Cinta de aperto

Colocar

❶ Posicione a ortótese¹ de modo a que fique centrada sobre a pélvis e que o rebordo superior da mesma não ultrapasse o rebordo superior da crista ilíaca, isto é, não chegue até à cintura.
❷ Insira os dedos a partir de cima nas aberturas existentes e puxe as duas partes do fecho uniformemente para a frente.
❸ Pressione a parte esquerda do fecho sobre o estômago e coloque a parte direita do fecho sobre a esquerda, até estas prenderem uma na outra. Ao prender, retire os dedos primeiro da abertura esquerda e, em seguida, da direita.
❹ Segure as duas cintas de aperto com ambas as mãos e puxe-as ao mesmo tempo para a frente, até obter a força de aperto pretendida (estabilização).
❺ Em seguida, prenda ambas as cintas de aperto sobre o fecho grande, uma junto da outra.

Indicações de conservação

Nota: nunca exponha o SacroLoc ao calor directo (por ex. aquecimento, radiação solar, no interior de veículos)! Tal pode provocar danos no material. Isto pode comprometer a eficácia do SacroLoc.

A etiqueta do SacroLoc com informações sobre o nome do produto, tamanho, fabricante, instruções de lavagem e a marcação CE encontram-se no interior do tecido em malha.

Em caso de necessidade, pode lavar o SacroLoc à mão com um detergente suave. Deixe a ortótese¹ secar ao ar.

Local de aplicação

Consoante as indicações (pélvis, articulação sacro-ilíaca). Consulte a finalidade.

Indicações de manutenção

O produto praticamente não necessita de manutenção se for utilizado correctamente e se as indicações de conservação forem tidas em atenção.

Instruções de montagem

O SacroLoc é fornecido em tamanho padrão e pronto para utilização.

Dados técnicos / parâmetros

O SacroLoc é composto por um tecido de malha com cintas de aperto de apoio e almofadas lumbares removíveis. As almofadas lumbares são ligadas inseparavelmente com um revestimento de malha elástica. As almofadas lumbares são fornecidas como peças de substituição.

Indicações sobre a reutilização

O produto destina-se ao tratamento individual de um paciente.

Garantia

Aplicam-se os regulamentos legais do país no qual o produto foi adquirido. Caso presuma uma reclamação de garantia, dirija-se diretamente à pessoa junto da qual adquiriu o produto. O produto

deve ser limpo antes de uma reclamação ao abrigo da garantia. Caso as instruções sobre o manuseamento e os cuidados com a SacroLoc não tenham sido observadas, a garantia pode ser limitada ou excluída.

Exclui-se a garantia nos seguintes casos:

- Utilização não conforme com as instruções
- Não observância das instruções dos profissionais de saúde
- Alterações não autorizadas ao produto

Dever de notificação

Devido a normas legais regionais, é obrigado(a) a comunicar de imediato, tanto ao fabricante como à autoridade competente, qualquer incidente grave durante a utilização deste produto médico. Encontra os nossos dados para contacto no verso deste desdobrável.

Eliminação

Pode eliminar o produto de acordo com as normas legais nacionais.

Pessoal técnico²

Indicações gerais

Depois do primeiro tratamento, certifique-se de que o SacroLoc está colocado correctamente e de forma ideal para o caso em questão. A posição das almofadas lombares deve ser ajustada à pélvis para que fiquem apoiadas nas espinhas ilíacas anteriores superiores com o entalhe interno.

Pratique a colocação correcta com o paciente.

Não realize alterações inadequadas no produto. Em caso de inobservância, o produto pode não produzir o efeito pretendido. Nesse caso, não assumiremos responsabilidade pelo produto.

Composição do material

Poliamida (PA), Elastómero termoplástico (SEBS), Poliuretano (PUR), Elastano (EL), Polipropileno (PP), Poliéster (PES), Polioximetileno (POM), Algodão (CO), Polietileno (PE), Adesivo acrílico (A)

MD – Medical Device (Dispositivo Médico)

UDI – Identificador da matriz de dados como UDI

Versão atualizada em: 2022-04

*Indicação acerca do perigo de lesões (risco de ferimentos, para a saúde e de acidente) ou danos materiais (danos no produto).
1 Órtese = meio auxiliar ortopédico para a estabilização, alívio, imobilização, guia e correção de membros ou do tronco
2Por pessoal técnico qualificado entende-se qualquer pessoa que, de acordo com os regulamentos oficiais em vigor no seu país, esteja autorizada a efectuar o ajuste e o fornecimento de instruções relativamente à utilização de ortóteses.

	sv svenska
---------------	--------------------------------------

Bästa kund,

tack för du har valt en produkt från Bauerfeind.

Eftersom din hälsa är viktig för oss arbetar vi varje dag med att förbättra den medicinska effekten hos våra produkter. Läs och följ denna **bruksanvisning** noggrant. Vänd dig till din läkare eller fackhandel om du har frågor.

Ändamålsbestämning

SacroLoc är en medicinsk produkt. Det är en ortos¹ för stabilisering av bäckenet och anpassad avlastning av sakroiliakalederna.

Indikationer

- Sjukdomar i sakroiliakaleden (sakroiliakaled-syndrom, artros i sakroiliakaleden, instabilitet i sakroiliakaleden)
- Instabilitet i bäckenringen, t ex symfyssprängning och -uppluckring
- Blockering i sakroiliakaleden (akut och profylaktisk)
- Myalgi och tendopati i bäckenregionen
- Ledbesvär efter spondylodes (i övergången L5–S1)
- Traditionell behandling efter bäckenfrakturer

Risker vid användning



Observera*

Följ noggrant anvisningarna i denna bruksanvisning samt instruktioner från fackpersonal.

- SacroLoc ska användas i enlighet med denna bruksanvisning och endast för de ändamål som anges här.
- Vid felaktig användning gäller ej garantin.
- Lämplighet och användning av ortos¹ under graviditet avgörs från fall till fall i samråd med läkare. Om du under graviditetens gång upplever obehag vid användning av ortosen¹, bör du kontrollera storleksinställningarna och påtagningstekniken, rådfråga en läkare samt i förekommande fall avstå från fortsatt användning. Inga kända biverkningar för mor och foster.
- Vid första användningen måste ortosen justeras av fackpersonal².
- En kombination med andra produkter, t.ex. inom ramen för en kompressionsterapi (kompressionsstrumpa) ska diskuteras i förväg med din behandlande läkare.
- Bär SacroLoc utanpå din t-shirt eller undertröja.
- Om besvären tilltar eller du noterar ovanliga förändringar på din kopp, kontakta omgående din läkare.
- Låt inte produkten komma i kontakt med fett- eller syrehaltiga medel, salvor eller lotioner.
- Biverkningar som hänför sig till kroppen i sin helhet är hittills inte kända. Förutsättning är att produkten används på föreskrivet sätt. Ta inte på din SacroLoc för hårt, eftersom det då kan leda till lokala trycksymptom. I sällsynta fall kan det leda till att blodkärl eller nerver kläms åt.

Kontraindikationer

Överkänslighetsreaktioner av medicinsk karaktär är inte kända. Vid följande sjukdomsbilder skall läkare rådfrågas innan hjälpmedlet används:

- Hudsjukdomar / -skador, framför allt vid inflammatoriska symptom inom det område som berörs av hjälpmedlet. Detta gäller även för uppspruckna ärr som hettar och uppvisar svullnad och rodnad
- Överkänslighetsreaktioner och rörelsestörningar t.ex. vid sockersjuka (diabetes mellitus)

Användningsområde

A – ryggpelott (massagedyna)

B – höger tillslutningshälfvt med fingerficka

C – vänster tillslutningshälfvt med fingerficka

D – dragrem

Ta på

❶ Positionera ortosen¹ i mitten av bäckenet, så att ortosens¹ övre kant inte överskrider bäckenkammen eller når upp till midjan. **❷** Skjut sedan in fingrarna ovanifrån i fingerfickorna på tillslutningen och dra åt tillslutningen jämnt framåt. **❸** Tryck sedan den vänstra tillslutningsdelen mot magen och lägg den högra tillslutningsdelen så långt över den vänstra at du kan fästa den på den vänstra. Dra först ut fingret ur den vänstra och därefter den högra fingerfickan. **❹** Ta sedan dragremmarna i vardera handen och dra dessa samtidigt och jämnt framåt, tills önskad kraftpåverkan (stabilisering) är uppnådd. **❺** Fäst sedan de båda dragremmarna tätt bredvid varandra på den stora tillslutningen.

Skötselråd

Observera: Utsätt aldrig SacroLoc för direkt hetta (t.ex. uppvärmning, solljus, förvaring i personbil)! Materialet kan skadas. Detta kan påverka SacroLocs® effektivitet negativt.

Den isydda etiketten på SacroLoc med information om produktnamn, storlek, tillverkare, tvättråd och CE-märkning finns på insidan av tyget.

Vid behov kan du tvätta SacroLoc tvättas för hand med ett mild tvättmedel. Låt ortosen¹ lufttorka.

Användningsområde

Enligt symptomen (bäcken, sakroiliakaled). Se funktion

Skötselanvisningar

Vid rätt hantering och skötsel är produkten underhållsfri.

Monteringsanvisningar

SacroLoc levereras färdig att användas.

Tekniska data / parametrar

SacroLoc består av ett stickat material med fasta dragremmar och avtagbara ryggpelletter. Ryggpelletterna sitter ihop med ett frottéhölje som inte kan avlägsnas. Nya ryggpelletter kan köpas som reservdel.

Information om återanvändning

Produkten är avsedd för individuell användning av en patient.

Garanti

För produkten gäller de lagstadgade bestämmelserna i det land där produkten är införskaffad. Vid garantiärenden ska du i första hand vända dig till den återförsäljare som du köpte produkten av. Produkten ska rengöras innan den visas upp i garantiärenden. Om anvisningarna om hantering och skötsel av SacroLoc inte har följts kan garantin begränsas eller upphöra att gälla. Garantin upphör att gälla om:

- Produkten inte har använts enligt indikationen
- Anvisningarna från fackpersonalen inte har följts
- Du har utfört ändringar på produkten på eget initiativ

Rapporteringsskyldighet

På grund av regional lagstiftning är du skyldig att utan dröjsmål rapportera alla allvarligare tillbud vid användning av detta medicinska hjälpmedel till såväl tillverkaren som ansvarig myndighet. Du hittar våra kontaktuppgifter på baksidan av denna broschyr.

Avfallshantering

Hantera produkten i enlighet med tillämpliga nationella bestämmelser.

Fackpersonal²

Allmänna anvisningar

Kontrollera att SacroLoc sitter perfekt och individuellt anpassat efter den första behandlingen.

Ryggpelotternas position måste anpassas efter bäckenet, så att det inre urtaget vilar mot de bakre, övre höftkammarna. Öva in korrekt påtagning tillsammans med patienten. Icke fackmässiga förändringar av produkten får inte utföras. Om detta inte beaktas, kan produktens effektivitet försämras och vårt produktansvar bortfaller.

Materialsammansättning

Polyamid (PA), Termoplastisk elastomer (SEBS), Polyuretan (PUR), Elastan (EL), Polypropylen (PP), Polyester (PES), Polyoximetylen (POM), Bomull (CO), Polyeten (PE), Akrylatlim (A)

MD – Medical device (Medicinteknisk produkt)

UDI – Identifierare för datamatrix som UDI

Aktuellt datum för informationen: 2022-04

*Information om personskador (skade-, hälso- och olycksrisk) resp. sakskador (skador på produkten).
1 Ortos = ortopediskt hjälpmedel för stabilisering, avlastning, fixering, kontroll eller korrigerig av extremiteter eller bål
2Som fackpersonal betraktas var och en som enligt gällande nationella bestämmelser är behörig att justera aktivstöd och instruera om deras användning.

	no norsk
---------------	------------------------------------

Kjære kunde,

tusen takk for at du har bestemt deg for et produkt fra Bauerfeind.

Vi jobber for å forbedre den medisinske effektiviteten av våre produkter hver dag, fordi helsen din er viktig for oss. Vi ber deg om å lese og følge denne **bruksanvisningen** nøye. Hvis du har spørsmål, kontakt legen din eller spesialforretningen.

Produktets hensikt

SacroLoc er et medisinsk utstyr. Den er en ortose¹ for stabilisering av bekkenet og målrettet avlastning av iliosakralleddene.

Indikasjoner

- Sykdommer i iliosacralleddet (symptomer i iliosacralleddet, artrose i iliosacralleddet, ustabilitet i iliosacralleddet)
- Ustabilitet i bekkenringen, f.eks. symfyседiastase / -løsning
- Iliosacralledd-blokkering (akutt og profylaktisk)
- Myalgi og tendopati i bekkenregionen
- Strukturell ustabilitet etter spondylodese (i overgang L5–S1)
- Konservativ behandling etter bekkenfrakturer

Risiko ved anvendelse



Forsiktig*

Følg nøye instruksene i denne bruksanvisningen og merknadene til fagpersonale.

- SacroLoc skal kun brukes i samsvar med denne bruksanvisningen og til de angitte bruksområdene (anvendelsesområde).
- Et erstatningsansvar bortfaller ved usakkyndig bruk, eller hvis produktet ble brukt til andre formål.
- Kontakt lege for å avgjøre om ortosen¹ er egnet for bruk under svangerskap. Hvis det oppleves ubehagelig å bruke ortosen¹ under svangerskap, kan du kontrollere at størrelsen er riktig tilpasset og at den er satt riktig på, eller du kan få råd hos legen og ev. unngå videre bruk. Ingen kjente bivirkninger for mor og foster.
- Opplæringen må bare utføres av fagpersonell².
- Rådfør deg på forhånd med din lege ved en kombinasjon med andre produkter, f.eks. ved en kompresjonsterapi (medisinske støttestrømper).
- Bruk SacroLoc over t-skjorten eller undertrøyen.
- Hvis plagene tiltar eller hvis du oppdager unormale endringer i kroppen, må du straks ta kontakt med lege.
- Ikke la produktet komme i kontakt med salver, kremer, eller andre stoffer som inneholder fett eller syre.
- Bivirkninger som involverer hele kroppen, er hittil ikke rapportert. Sakkyndig bruk / tilpasning forutsettes. SacroLoc må ikke strammes for mye, da det ellers kan føre til lokale tegn på for høyt trykk. I sjeldne tilfeller kan det hemme blodkar eller nerver.

Kontraindikasjoner

Det er hittil ikke rapportert om helseskadelige overfølsomhets-reaksjoner. Ved følgende helsetilstander bør slike hjelpemidler kun tilpasses og brukes etter at du har rådført deg med lege:

- Hudlidelser / -skader på den behandlede delen av kroppen, særlig ved betennelse, samt ved arrdannelser med hevelse, rødhet og øket temperatur.
- Sensoriske forstyrrelser og bevegelsesforstyrrelser f.eks. ved diabetes (diabetes mellitus)

Bruksområde

A – Rygg-pelotte (massasjepute)

B – Høyre halvdel med lås og fingerlomme

C – Venstre halvdel med lås og fingerlomme

D – Strammebelte

Tilpasse

❶ Plasser ortosen¹ midt på hoften slik at den øvre kanten på ortosen¹ ikke er over den øvre kanten på hoftebenskammen. **❷** Skyv nå fingrene i den hertil tiltenkte fingerlasken på låsen og trekk låsen jevnt forover. **❸** Trykk nå den venstre halvdelen med låsen mot magen og legg den høyre halvdelen med låsen så langt over den venstre, at du kan feste denne på den venstre borrelåsen. Når du fester borrelåsen, trekker du først fingrene ut av den venstre og deretter ut av den høyre fingerlasken. **❹** Grip nå begge strammebeltene med begge hender og trekk disse samtidig og jevnt forover, inntil den ønskede strammingen (stabiliseringen) er oppnådd. **❺** Deretter lukkes begge strammebeltene med borrelåsen tett ved siden av hverandre på den store låsen.

Vedlikehold av produktet

Henvising: SacroLoc må aldri utsettes for direkte varme (f.eks. varmeelementer, direkte sollys, oppbevaring i bilen)! Risiko for skader på materialet. Dette kan redusere virkeevnen til SacroLoc.

Etiketten, som er sydd på SacroLoc med informasjon om produktnavn, størrelse, produsent, vaskeanvisning og CE-merking, befinner seg på strikkematerialets inside.

Ved behov kan du rengjøre SacroLoc for hånd med et mildt vaskemiddel. La ortosen¹ lufttørke.

Anvendelsesområde

Alt etter indikasjoner (bekken, iliosacralledd). Se produktets hensikt.

Vedlikeholdsanvisninger

Ved riktig håndtering og pleie er produktet praktisk talt vedlikeholdsfritt.

Sammensettings- og monteringsanvisning

SacroLoc leveres bruksklar i standardstørrelse.

Tekniske data / parameter

SacroLoc består av et strikkemateriale med fast strammebelte og avtakbare rygg-pelotter. Ryggpelottene er fast forbundet med en frottekappe. Ryggpelottene kan leveres som reservedeler.

Anvisninger for gjenbruk

Produktet er beregnet til individuell behandling av én pasient.

Garanti

Lovbestemmelsene i landet hvor produktet ble kjøpt, gjelder. Hvis du mistenker et garantitilfelle, ta først direkte kontakt med forhandleren som du kjøpte produktet av. Produktet skal rengjøres for det vises i garantitilfelle. Hvis anvisningene om håndtering og vedlikehold av SacroLoc ikke er overholdt, kan garantien bli påvirket eller utelukket.

Garantien utelukkes ved:

- Bruk som ikke er i samsvar med indikasjonene
- Manglende overholdelse av instruksjonene fra fagpersonalet
- Uautorisert endring av produktet

Meldeplikt

På grunn av regionale lovbestemmelser, er du forpliktet til å rapportere alvorlige hendelser ved bruk av dette medisinske utstyret til både produsenten og den ansvarlige myndigheten umiddelbart. Vår kontaktinformasjon finner du på baksiden av denne brosjyren.

Avhending

Produktet kan avhendes i henhold til nasjonale bestemmelser og forskrifter.

Fagpersonale²

Generell informasjon

Etter den første tilpasningen, må den optimale og individuelle pasningen av SacroLoc kontrolleres. Rygg-pelottenes posisjon må tilpasses til bekkenet slik at deres indre fordypning hviler på bakre øvre del av hoftekammen. Øv på riktig tilpasning sammen med pasienten. Det må ikke foretas noen feil endringer på produktet. Hvis bruksanvisningen ikke følges, kan produktets ytelse reduseres, og produsenten påtar seg da intet erstatningsansvar.

Materialsammensetning

Polyamid (PA), Termoplastisk elastomer (SEBS), Polyuretan (PUR), Elastan (EL), Polypropylen (PP), Polyester (PES), Polyksymetylen (POM), Bomull (CO), Polyetylen (PE), Akrylatlim (A)

MD – Medical Device (Medisinsk utstyr)

UDI – Identifikator av DataMatrix som UDI

Versjon: 2022-04

^[1] Henvisninger om fare for personskader (skader-, person- og ulykkesrisiko) evt. materielle skader (skader på produktet).

^[2] Ortose = ortopedisk hjelpemiddel for stabilisering, avlastning, avstivning, føring eller korrigering av lemmer eller kropp

^[2] Fagpersonale er enhver person som har tillatelse til å tilpasse og gi instruksjon om bruk av ortoser i henhold til de stattlige bestemmelser som gjelder for deg.

fi – suomi

Hyvå asiakkaamme,

kiitos päätöksestäsi ostaa Bauerfeind-tuote.

Teemme joka päivä työtä hoitotuotteidemme tehokkuuden parantamiseksi entisestään, sillä terveytesi on meille tärkeää. Lue ja noudata **huolellisesti** näitä käyttöohjeita. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä hoitavaan lääkäriisi tai tuotteen jälleenmyyjään.

Käyttötarkoitus

SacroLoc on terveydenhuollon tarvike. Se on lantiota stabiloiva ja SI-niveliin kohdistuvaa kuormitusta vähentävä ortoosi¹.

Käyttöaiheet

- SI-nivelen sairaudet (SI-nivelen syndrooma, SI-nivelen nivelrikko, SI-nivelen instabilitteetti)
- Lantion instabilitteetti, esim. symfyysin diastaasi ja löystyminen
- SI-nivelen toimintahäiriö (akuutti ja ennaltaehkäisevä)
- Myalgia ja tendinopatia lantion alueella
- Rakenteellinen instabilitteetti L5- ja S1-nikamien välissä spondylodeesin jälkeen
- Lantionmurtuman jälkeinen konservatiivinen hoito

Haittavaikutukset

Huomio*

Noudata tarkasti käyttöohjeen määräyksiä ja ammattihenkilöstön antamia ohjeita.

- SacroLoc-ortoosia saa käyttää vain näissä käyttöohjeissa esitellyllä tavalla ja käyttöohjeissa mainittuihin käyttötarkoituksiin (käyttöalue).
- Jos tuotetta ei käytetä sen käyttötarkoituksen mukaisesti, tuotevastuu raukeaa.
- Lääkärin on määritettävä yksilöllisesti, onko ortoosin¹ käyttö raskauden aikana sopivaa ja asianmukaista. Jos ortoosin¹ käyttö raskauden aikana tuntuu epämiellyttävältä, on tarkistettava kokoasetukset ja pukemistekniikka. Lisäksi on keskusteltava lääkärin kanssa ja lopetettava tuen käyttö tarvittaessa. Äitiin ja sikiöön kohdistuvia haittavaikutuksia ei tunneta.
- Vain ammattihenkilöstö² saa opastaa tuen käytössä.
- Keskustele hoitavan lääkärisi kanssa, jos aiot käyttää tuotetta yhdessä muiden lääkinnällisten hoitotuotteiden (esimerkiksi lääkinnällisten hoitosukkien) kanssa.
- SacroLoc on tarkoitettu käytettäväksi t-paidan tai aluspaidan päällä.
- Jos vaivasi pahenevat tai huomaat kehossasi poikkeavia muutoksia, ota välittömästi yhteyttä hoitavaan lääkäriisi.
- Tuote ei saa joutua kosketuksiin voiteiden ja kosteusesulsioiden eikä rasvoja tai happeja sisältävien aineiden kanssa.
- Koko elimistöön kohdistuvia haittavaikutuksia ei ole tähän mennessä raportoitu. Käytön edellytyksenä on asianmukainen käyttö ja tuotteen sovitus. Älä käytä SacroLoc-ortoosia liian kireällä; tämä saattaa aiheuttaa paikallisia painaumia. Harvinaisissa tapauksissa ortoosi saattaa painaa verisuonia ja hermoja.

Käyttörajoitukset

Herkistymisestä (allergia) aiheutuvia terveydellisiä haittavaikutuksia ei ole tähän mennessä raportoitu. Seuraavissa tilanteissa tukia pitäisi sovitaa ja käyttää vain lääkärin harkinnan mukaisesti:

- Ihosairaudet / vammat hoidettavalla alueella, varsinkin jos kyseinen alue on tulehtunut, tai jos kyseisellä alueella on koholla olevia arpia, jotka ovat turvonneet, punoittavat tai kuumottavat.
- Tuntohäiriöt ja liikkeiden rajoittuminen, esimerkiksi diabetesta sairastavilla

Käyttökohde

A – Selkäpelotti (hierontapehmuste)

B – Oikeanpuoleinen kiinnityspuolisko, jossa sormitasku

C – Vasemmanpuoleinen kiinnityspuolisko, jossa sormitasku
D – Säädettävät vyöt

Pukeminen

1 Aseta ortoosi¹ lantion keskiosaan niin, ettei ortoosin¹ oikea reuna ylitä suoliluun harjua eikä ulotu vyötärölle saakka.
2 Työnnä sen jälkeen sormet ylhäältä käsin kiinnityskohdassa olevaan sormitaskuun ja vedä kiinnitysosaa tasaisesti eteenpäin.
3 Paina nyt vasenta kiinnityspuoliskoa vatsaa vasten ja aseta oikea kiinnityspuolisko niin pitkälle vasemman yli, kunnes pystyt kiinnittämään sen tarralla vasempaan puoliskoon. Tarrakiinnitystä varten vedä sormet ensin pois vasemmasta ja sen jälkeen oikeasta sormitaskusta.
4 Ota nyt molemmat säädettävät vyöt käsiisi ja vedä niitä tasaisesti eteenpäin, kunnes haluttu voimakkuus (tuki) on saatu aikaan.
5 Kiinnitä sen jälkeen tarroilla molemmat säädettävät vyöt tiukasti vierekkinä suureen kiinnitysosaan.

Tuotteen hoito

Ohje: Älä altista SacroLoc-ortoosia suoralle kuumuudelle (esim. lämmityspatterit, auringonvalo, säilytys kuumassa autossa)! Se voi vaurioittaa materiaalia. Materiaalin vaurioituminen puolestaan heikentää SacroLoc-ortoosin toimivuutta.

SacroLoc-ortoosin neuloksen sisäpuolelle on ommeltu tuote-etiketti, johon on merkitty tuotenimi, koko, valmistaja, pesuohje ja CE-merkintä.

SacroLoc-ortoosi voidaan tarvittaessa puhdistaa miedolla pesuaineella käsin pesemällä. Anna ortoosin¹ kuivua ilmassa paikassa.

Käyttöalue

Oireiden mukaisesti (lantio, SI-nivelet). Katso kohta »Käyttötarkoitus».

Huolto-ohjeet

Jos tuotetta käsitellään ja hoidetaan asianmukaisesti, sitä ei tarvitse huoltaa.

Kokoamis- ja asennusohjeet

SacroLoc-ortoosi toimitetaan vakiokokona käyttövalmiina.

Tekniset tiedot ja parametrit

SacroLoc koostuu kiinteillä kiristyshihnoilla ja irrotettavilla selkäpeloteilla varustetusta neuloksesta. Selkäpelotit on liitetty kiinteästi toisiinsa froteesuojuksella. Selkäpelotit on saatavana vaarosina.

Tuotteen uudelleenkäyttö

Tuote on tarkoitettu vain yhdelle potilaalle.

Tuotetakuu

Tuotteeseen sovelletaan sen ostomaan lainsäädäntöä. Mahdollisessa takuutapauksessa ota ensin yhteyttä tuotteen myyjään. Tuote on puhdistettava ennen takuuvaatimuksen esittämistä. Jos SacroLocin hoito- ja käsittelyohjeita ei ole noudatettu, takuuta voidaan rajoittaa tai se voi raueta kokonaan. Takuu ei ole voimassa, jos:

- Tuotetta on käytetty käyttöaiheiden vastaisesti
- Ammattihenkilöstö antamia ohjeita ei ole noudatettu
- Tuotteeseen on tehty omavaltaisia muutoksia

Ilmoitusvelvollisuus

Alueellisen lainsäädännön nojalla kaikista tämän terveydenhuollon tarvikkeen käyttöön liittyvistä vakavista haittapahtumista on ilmoitettava sekä valmistajalle että toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Valmistajan yhteystiedot ovat tämän esitteen takakannessa.

Hävittäminen

Tuote voidaan hävittää asianmukaisten maakohtaisten määräysten mukaisesti.

Ammattihenkilöstö²

Yleisiä ohjeita

Tarkista ensimmäisen hoitokerran jälkeen, että SacroLoc-ortoosi istuu kunnolla ja oikein.

Selkäpehmusteet on sijoitettava lantioon nähdén siten, että niiden sisemmät uurteet vastaavat suoliluiden ylätakakärkiin. Harjoittele ortoosin paikalleen asettamista potilaan kanssa. Tuotteeseen ei saa tehdä asiattomia muutoksia. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi heikentää tuotteen toimivuutta, jolloin sen tuotevastuu raukeaa.

Materiaalikoostumus

Polyamidi (PA), Termoplastinen elastomeeri (SEBS), Polyuretaani (PUR), Elastaani (EL), Polypropeeni (PP), Polyesteri (PES), Polyasetali (POM), Puuvilla (CO), Polyeteeni (PE), Akrylaattiliima (A)

MD – Medical Device (Lääkinnällinen laite)

UDI – Datamatriisin tunnistite UDI:na

Versio: 2022-04

^[*] Ohje henkilövahinkojen (loukkaantumis-, terveys- ja onnettomuusvaara) ja mahdollisten esinevahinkojen (tuotteen vaurioituminen) varalta.

^[1] Ortoosi = ortopedinen apuväline, joka vakauttaa, tukee tai immobilisoi raajoja tai vartaloa sekä ohjaa tai korjaa niiden liikkeitä ja asentoa

^[2] Ammattihenkilöstöön lukeutuvat henkilöt, jotka voimassa olevien maakohtaisten määräysten mukaisesti ovat valtuutettuja suorittamaan ortoosien sovituksen ja käyttöopastuksen.

da – dansk

Kære kunde

Tak, fordi du har valgt et Bauerfeind-produkt.

Vi arbejder hver dag på at forbedre den medicinske effekt af vores produkter, fordi dit helbred ligger os på hjertet. Læs og følg nærværende **brugsanvisning** nøje. Hvis du skulle have spørgsmål, så kontakt din egen læge eller din forhandler.

Anvendelsesområde

SacroLoc er medicinsk udstyr. Det er en ortose¹ til stabilisering af bækkenet og målrettet aflastning af iliosacralleddene

Indikationer

- Sygdomme i iliosacralleddet (iliosacralled-syndrom, iliosacralled-artrose, iliosacralled-ustabilitet)
- Bækkenringsustabilitet, f.eks. symfyseprængning og -løsning
- Sacroliacledsbløkering (akut og forebyggende)
- Myalgier og fibromyalgier i bækkenregionen
- Strukturanomali efter spondylodeser (i overgangen L5 – S1)
- Konservativ behandling efter bækkenfrakturer

Bivirkninger

Forsigtig*

Vær opmærksom på angivelserne i denne brugsanvisning og det faguddannede fagpersonalets oplysninger.

- SacroLoc bør kun anvendes i henhold til oplysningerne i denne brugsanvisning og kun til de angivne anvendelsesområder (anvendelsessted).
- Producenten hæfter ikke ved ukorrekt eller ikke tilsigtet anvendelse.
- Egnetheden og anvendelsen af ortose¹ under graviditeten skal afklares i hvert enkelt tilfælde af lægen. Føles anvendelsen af ortose¹ i løbet af graviditeten ubehageligt, skal størrelsesindstilling og påsætningsteknik kontrolleres, lægen konsulteres og eventuelt ses bort fra yderligere anvendelse. Bivirkninger for mor og foster kendes ikke.
- Instruktion må kun foretages af faguddannet personale².
- En evt. kombination med andre produkter, f.eks. kompressionsbehandling (kompressionsstrømper) skal først aftales med den behandelende læge.
- SacroLoc bæres over T-shirt eller undertrøje.
- Hvis smerterne tiltager, eller du konstaterer usædvanlige forandringer på din krop, så kontakt omgående din egen læge.
- Sørg for, at produktet ikke kommer i berøring med fedt- og syreholdige midler, salver eller lotioner.

• Der er ingen kendte bivirkninger, som vedrører hele organismen.
Faglig korrekt brug / påtagning forudsættes. Stram SacroLoc ikke for meget, da der ellers kan der opstå lokale tryksteder. I sjældne tilfælde kan det medføre indsnævring af blodkar og nerver.

Kontraindikationer

Overfølsomheder med sygdomskarakter er hidtil ikke konstateret. Ved nedenstående sygdomsbilleder er påtagning og brug af et sådant hjælpemiddel kun tilrådelig i samråd med lægen:
• hudsygdomme / -læsioner i det berørte område af kroppen, især ved betændelsestilstande, opsvulmede ar med hævelse, røde og hypertermi.
• følsomheds- og bevægelsesforstyrrelser, f.eks. ved sukkersyge (diabetes mellitus)

Anvendelsesområde

A – rygpelot (massagepude)
B – højre side af lukningen med fingerlomme
C – venstre side af lukningen med fingerlomme
D – stroppe

Påtagning

❶ Anbring ortose¹ midt på bækkenet, således at den øverste kant af ortose¹ ikke er højere end bækkenkammens øverste kant og går ind over taljen.
❷ Skub nu fingrene ind i fingerlasken på lukningen og træk lukningen jævnt fremefter.
❸ Pres nu venstre side ind mod maven og læg højre side så langt hen over venstre side, at du kan sætte den på venstre velcrolukning. Træk først fingrene ud af venstre, så af højre fingerlaske, når du lukker velcrolukningen.
❹ Tag nu fat i en strop med hver hånd og træk dem fremad samtidigt og med lige meget styrke, indtil den ønskede kraftpåvirkning (stabilisering) er nået.
❺ Læg så begge stropper tæt ved siden af hinanden på den store velcrolukning.

Vedligeholdelse

Bemærk: Udsæt SacroLoc aldrig for direkte varme (f.eks. fra radiator, solen, opbevaring i bil)! Materialet kan blive beskadiget. Dette kan påvirke funktionen af SacroLoc.
Tøjmærket med informationer om SacroLoc såsom produktnavn, størrelse, fabrikant, vaskeinstruktion og CE-mærke sidder inde på strikmaterialet.

Ved behov kan SacroLoc håndvaskes med et mildt vaskemiddel. Lad ortose¹ lufttørre.

Anvendelsessted

Iht. indikationerne (bækkenet, iliosacralled).
Se anvendelsesområde.

Vedligeholdelsesoplysninger

Ved korrekt håndtering og pleje er produktet vedligeholdelsesfrit.

Samle- og monteringsvejledning

SacroLoc leveres i standard størrelse, brugsklar.

Tekniske data / parametre

SacroLoc består af strikmateriale med faste stropper og aftagelige rygpelotter. Rygpelotterne er fast forbundet med et frotteebetræk. Rygpelotterne kan leveres som reservedel.

Oplysninger vedrørende brugen

Produktet er beregnet til individuel behandling af én patient.

Garanti

Lovbestemmelserne i det land, hvor produktet blev købt, er gældende. Henvend dig i garantitilfælde først direkte til den forhandler, hvor du har købt produktet. Produktet skal renses, inden det indsendes i garantitilfælde. Hvis oplysningerne vedrørende håndtering og pleje af SacroLoc ikke blev overholdt, kan garantien være begrænset eller bortfalde helt.
Garantien er udelukket ved:
• Ved tilsidesættelse af indikationen
• Hvis det faguddannede personales instruktioner ikke følges
• Egenrådige ændringer på produktet

Indberetningspligt

På grund af regional lovgivning er du forpligtet til straks at indberette enhver alvorlig hændelse i forbindelse med brugen af

dette medicinske udstyr både til producenten og til den kompetente myndighed. Vores kontaktdata fremgår af denne brochures bagside.

Bortskaffelse

Produktet bortskaffes i henhold til gældende regler.

Faguddannet personale²

Generelle oplysninger

Kontroller efter første påtagning, at SacroLoc sidder optimalt og korrekt.
Rygpelottens position skal tilpasses bækkenet således, at deres indvendige udsparinger ligger på de bageste øvre tarmbensvinger.
Øv korrekt påtagning sammen med patienten.
Der må ikke foretages usagkyndige ændringer på produktet.
Overholdes denne anvisning ikke, kan det påvirke produktets ydelse og produktansvaret bortfalder.

Materialesammensætning

Polyamid (PA), Termoplastisk elastomer (SEBS), Polyuretan (PUR), Elastan (EL), Polypropylen (PP), Polyester (PES), Polyoxymetylen (POM), Bomuld (CO), Polyætylen (PE), Akrylatklæbemiddel (A)

 – Medical Device (Medicinsk udstyr)

 – Mærkning af DataMatrix som UDI

Informationens udgivelsesdato: 2022-04

* Oplysning om risiko for personskader (risiko for kvæstelser, sundhedsskader og ulykker) evt. materielle skader (skader på produktet).

¹ Ortose = ortopædisk udstyr, der bruges til at stabilisere, lindre, immobilisere, styre eller korrigere lemmer eller torso

² En faguddannet er en person, som iht. gældende lovgivning er bemyndiget til at tilpasse og instruere i brugen af ortoser.

 polski

Szanowni Klienci,

dziękujemy za zaufanie okazane produktom Bauerfeind.

Każdego dnia pracujemy nad poprawą skuteczności medycznej naszych produktów, ponieważ Państwa zdrowie jest dla nas bardzo ważne. Należy dokładnie przeczytać niniejszą **instrukcję użytkowania** i stosować się do zawartych w niej wytycznych. Wszelkie pytania należy kierować do lekarza prowadzącego lub sklepu specjalistycznego, w którym nabyli Państwo wyrób.

Przeznaczenie

SacroLoc to wyrób medyczny. Jest to orteza¹ do stabilizacji miednicy i ukierunkowanego odciążania stawu krzyżowo-biodrowego.

Wskazania

- Schorzenia stawu krzyżowo-biodrowego (zespół stawu krzyżowo-biodrowego, artroza, niestabilność)
- Niestabilność obręczy miednicowej, np. rozejście i poluzowanie spojenia
- Zablokowanie stawu krzyżowo-biodrowego (w stanach ostrych i zapobiegawczo)
- Bóle mięśni i tendopatie w obszarze miednicy
- Zaburzenia strukturalne po przebytych spondylodenezach (w seg-mencie L5–S1)
- Leczenie zachowawcze po złamaniach miednicy

Zagrożenia wynikające z zastosowania

 **Uwaga***

Należy ściśle stosować się do instrukcji użytkowania i wskazów-wek fachowców.

- Ortezę SacroLoc należy stosować wyłącznie zgodnie z informacjami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji i wskazaniami dotyczącymi jej użytkowania (miejsca zastosowania).
- W przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania producent nie ponosi odpowiedzialności.

- Przydatność i stosowanie ortezy¹ u kobiet w ciąży trzeba zawsze omówić z lekarzem. Jeżeli noszenie ortezy¹ w czasie ciąży powo-duje nieprzyjemne odczucia, trzeba sprawdzić ustawienia rozmi-aru i technikę zakładania, skonsultować się z lekarzem i w razie konieczności zrezygnować z dalszego stosowania. Nie są znane działania niepożądane w odniesieniu do matki i płodu.
- Poinstruowanie w zakresie zastosowania może przeprowadzić wyłącznie przeszkolony specjalista².
- Jednoczesne stosowanie innych produktów, np. w ramach kompresoterapii (produkty uciskowe), należy uprzednio skonsultować z lekarzem prowadzącym.
- Ortezę SacroLoc należy zakładać na T-shirt lub podkoszulek.
- W przypadku nasilenia się objawów lub zauważenia niepokojących zmian w ciele należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Produkt należy chronić przed bezpośrednim kontaktem ze środkami zawierającymi tłuszcze lub kwasy, z maściami i balsamami.
- Dotychczas nie stwierdzono występowania działań ubocznych dotyczących całego organizmu. Warunkiem wystąpienia zamierzonego działania jest poprawne stosowanie / zakładanie ortezy. Nie należy zbyt mocno mocować ortezy SacroLoc, ponieważ może to być przyczyną wystąpienia miejscowych ucisków. W rzadkich przypadkach możliwe jest wystąpienie zwężenia naczyń krwionośnych i uciśnięcia nerwów.

Przeciwwskazania

- Do tej pory nie odnotowano występowania nadwrażliwości o charakterze chorobowym. W przypadku wymienionych poniżej chorób zakładanie i noszenie tego typu produktów należy bezwzględnie konsultować z lekarzem:
- Choroby skóry, rany występujące w obrębie powierzchni ciała, którą przykrywa orteza, w szczególności w stanach zapalnych; występowanie nabrzmiałych, zaczerwienionych i przegrzanych blizn
 - Zaburzenia czucia i ruchów dowolnych, np. w przypadku cukrzycy (diabetes mellitus)

Użytkowanie

- A – tylna wkładka uciskowa (wkładka masująca)
B – prawy pas zapinający z kieszonką na palce
C – lewy pas zapinający z kieszonką na palce
D – pasy naciągające

Zakładanie

❶ Środek ortezy¹ należy przyłożyć pośrodku w części miednicy, w taki sposób, aby górna kraweść ortezy¹ nie znajdowała się wyżej niż na wysokości kolca biodrowego lub też sięgała maksymalnie do wysokości talii.
❷ Następnie należy wsunąć od góry palce w specjalne kieszonki znajdujące się na pasach zapinających i pociągnąć je równomiernie do przodu.
❸ Teraz należy przyłożyć lewy pas zapinający do brzucha, a prawy pas tak naciągnąć na lewy, aby osiągnąć umieszczzonego tam zapięcia na rzep. Zapinając rzep, należy najpierw wyjąć palce z lewej kieszonki, a następnie z kieszonki prawej.
❹ Następnie należy chwycić w obie ręce pasy naciągające i pociągnąć je równocześnie i równomiernie do przodu do momentu uzyskania odpowiedniej siły nacisku (stabilizacji).
❺ Na koniec należy przymocować rzepy pasów naciągających na zapięciu pasa zapinającego.

Czyszczenie

Wskazówka: Ortezy SacroLoc nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego źródła ciepła (np. ogrzewania, promieni słonecznych, nie należy jej pozostawiać w nagrzanym samochodzie)! Może to spowodować uszkodzenie materiału, co może być przyczyną zmniejszenia skuteczności SacroLoc.

Wszysyka SacroLoc z informacjami na temat nazwy produktu, rozmiaru, producenta, wskazówkami dotyczącymi prania i oznakowaniem CE naszyta jest w wewnętrznej części ortezy.

W razie potrzeby SacroLoc można prać ręcznie z dodatkiem łagodnego środka do prania. Następnie pozostawić ortezę¹ do wyschnięcia.

Miejsce zastosowania

Zgodnie ze wskazaniami (miednica, stawy krzyżowo-biodrowe).
Patrz: Przeznaczenie.

Wskazówki dotyczące konserwacji

Produkt praktycznie nie wymaga konserwacji pod warunkiem należytego stosowania i pielęgnacji.

Instrukcja mocowania i dostosowania pasków

Orteza SacroLoc jest dostarczana w standardowym rozmiarze, w stanie gotowym do użytku.

Dane techniczne / parametry

Orteza SacroLoc jest wykonana z dzianiny z zamocowanymi na stałe pasami naciągającymi i odpinanymi tylnymi wkładkami uciskowymi. Tylny wkładki uciskowe zaszyte są we frotowej ostonce. Tylnie wkładki uciskowe dostępne są jako elementy zamienne.

Wskazówki na temat ponownego zastosowania

Produkt przeznaczony jest do indywidualnego zaopatrzenia jednego pacjenta.

Gwarancja

Obowiązują przepisy prawa kraju, w którym zakupiono wyrób. W razie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi należy się najpierw zwrócić bezpośrednio do sprzedawcy, u którego zakupiono wyrób. Przed oddaniem do reklamacji produkt należy oczyścić. Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących użytkowania i czyszczenia SacroLoc może ograniczyć zakres roszczeń z tytułu rękojmi lub jej wyłączenie.
Wyłączenie rękojmi następuje w przypadku:
• Użytkowania niezgodnego ze wskazaniami
• Nieprzestrzegania instrukcji specjalisty
• Samowolnych modyfikacji produktu

Obowiązek zgłaszania

Na podstawie regionalnych przepisów prawa użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania wszelkich poważnych incydentów związanych z użyciem tego wyrobu medycznego – zarówno producentowi, jak i właściwemu organowi. Nasze dane kontaktowe można znaleźć na odwrocie broszury.

Utylizacja

Produkt można utylizować zgodnie z krajowymi regulacjami ustawowymi.

Specjaliści²

Wskazówki ogólne

Po pierwszym założeniu należy sprawdzić optymalne dla konkretnego pacjenta ułożenie SacroLoc.
Tylny wkładki uciskowe muszą być umieszczone w sposób dopasowany do miednicy, tak aby leżały wewnętrznym wgłębieniem zwróconym do tylnych górnych kołców biodrowych.
Przećwiczyć z pacjentem prawidłowy sposób zakładania ortezy.
Nie wolno dokonywać niezgodnych z przeznaczeniem zmian w produkcie. Nieprzestrzeganie powyższych wskazań może obniżyć skuteczność działania produktu i prowadzić do wyłączenia odpowiedzialności.

Skład materiałowy

Poliamid (PA), Elastomer termoplastyczny (SEBS), Poliuretan (PUR), Elastan (EL), Polipropylen (PP), Poliester (PE), Polioksymetylen (POM), Bawełna (CO), Polietylen (PE), Klej akrylowy (A)

 – Medical Device (Urządzenie medyczne)

 – Unikalny identyfikator urządzenia – kod DataMatrix, UDI

Ostatnia aktualizacja informacji: 2022-04

* Wskazówka dotycząca możliwych szkód osobowych (zagrożenie zdrowia, ryzyko urazu lub wypadku) albo rzeczowych (uszkodzenie produktu).

¹ Orteza = ortopedyczny środek pomocniczy, satbilizujący, odciążający, unieruchamiający, prowadzący oraz korygujący części ciała lub tkłowa.

² Specjalista to każda osoba, która zgodnie z obowiązującymi regulacjami krajowymi jest uprawniona do dopasowywania ortez i instruowania w zakresie ich użytkowania.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

mnohokrát vám ďekujeme, že jste se rozhodl(a) pro produkt Bauerfeind.

Denně pracujeme na zlepšování lékařské účinnosti našich produktů, protože nám záleží na vašem zdraví. Pozorně si přečtête a dodržujte tento **návod k použití**. V případě otázek se obraťte na svého lékaře nebo na specializovaný obchod.

Stanovený účel

SacroLoc je lékařský výrobek. Je to ortéza¹ ke stabilizaci pánve a cílené úlevě ileosakrálních kloubů.

Indikace

- Onemocnění ileosakrálního kloubu (syndrom ileosakrálního kloubu, artróza ileosakrálního kloubu, nestabilita ileosakrálního kloubu)
- Nestabilita pánevního kruhu, např. roztrhnutí a uvolnění symfýzy
- Blokování ileosakrálního kloubu (akutní a profylaktické)
- Myalgie a tendopatie v oblasti pánve
- Strukturální nestabilita po spondylodéze (v přechodu L5–S1)
- Konzervativní léčba po frakturách pánve

Rizika použití

Pozor*

Pečlivě dodržujte údaje uvedené v tomto návodu k použití a pokyny odborného personálu.

- SacroLoc je třeba nosit pouze podle údajů tohoto návodu k použití a podle uváděných oblastí použití (místo nasazení).
- Při nesprávném používání nebo v případě použití k jinému účelu se záruka na výrobek neposkytuje.
- O vhodnosti a používání ortézy¹ v době těhotenství je třeba se poradit s lékařem, který rozhodne v jednotlivých případech. Pokud je nošení ortézy¹ v průběhu těhotenství pocítováno jako nepříjemné, je třeba zkontrolovat nastavení velikosti a techniku přikládání ortézy, poradit se s lékařem a případně upustit od dalšího používání. Vedlejší účinky pro matku a plod nejsou známe.
- Provádět instruktaž smí pouze odborný personál².
- Jestliže chcete zároveň používat i jiné výrobky, např. v rámci kompresní terapie (kompresivní punčochy), domluvte se předem s Vaším ošetřujícím lékařem.
- Ortézu SacroLoc noste přes tričko nebo tlíko.
- Jestliže dojde ke zhoršení obtíží nebo pokud se na těle projevíly neobvyklé změny, navštivte okamžitě svého lékaře.
- Zabraňte styku výrobku s prostředky, které obsahují tuky, kyseliny, masti a tělová mléka.
- Vedlejší účinky, které by ovlivnily celý organismus, nejsou doposud známe. Předpokladem je správné používání / přikládání. Ortézu SacroLoc nepřikládejte moc napevno, může to vyvolat lokální příznaky způsobené tlakem. Zřídka může dojít k zúžení cév a nervů.

Kontraindikace

Nadměrná citlivost při onemocněních není zatím známa. Při dále uvedených příznacích onemocnění je přiložení a nošení takové pomůcky indikováno pouze po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem.

- Onemocnění a zranění kůže v dotčené části těla, zvláště při zánětlivých úkazech, stejně jako vystupující jizvy s otoky, zčervenání a přehřátí
- Poruchy citlivosti a poruchy pohybu např. při cukrovce (Diabetes mellitus)

Oblast použití

A – ortopedická stélka na zádech (masážní polštářek)

B – pravá polovina uzávěru s kapsou pro prsty

C – levá polovina uzávěru s kapsou pro prsty

D – pásy na utahování

Příkladání

❶ Umístíte ortézu¹ uprostřed na pávni tak, aby horní lemovaný okraj ortézy¹ nepřesahoval horní okraj hřebene pánevní kosti, popř. do pasu. **❷** Nyní zasuňte prsty shora do kapes na prsty na uzávěru a rovnoměrně tahejte uzávěr směrem dopředu. **❸** Nyní zatlačte levou polovinu uzávěru směrem na břicho a přeložte pravou polovinu uzávěru tak daleko přes levou, abyste jí mohli na levou polovinu

připnout. Při zapínání vytáhnete prsty nejdříve z levé a potom z pravé kapsy na prsty. **❹** Vezměte pásy na utahování do obou rukou a rovnoměrně je táhněte směrem dopředu, dokud nedocílíte požadovaného účinku síly (stabilizaci). **❺** Nakonec zapněte oba pásy na utahování těsně vedle sebe na velký uzávěr.

Pokyny k údržbě výrobku

Upozornění: Nikdy nevystavujte ortézu SacroLoc přímému teplu (např. topení, sluneční záření, skladování v autě)! Může dojít k poškozením materiálu. To může negativně ovlivnit účinnost ortézy SacroLoc.

Nášivku SacroLoc s informacemi o názvu výrobku, velikosti, výroci, návodu k čištění a CE označením naleznete na vnitřní straně pleteniny.

Ortézu SacroLoc lze v případě potřeby vyčistit jemným pracím prostředkem na ruční práni. Ortézu¹ nechejte uschnout na vzduchu.

Místo nasazení

Podle indikací (pánev, ileosakrální kloub).

Viz stanovení účelu.

Upozornění týkající se údržby

Při správném zacházení a péči nevyžaduje výrobek žádnou údržbu.

Návod k sestavení a montáži

Ortéza SacroLoc se dodává ve standardní velikosti, připravená k použití.

Technické údaje / parametry

SacroLoc se skládá se z pleteniny s pevnými pásy na utahování a odnímatelnými ortopedickými stélkami na zádech. Ortopedické stélky na zádech jsou neoddělitelné spojení s froté potahem. Ortopedické stélky lze zakoupit jako náhradní díl.

Upozornění týkající se opakovaného používání

Výrobek je určen k individuálnímu ošetření jednoho pacienta nebo pacientky.

Záruka

- Platí zákonná ustanovení země, ve které byl produkt zakoupen. Jestliže předpokládáte, že nastal případ uplatnění záruky, obraťte se nejdříve na osobu, od které jste produkt zakoupili. Před ohlášením nároku ze záruky výrobek vyčistíte. Při nerespektování pokynů k nakládání s výrobkem SacroLoc a k péči o něj může být záruka omezena nebo vyloučena.
- Plnění ze záruky je vyloučeno v následujících případech:
 - Použití neodpovídající indikaci
 - Nerespektování pokynů odborného personálu
 - Svévolné pozměňování výrobku

Ohlašovací povinnost

Na základě regionálních zákonných předpisů jste povinni neprodleně ohlásit každou závažnou událost při použití tohoto lékařského výrobku jak výrobcí, tak i příslušnému úřadu. Naše kontaktní údaje najdete na zadní straně této brožury.

Likvidace výrobku

Výrobek lze likvidovat dle národních úředních předpisů.

Odborný personál²

Všeobecná upozornění

Po prvním použití ortézy SacroLoc zkontrolujte optimální a individuální polohu.

Polohu ortopedických stélek na zádech je třeba upravit podle pánve tak, aby svým vybráním dosedaly na zadní horní kyčelní trny. Spolu s pacientem nacvičte správné přikládání. Nesmí být prováděny neodborné úpravy výrobku. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k ovlivnění účinku výrobku do té míry, že přestane platit záruka na výrobek.

Složení materiálu

Polyamid (PA), Termoplastický elastomer (SEBS), Polyuretan (PUR), Elastan (EL), Polypropylen (PP), Polyester (PES), Polyoxymethylen (POM), Bavlna (CO), Polyetylén (PE), Akrylátové lepidlo (A)

MD – Medical Device (Zdravotnický prostředek)

UDI – Identifikátor maticového 2D kódu jako UDI

Stav informací: 2022-04

* Upozornění na nebezpečí poranění osob (riziko poranění a nehody, zdravotní riziko), popř. věcná škoda (škody na výrobku).

¹ Ortéza = ortopedická pomůcka používaná ke stabilizaci, odlehčení, znehybnění, ovládnání nebo náprave končetin či trupu.

²Odborný personál je každá osoba, která je oprávněna dle platných státních nařízení provádět přizpůsobení a instruktaž o používání ortéz.

sk slovensky

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

ďakujeme pekne, že ste sa rozhodli pre výrobok firmy Bauerfeind.

Pracujeme každý deň na zlepšení medicínskej účinnosti našich výrobkov, lebo Vaše zdravie nám leží na srdci. Prečítajte si starostlivo tento **návod na použitie** a dodržiavajte ho. Pri otázkach sa obraťte na svojho lekára alebo odbornú predajňu.

Stanovenie účelu

SacroLoc je medicínsky výrobok. Je to ortéza¹ na stabilizáciu panvy a cieleňé uvoľnenie iliosakrálnych kĺbov.

Indikácie

- Ochorenia iliosakrálnych kĺbov (syndróm ISK, artróza ISK, nestabilita ISK)
- Nestabilita panvy, napr. vyskočenie a uvoľnenie symfýzy
- Zablokovanie iliosakrálnych kĺbov (akútne a profylaktické)
- Myalgie a tendopatie oblasti panvy
- Porucha štruktúry v spondylodéze (v prechode L5–S1)
- Konzervatívna liečba po fraktúrach panvy

Riziká použitia

Pozor*

Rešpektujte čo najpresnejšie zadania uvedené v tomto návode a pokyny kvalifikovaného personálu.

- Ortéza SacroLoc sa smie používať iba v súlade s údajmi stanovenými v tomto návode na použitie a v uvedených oblastiach použitia (miesto použitia).
- Pri nesprávnom použití alebo použití na iný účel nebude platiť záruka na výrobok.
- Vhodnosť a používanie ortézy¹ počas doby tehotenstva musí v individuálnych prípadoch schváliť lekár. Ak pocítujete nosenie ortézy¹ počas tehotenstva ako neprijemné, musíte skontrolovať nastavenie veľkosti a techniku prikladania, konzultovať s lekárom a v prípade potreby upustiť od ďalšieho používania. Vedľajšie účinky pre matku a plod nie sú známe.
- Inštruktaž môže vykonať len vyškolený odborník².
- O kombinácii s inými výrobkami, napr. v rámci kompresnej terapie (kompresívne pančuchy), sa najskôr poraďte so svojim ošetrojúcim lekárom.
- Ortézu SacroLoc noste na tričku alebo tielku.
- Ak by ste na sebe pocítili zvýšené problémy alebo neobvyklé zmeny, vyhľadajte prosím ihneď svojho lekára.
- Zabraňte styku výrobku s prostriedkami obsahujúcimi tuky, kyseliny, masti a telové mlieka.
- Vedľajšie účinky, ktoré by ovplyvňovali celý organizmus, nie sú doteraz známe. Predpokladom je správne používanie / aplikácia. Ortézu SacroLoc nezakladajte príliš napevno, pretože to môže vyvolať lokálne príznaky spôsobené tlakom. V zriedkavých prípadoch môže dôjsť k zúženiu krvných ciev a nervov.

Kontraindikácie

- Nadmerná citlivosť pri chorobách nie je doteraz známa. Pri nasledujúcich príznakoch chorôb je aplikácia a nosenie takejto pomôcky indikované len po porade s Vaším ošetrojúcim lekárom.
- Ochorenia a zranenia pokožky v dotknutej časti tela, obzvlášť v zápalových prejavoch, takisto vystupujúcich jazvách s opuchmi, sčervenaním a prehriatím.
- Poruchy citlivosti a motorické poruchy, napr. pri cukrovke (diabetes mellitus)

Oblasť použitia

A – ortopedický vankúšik na chrbát (masážny vankúšik)

B – pravá polovica uzáveru s vreckami na prsty

C – ľavá polovica uzáveru s vreckami na prsty

D – pásy na uťahovanie

Zakladanie

❶ Umiestnite ortézu¹ do stredu panvy tak, aby horný okraj ortézy¹ neprečnieval cez horný okraj hrebeňa panvovej kosti. **❷** Teraz zasuňte prsty zhora do vreciek na prsty na uzávere a rovnomerne ťahajte uzávěr smerom dopredu. **❸** Zatlačte ľavú polovicu uzáveru smerom na brucho a preložte pravú polovicu uzáveru tak ďaleko cez ľavú, aby ste ju mohli na ľavú polovicu pripnúť. Pri zapínaní vytiahnite prsty najprv z ľavého a potom z pravého vrecka na prsty. **❹** Vezmite pásy na uťahovanie do oboch rúk a rovnomerne ich ťahajte smerom dopredu, až kým nedosiahnete želaný účinok síly (stabilizáciu). **❺** Nakoniec zapnite oba pásy na uťahovanie tesne vedľa seba na veľký uzávěr.

Pokyny k starostlivosti o výrobok

Upozornenie: Ortézu SacroLoc nikdy nevystavujte priamemu teplu (napr. kúrenie, slnečné lúče, uskladnenie v aute)! Môže dôjsť k poškodeniu materiálu. To môže nepriaznivo ovplyvniť účinok ortézy SacroLoc.

Nášivka SacroLoc s informáciami o názve výrobku, veľkosti, výrobcovi, spôsobe prania a značkou CE sa nachádza na vnútornej strane úpletu.

Podľa potreby môžete čistiť SacroLoc jemným umývacím prostriedkom pránim v rukách. Nechajte vyschnúť ortézu¹ na vzduchu.

Miesto nasadenia

Podľa indikácií (panva, ileosakrálne kĺby).

Pozri Spôsob účinku.

Upozornenia, týkajúce sa ošetrovania výrobku

Pri správnom zaobchádzaní a starostlivosti si výrobok nevyžaduje prakticky žiadne ošetrovanie.

Návod na zostavenie a montáž

Ortéza SacroLoc sa dodáva v štandardnej veľkosti a pripravená na používanie.

Technické údaje / parametre

Ortéza SacroLoc sa skladá z pleteniny s pevnými ťažnými popruhmi a odnímateľnými pelotami chrbta. Peloty chrbta sú neoddeliteľne spojené s obalom froté. Peloty chrbta sa dodávajú ako náhradný diel.

Pokyny pre opakované použitie

Výrobok je naplánovaný na individuálne ošetrovanie pacienta alebo pacientky.

Záruka

- Platia zákonné ustanovenia krajiny, kde bol výrobok zakúpený. Ak vznikne podozrenie na záručný prípad, kontaktujte najprv priamo tú osobu, od ktorej ste výrobok zakúpili. Výrobok sa musí pred podaním záručnej reklamácie vyčistiť. Pokiaľ neboli dodržané pokyny k manipulácii a ošetrovaniu SacroLoc, môže byť negatívne ovplyvnená alebo vylúčená záruka.
- Záruka je vylúčená pri:
 - Používaní bez správnej indikácie;
 - Nedodržiavaní pokynov kvalifikovaného personálu;
 - Svojoľných zmenách výrobku

Ohlasovacia povinnosť

Na základe regionálnych zákonných predpisov ste povinni, bezodkladne nahlásiť každý závažný problém pri používaní tohto medicínskeho výrobku výrobcovi, ako aj kompetentnému úradu. Naše kontaktné údaje nájdete na zadnej strane tejto brožúry.

Likvidácia výrobku

Výrobok môžete zlikvidovať v súlade s národnými právnymi predpismi.

Odborný pracovník?

Všeobecné upozornenia

Po prvom použití ortézy SacroLoc skontrolujte jej optimálnu a individuálnu polohu. Peloty chrbta sa musia prispôbiť panve, aby tieto peloty priliehali na horné zadné hroty panvovej kosti s vnútorným výrezom. Spolu s pacientom navčíte správne prikladanie. Neodborné úpravy výrobku sa nesmú vykonávať. Pri nedodržaní tohto zákazu môže byť nepriaznivo ovplyvnený účinok výrobku do tej miery, že prestane platiť záruka na výrobok.

Zloženie materiálu

Polyamid (PA), Termoplastický elastomér (SEBS), Polyuretán (PUR), Elastan (EL), Polypropylén (PP), Polyester (PES), Polyoxymetylén (POM), Bavlna (CO), Polyetylén (PE), Akrylátové lepidlo (A)

MD – Medical Device (Zdravotnícke pomôcky)

UDI – Značkováč dátová matica ako UDI

Stav informácií: 2022-04

* Upozornenie na nebezpečenstvo poškodenia zdravia osôb (riziko poranenia, poškodenia zdravia a úrazu), príp. vecných škôd (poškodenie výrobku).

¹ Ortéza = ortopedická pomôcka pre stabilizáciu, odľahčenie, znehybnenie, ovládanie alebo nápravu končatín alebo trupu

²Odborným pracovníkom je každá osoba, ktorá je podľa platných národných predpisov, ktoré sa na ňu vzťahujú, oprávnená na prispôbovanie ortéz a poskytovanie poučenia o ich použití.

hu magyar

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Bauerfeind termékét választotta.

Minden nap azon dolgozunk, hogy a termékeink egészségügyi ha-tékony-ságát növeljük, hiszen az Ön egészsége fontos számunkra. Kérjük, figyelmesen olvassa el és pontosan tartsa be a jelen **hasz-nálati útmutatóban** leírtakat. Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban forduljon a kezelőorvosához vagy keresse fel a szaküzletet.

Rendeltetés

A SacroLoc egy gyógyászati termék. A medence stabilizálására és a keresztcsonti ízületek célzott tehermentesítésére szolgáló ortézis¹.

Javallatok

- A sacroiliacalis ízület megbetegedései (ISG-szindróma, ISG-artró-zis, ISG-instabilitás)
- Csipő-instabilitás, pl. szimfizis-szétválás és -lazulás
- Sacroiliacalis ízületi diszfunkció (akut és profilaktikus)
- Medence környéki izom- és ínfájdalmak
- Szerkezeti zavarok az ágyéki gerincszakaszt érintő spondylodesis után (L5–S1 átmenetnél)
- Csipőcsonttörés konzervatív kezelése

Az alkalmazással járó kockázatok

⚠ Vigyázat!*

Kérjük, pontosan tartsa be a jelen használati útmutató előírásait és a szakszemélyzet utasításait.

- A SacroLoc kizárólag a használati útmutatóban található utasítások szerint és a felsorolt alkalmazási területeken (alkalmazási hely) viselhető.
- A szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használat a termékfelelősség kizárását jelenti.
- Az ortézis¹ alkalmasságáról és használatáról terheesség fennállása esetén az orvos dönt ez egyedi eset alapján. Amennyiben az orté-zis¹ alkalmazása a terheesség fennállása során kényelmetlenné válik, akkor a méretebeállításokat és a felhelyezés módját felül kell vizsgálni, valamint tanácsot kell kérni az orvostól, és adott esetben fel kell függeszteni az ortézis használatát. Az anyára és a magzatra gyakorolt mellékhatások nem ismertek.
- A bemutatást kizárólag szakszemélyzet² végezheti.

- Más termékekkel, pl. kompressziós terápia (kompressziós harisnyák) keretében történő használatáról kérje kezelőorvosa véleményét.
- A SacroLoc viselése póló vagy trikó felett ajánlott.
- Ha tünetei súlyosbodnak, vagy szokatlan változásokat észlel, azonnal keresse fel orvosát.
- Ügyeljen, hogy a termék ne érintkezzen zsír- és savtartalmú anyagokkal, kenőcsökkel és oldatokkal.
- Jelenleg nem ismertek a terméknek az egész szervezetre ható mellékhatásai. A terméket szakszerűen kell felhelyezni / használni. Ügyeljen, hogy a SacroLoc ne legyen túl szoros, mert ez a szövetek helyi megnyomódását okozhatja. Ritkán előfordulhat a véredények vagy az idegpályák részleges elzáródása.

Ellenjavallatok

- Orvosilag jelentős túlzérkenységre utaló tünetek jelenleg nem ismeretesek. A következő diagnoszisk esetén az ilyen jellegű gyógyászati segédeszközök viselése és alkalmazása csak az orvossal folytatott megbeszélés után javallott:
- Bőrbetegségek, a bőr sérülései a segédeszköz viselése által érintett testtájékon, különösen gyulladásos tünetek megléte esetén, valamint gyulladt hegek, bőrpír és túlzott melegség esetén
 - Érzékelési zavarok és mozgászavarok pl. cukorbetegség (Diabetes mellitus) esetén

Alkalmazási terület

A – Hátpárna (masszázs párna)

B – A rögzítés jobb oldali pántja ujjzsebbel

C – A rögzítés bal oldali pántja ujjzsebbel

D – Húzópántok

A merevítő felvétele

❶ Helyezze az ortézist¹ a medence közepére úgy, hogy a felső pereme ne legyen magasabban a medencecsigolyák felső pereménél, azaz ne érje el a derekat. **❷** Most csúsztassa az ujjait felülről a rögzítésen az erre a célra kialakított ujjzsebekbe, majd a rögzítést egyenletesen húzza előre. **❸** A rögzítőpánt bal oldali részét nyomja rá a hasára, majd a jobb oldali részt húzza át annyira balra, hogy a bal oldali részzel összetapadjon. A felhelyezés után először a bal ujjzsebből, majd a jobb ujjzsebből húzza ki az ujjait. **❹** Most fogja meg mindkét húzópántot és egyszerre, egyforma erővel húzza a pántokat előre addig, amíg a kívánt erőhatást (stabilizálást) el nem éri. **❺** Végül mindkét húzópántot nyomja szorosan egymás mellé a nagy rögzítőterületre.

Ápolási útmutató

Megjegyzés: Ügyeljen, hogy a SacroLoc merevítőt ne érje közvetlen hőhatás (pl. fűtés, napsgugárzás vagy gépkocsiban történő tárolás miatt)! Az ilyen hatások miatt az anyag károsodhat. Mindez befolyásolhatja a SacroLoc hatékonyságát.

A SacroLoc bevarrt címkéje, amely a termék nevét, méretét, gyártóját, valamint a termék mosásával és CE jelölésével kapcsolatos információkat tartalmazza, a kötés belső részében található.

Szükség esetén a SacroLoc ot kímélő tisztítószerszel, kézzel tisztítsa le. Az ortézist¹ szabad levegőn szárítsa.

Alkalmazási hely

A javallatoknak megfelelően (medence, keresztcsonti ízületek). Lásd a rendeltetést.

Karbantartási utasítások

Megfelelő kezelés és ápolás esetén a termék gyakorlatilag nem igényel karbantartást.

Összeállítási és szerelési útmutató

A SacroLoc szállítása standard méretben, használatra készen történik.

Műszaki adatok / paraméterek

A SacroLoc feszes húzópántokkal és levehető hátpárnákkal ellátott kötésből áll. A hátpárnákat egy frottirburkolat köti elválaszthatatlanul össze. A hátpárnák pótkatrészként szállíthatók.

Utasítások újbóli használathoz

A termék a betegek egyénre szabott ellátására készült.

Garancia

Annak az országnak a törvényi előírásai érvényesek, amelyben a terméket megvásárolta. Amennyiben Ön garanciális problémát gyanít, kérjük, hogy először forduljon ahhoz, akitől Ön a terméket megvásárolta. Kérjük, hogy a terméket a garanciális probléma bejelentése előtt mossa ki. Amennyiben a SacroLoc használatára és az ápolására vonatkozó utasításokat nem tartották be, a garancia károsodhat vagy kizárásra kerülhet.

A garanciát kizáró feltételek:

- Nem az indikációnak megfelelő használat
- Amennyiben nem tartják be a szakszemélyzet utasítását
- Őnhatalmúlág elvégzett változtatások a terméken

Jelentési kötelezettség

A regionális törvényi előírások alapján Ön köteles a jelen gyógyászati termék használata során jelentkező valamennyi jelentős eseményt haladéktalanul jelenteni a gyártó, valamint az illetékes hatóság felé. Elérhetőségeinket a jelen tájékoztató hátoldalán találja.

Ártalmatlanítás

A termék a mindenkori ország törvényi előírásainak megfelelően ártalmatlanítható.

Szakszemélyzet²

Általános utasítások

Az első kezelés után ellenőrizze a SacroLoc optimális és teste szabott elhelyezkedését. A hátpárnákat a megfelelő helyzetben kell a medencére illeszteni úgy, hogy azok a belső kivágással a hátulsó felső csípőtővisekre illeszkedjenek. A pácienssel gyakoroltassa a segédeszköz felvételét. A termék szakszerűtlen megváltoztatása nem megengedett. Ennek a korlátozásnak a figyelmen kívül hagyása csökkenti a termék hatékonyságát, így a termékre vonatkozó jótállás megszűnik.

Anyag összetétele

Poliamid (PA), Termoplasztikus elasztomer (SEBS), Poliuretán (PUR), Elasztán (EL), Poliipropilén (PP), Poliészter (PES), Polioximetilén (POM), Pamut (CO), Polietilén (PE), Akrilát ragasztó (A)

MD – Medical Device (Orvostechikai eszköz)

UDI – Az UDI az adatmátrix azonosítója

Az információ állapota: 2022-04

*Figyelmeztetés személyi sérülés (sérülésveszély, egészségi és baleseti kockázat), adott esetben anyagi kár (a termék károsodásának) veszélyére.

¹Ortézis = ortopédiai segédeszköz rögzítés, tehermentesítés, nyugalomba helyezés céljára, valamint a végtagok vagy a törzs mozgásainak vezetésére ill. korrekciójára.

²A szakszemélyzet azokat a személyeket foglalja magában, akik az Ön országában érvényes előírások értelmében a bandázsok egyedi illesztésére és használatának betanítására jogosultak.

hr hrvatski

Poštovani korisnici,

zahvaljujemo vam što ste se odlučili za proizvod tvrtke Bauerfeind.

Mi svakodnevno radimo na poboljšanju medicinske učinkovitosti svojih proizvoda jer vaše nam je zdravlje izuzetno važno. Pažljivo proučajte i poštuje ove **upute za uporabu**. Ako imate kakvih pitanja, obratite se svom liječniku ili specijaliziranoj trgovini.

Određena primjena

SacroLoc je medicinski proizvod. To je ortoza¹ za stabilizaciju zdjelice i rasterećenje sakroilijačnih zglobova.

Indikacije

- Bolesti sakroilijačnog zgloba (sindrom sakroilijačnog zgloba, artroza sakroilijačnog zgloba, nestabilnost sakroilijačnog zgloba)

- Nestabilnost zdjeljičnog prstena, npr. ruptura simfize i relaksacija simfize
- Blokada sakroilijačnog zgloba (akutno i profilaktički)
- Mijalgije i tendopatije područja zdjelice
- Strukturalni poremećaji nakon spinalnih fuzija (u prijelazu L5–S1)
- Konzervativna terapija nakon fraktura zdjelice

Rizici kod primjene

⚠ Oprez*

Molimo obratite pozornost na specifikacije navedene u ovim uputama za uporabu i na upute stručnog osoblja.

- SacroLoc dopušteno je nositi samo u skladu s podacima navedenima u ovim uputama za uporabu i u skladu s navedenim područjima primjene (mjesto primjene).
- Kod nestručne primjene ili primjene nevezane za svrhu isključena je odgovornost za proizvod.
- Prikladnost i primjena ortoze¹ tijekom trudnoće mora se usuglasiti s liječnikom u svakom pojedinom slučaju. Ako nošenje ortoze¹ tijekom trudnoće izaziva nelagodu, potrebno je provjeriti veličine i tehniku postavljanja, porazgovarati s liječnikom i eventualno odustati od daljnje primjene. Nuspojave za majku i fetus nisu poznate.
- Poduku o postavljanju i nošenju smije provoditi samo stručno osoblje².
- Prethodno dogovorite kombinaciju s drugim proizvodima npr. u okviru kompresijske terapije (kompresivne čarape) sa svojim liječnikom.
- SacroLoc nosite preko svoje majice ili potkošulje.
- Ako se tegobe povećaju ili ako na tijelu uočite neobične promjene, molimo da se odmah obratite svojem liječniku.
- Proizvod ne smije doći u dodir sa sredstvima koja sadrže masnoće i kiseline, lijekovima mastima i losionima.
- Do sada nisu poznate nuspojave, koje se odnose na cijeli organizam. Podrazumijeva se stručna primjena / stručno postavljanje proizvoda. SacroLoc ne stežite prečvrsto, jer može doći do lokalnih pritisaka. U rijetkim slučajevima može doći do suženja krvnih žila i živaca.

Kontraindikacije

- Nisu poznati medicinski relevantni slučajevi preosjetljivosti. U slučaju slijedećih bolesti postavljanje i nošenje ovakvog pomagala moguće je samo uz dogovor s vašim liječnikom:
- Kožne bolesti / ozljede na liječenim dijelovima tijela, naročito upalne pojave. Izbočeni ožiljci s oteklinom, crvenilom i zagrijavanjem
- Smetnje osjetila i pokreta, npr. kod šećerne bolesti (Diabetes mellitus)

Područje primjene

A – leđne pelote (jastučić za masažu)

B – desna polovina zatvarača s džepom za prste

C – lijeva polovina zatvarača s džepom za prste

D – pojasevi za pritezanje

Postavljanje

❶ Postavite ortožu¹ na sredinu zdjelice, tako da gornji rub ortoze¹ ne prelazi gornji rub ilijačnog grebena, odnosno da ne zalazi u struk. **❷** Gurnite prste u to za predviđeni džep za prste na zatvaraču i ravnomjerno povucite zatvarač prema naprijed. **❸** Pritisnite sada lijevu polovinu zatvarača na truh i stavite desnu polovinu zatvarača preko lijeve polovine sve dok je ne možete zalijepiti na lijevu polovinu. Kod lijepljenja prvo povucite prste iz lijevog a zatim iz desnog džepa za prste. **❹** Uzmite sada u ruke oba pojasa za pritezanje i povucite ih istovremeno i ravnomjerno prema naprijed, sve dok ne postignete željeni pritisak (stabilizaciju). **❺** Na kraju zalijepite oba pojasa za pritezanje jedan uz drugi na veliki zatvarač.

Održavanje proizvoda

Napomena: Nikada ne izlažite SacroLoc izravnoj toplini (npr. grijanje, sunčeva svjetlost, skladištenje u osobnom vozilu)! Moguća su oštećenja materijala. Ovo može umanjiti djelotvornost SacroLoc-a. Ugrađena oznaka proizvoda SacroLoc s informacijama o nazivu proizvoda, veličini, proizvođaču, uputama za pranje i CE oznakom nalazi se u unutarnjem dijelu pletiva. Ortozu SacroLoc po potrebi možete ručno oprati blagim deterđentom. Pustite da se ortoza¹ osuši na zraku.

Contraindicații

Reacții de hipersensibilitate nu sunt cunoscute până în momentul de față. În următoarele tipuri de boli, aplicarea și purtarea unui astfel de mijloc auxiliar trebuie făcută numai după consultarea medicului dumneavoastră:

•Boli / răni ale pielii în zona în care se utilizează produsul, mai ales inflamații, dar și cicatrice deschise inflamate, înroșiri și supraîncălziri

•Sensibilitate și probleme ce afectează mișcarea membrelor, de exemplu diabet (Diabetes mellitus)

Domenii de aplicare

A – perniță spate (pernă masaj)

B – Încăzătorul din dreapta cu buzunar pentru degete

C – Încăzătorul din stânga cu buzunar pentru degete

D – chingi pentru presiune

Aplicarea

❶ Poziționați orteza¹ în centrul bazinului, astfel încât marginea superioară a ortezei¹ să nu depășească marginea superioară a crestei iliace, resp. să nu pătrundă în talie.
❷ Introduceți acum degetele dinspre sus în buzunarul pentru degete prevăzut la încălzitoare și trageți uniform înainte.
❸ Apăsați acum încăzătorul din stânga pe burtă și puneți încăzătorul din dreapta peste cel din stânga până când îl puteți prinde. La prindere scoateți mai întâi degetele din buzunarul stâng pentru degete și apoi din cel drept.
❹ Luați acum ambele chingi pentru presiune în ambele mâini și trageți de ele simultan și uniform înainte, până obțineți forța (stabilizarea) dorită.
❺ Apoi prindeți ambele chingi pentru presiune pe încăzătorul mare.

Instrucțiuni de întreținere

Indicație: Niciodată nu expuneți produsul SacroLoc la acțiunea directă a căldurii (de exemplu surse de căldură, radiații solare, păstrare în autovehicule)! Materialul se poate deteriora. Astfel eficiența SacroLoc poate fi afectată.

Eticheta cusută a SacroLoc cu informații privind denumirea produsului, mărimea, producătorul, instrucțiunile de spălare și marca CE se află pe partea interioară a țesăturii.

În caz de necesitate, orteza SacroLoc poate fi spălată manual cu un detergent delicat. Lăsați orteza¹ să se usuce la aer.

Locul de utilizare

Conform indicațiilor (bazin, articulația sacroiliacă).

Vezi instrucțiunile privind utilizarea conform destinației.

Instrucțiuni de întreținere

La o utilizare și îngrijire corespunzătoare, practic nu necesită întreținere.

Instrucțiuni de asamblare și montaj

SacroLoc este livrat în dimensiuni standard, gata de utilizare.

Date tehnice / parametri

Orteza SacroLoc se compune dintr-o țesătură cu chingi ferme pentru presiune și pernite pentru spate detașabile. Pernițele de spate sunt lipite inseparabil printr-un înveliș de frottee. Pernițele de spate se pot livra ca piesă de schimb.

Indicații de reutilizare

Produsul este conceput pentru îngrijirea individuală a unui pacient.

Garanția

Sunt aplicabile prevederile legale valabile în țara în care a fost achiziționat produsul. În cazul situațiilor în care se impune aplicarea prevederilor referitoare la garanție, vă rugăm să vă adresați mai întâi persoanei de la care ați achiziționat produsul. Produsul trebuie curățat înainte de solicitarea garanției. Dacă nu au fost respectate indicațiile privind manipularea și îngrijirea SacroLoc, garanția poate fi afectată sau exclusă.

Garanția este exclusă în caz de:

- Utilizare neconformă cu indicațiile
- Nerespectare a instrucțiunilor personalului de specialitate
- Modificare neautorizată a produsului

Destinația de utilizare

Datorită prevederilor legale regionale, sunteți obligat să comunicați fără întârziere orice incident grav apărut ca urmare a utilizării acestui produs medical atât producătorului, cât și autorității competente. Datele noastre de contact le găsiți pe partea posterioară a acestei broșuri.

Dezafectarea

Puteți dezafecta produsul în conformitate cu prescripțiile naționale.

Personal de specialitate²

Indicații generale

După prima îngrijire verificați ca poziția produsului SacroLoc să fie optimă și adaptată la individ.

Insertiile de spate trebuie ajustate în poziție pe bazin, astfel încât acestea să se așeze pe acele osului iliac posterioare superioare cu golurile lor.

Repețați cu pacienții aplicarea corectă a produsului.

Nu este permisă modificarea necorespunzătoare a produsului.

În cazul nerespectării indicațiilor, eficiența produsului poate fi influențată, astfel încât este exclusă răspunderea pentru produs.

Compoziția materialului

Poliamidă (PA), Elastomer termoplastic (SEBS), Poliuretan (PUR) Elastan (EL), Polipropilenă (PP), Poliester (PES), Polioximetilenă (POM), Bumbac (CO), Polietilenă (PE), Adeziv pe bază de acrilat (A)

– Medical Device (Dispozitiv medical)

– Identificator MatriceDate sub formă de UDI

Data informațiilor: 2022-04

* Indicații pentru evitarea vătămărilor corporale (riscul rănirii, al afectării sănătății și al accidentelor) și a eventualelor pagube materiale (deteriorarea produsului).

¹ Orteză = mijloc ortopedic auxiliar pentru stabilizarea, ușurarea, ameliorarea durerii, dirijarea sau corectarea membrelor sau a trunchiului

² Se consideră personal de specialitate orice persoană care, în conformitate cu reglementările naționale, este calificată pentru ajustarea ortezelor și pentru instruirea privind folosirea acestora.

ελληνικά

Αγαπητέ πελάτη,

σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Bauerfeind.

Εργαζόμαστε σε καθημερινή βάση στη βελτίωση της ιατρικής αποτελεσματικότητας των προϊόντων μας, καθώς δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υγεία σας. Διαβάστε σχολαστικά και τηρείτε τις παρούσες **οδηγίες χρήσης**. Εάν έχετε απορίες, απευθυνθείτε στον ιατρό σας ή στο εξειδικευμένο κατάστημα που σας εξυπηρετεί.

Σκοπούμενη χρήση

Το SacroLoc είναι ένα ιατρικό προϊόν. Αποτελεί μια όρθωση¹ για σταθεροποίηση της λεκάνης και στοχευμένη ανακούφιση των ιερολαγόνιων αρθρώσεων.

Ενδείξεις

- Παθήσεις της ιερολαγόνιας άρθρωσης (σύνδρομο ιερολαγόνιας άρθρωσης (IS), οστεοαρθρίτιδα ιερολαγόνιων αρθρώσεων, αστάθεια ιερολαγόνιων αρθρώσεων)
- Αστάθεια πυελικού δακτυλίου, π.χ. διάσταση και χαλάρωση σύμφυσης
- Δυσλειτουργία ιερολαγόνιων αρθρώσεων (οξεία και χρονητικά)
- Μυαλγίες και τενονοπαθείες της πेलικής χώρας
- Δομική διαταραχή μετά από σπονδυλοδεσίες (στην περιοχή L5 – S1)
- Συντηρητική αντιμετώπιση μετά από κατάγματα της λεκάνης

Κίνδυνοι χρήσης

Προσοχή*

Τηρείτε επακριβώς τις πληροφορίες που θα βρείτε στις παρούσες οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες των ειδικών.

• Το SacroLoc θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες των παρούσων οδηγιών χρήσης και για τα προσδιοριζόμενα σημεία (σημεία εφαρμογής).

- Σε περίπτωση αντικανονικής χρήσης ή χρήσης για σκοπό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο παύει η ευθύνη για ελαττώματα του προϊόντος.
- Η καταλληλότητα και η εφαρμογή της όρθωσης¹ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης πρέπει να ορίζεται από έναν ιατρό σε κάθε περίπτωση χωριστά. Σε περίπτωση που η εφαρμογή της όρθωσης¹ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προκαλεί δυσφορία, πρέπει να ελεγχθούν οι ρυθμίσεις μεγέθους και η τεχνική εφαρμογής, να επικοινωνήσετε με τον ιατρό σας και, εφόσον απαιτείται, να διακόψετε την περαιτέρω εφαρμογή. Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες για τη μητέρα και το έμβρυο.
- Η επίδειξη πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από ειδικούς².

• Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε συνδυασμό με άλλα, π.χ. στο πλαίσιο μιας θεραπείας συμπίεσης (θεραπευτικές κάλτσες συμπίεσης), συμβουλευθείτε το θεράποντα ιατρό σας.

• Φορέστε το SacroLoc πάνω από τη μπλούζα ή τη φανέλα σας.

• Εάν οι ενοχλήσεις που αισθάνεστε επιδεινωθούν ή παρατηρήσετε ασυνήθιστες αλλαγές στο σώμα σας ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

• Το προϊόν δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με μέσα που περιέχουν λίπη και οξέα, με αιωφικές ή λοσιόν.

• Δεν έχουν έως τώρα αναφερθεί παρενέργειες που να επηρεάζουν ολόκληρο τον οργανισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή χρήση / εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε το SacroLoc πολύ σφιχτά, ενδέχεται να προκληθούν τοπικοί μώλωπες. Σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκληθεί στένωση των αιμοφόρων αγγείων και των νεύρων.

Αντενδείξεις

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας με κλινική σημασία δεν έχουν γίνει έως τώρα γνωστές. Στις ακόλουθες περιπτώσεις κλινικών συμπτωμάτων η εφαρμογή και η χρήση ενός τέτοιου βοηθητικού μέσου συνιστάται μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον θεράποντα ιατρό σας:

- Δερματικές ασθένειες / τραυματισμοί στο μέρος του σώματος που τοποθετείται η όρθωση, ιδίως εάν υπάρχουν φαινόμενα φλεγμονής, ούλες με οίδημα, ερεθισμός και αίσθημα καύσου
- Αισθητικές και κινητικές διαταραχές π.χ. σε περίπτωση σακχαρώδους διαβήτη (Diabetes mellitus)

Περιοχή εφαρμογής

A – Πελάτα ράχης (μαξιλάρι μασάζ)

B – Δεξί μέρος κουμπώματος με υποδοχή για τα δάχτυλα

C – Αριστερό μέρος κουμπώματος με υποδοχή για τα δάχτυλα

D – Ιμάντες έλξης

Εφαρμογή

❶ Τοποθετήστε την όρθωση¹ στο κέντρο της λεκάνης κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το επάνω περιθώριο της όρθωσης¹ να μην υπερβαίνει το επάνω περιθώριο της λαγόνιας ακροφορίας, δηλ. να μην φτάνει στη μέση σας.
❷ Στη συνέχεια βάλτε τα δάχτυλά σας από πάνω μέσα στις προβλεπόμενες υποδοχές για τα δάχτυλα του κουμπώματος και τραβήξτε το κουμπωμα προς τα εμπρός ασκώντας ομοιόμορφη πίεση.
❸ Τώρα πιέστε το αριστερό μέρος του κουμπώματος στην κοιλιά και περάστε το δεξί μέρος του κουμπώματος πάνω από το αριστερό, μέχρι να μπορεί να κολλήσει το δεξί μέρος του κουμπώματος στο αριστερό. Όταν κλείσετε το κουμπωμα nelso, τραβήξτε τα δάχτυλα πρώτα από την αριστερή και έπειτα από τη δεξιά υποδοχή για τα δάχτυλα.
❹ Κρατήστε στη συνέχεια τους δύο ιμάντες έλξης στα χέρια και τραβήξτε τους ταυτόχρονα και ομοιόμορφα προς τα εμπρός, έως ότου αισθανθείτε την επιθυμητή πίεση (σταθεροποίηση).
❺ Στη συνέχεια κολλήστε τους δύο ιμάντες έλξης τον έναν δίπλα στον άλλον πάνω στο μεγάλο κουμπωμα.

Οδηγίες φροντίδας

Υπόδειξη: Το SacroLoc δεν θα πρέπει να εκτίθεται ποτέ σε άμεση πηγή θερμότητας (π. χ. θέρμανση, ηλιακή ακτινοβολία, λόγω αποθήκευσης σε αυτοκίνητο)! Μπορεί να προκληθούν ζημιές στο υλικό με δυσμενείς επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα του SacroLoc.

Η ραμμένη ετικέτα του SacroLoc με πληροφορίες για το όνομα του προϊόντος, το μέγεθος, τον κατασκευαστή, τις οδηγίες πλυσίματος και το σήμα CE βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά του υφάσματος.

Εφόσον απαιτείται, μπορείτε να καθαρίσετε το SacroLoc στο χέρι με ένα ήπιο απορρυπαντικό. Αφήντε την όρθωση¹ να στεγνώσει φυσικά.

Σημείο εφαρμογής

Σύμφωνα με τις ενδείξεις (λεκάνη, ιερολαγόνιες αρθρώσεις), βλ. σκοπούμενη χρήση.

Υποδείξεις συντήρησης

Το προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση, εάν γίνεται σωστή χρήση για φροντίδα του.

Υπόδειξη συναρμολόγησης και τοποθέτησης

Το SacroLoc παραδίδεται σε τυποποιημένο μέγεθος, έτοιμο για χρήση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά / παράμετροι

Το SacroLoc αποτελείται από ένα διαμορφωμένο πλεκτό ύφασμα με σταθερούς ιμάντες έλξης και αφαιρούμενες πελότες ράχης. Οι πελότες ράχης καλύπτονται από ένα φροτέ περίβλημα, ώστε να μην χωρίζονται μεταξύ τους. Διατίθενται και ανταλλακτικές πελότες ράχης.

Υποδείξεις για την επαναχρησιμοποίηση

Το προϊόν προορίζεται για την εξατομικευμένη εφαρμογή σε έναν και μόνο ασθενή.

Εγγυοδοτική κάλυψη

Ισχύουν οι νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία αποκτήθηκε το προϊόν. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι μια περίπτωση εμπίπτει στα πλαίσια εγγυοδοτικής κάλυψης, απευθυνθείτε αρχικά στο σημείο από το οποίο προμηθεύτηκε το προϊόν. Καθαρίζετε το προϊόν πριν από οποιοδήποτε αξίωση στα πλαίσια της εγγυοδοτικής κάλυψης. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποδείξεων σχετικά με τον χειρισμό και τη φροντίδα του SacroLoc, ενδέχεται να περιοριστεί ή να ακυρωθεί η εγγυοδοτική κάλυψη.

Η εγγυοδοτική κάλυψη ακυρώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Χρήση όχι ανάλογα με τις ενδείξεις
- Μη τήρηση των οδηγιών των ειδικών
- Αυθαίρετες τροποποιήσεις του προϊόντος

Υποχρέωση δήλωσης

Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν κατά τόπους είστε υποχρεωμένοι να δηλώνετε άμεσα οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό αντιμετωπίσατε κατά τη χρήση του παρόντος ιατρικού προϊόντος τόσο στον κατασκευαστή όσο και στην αρμόδια αρχή. Για τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας, ανατρέξτε στο οπισθοφύλλο του παρόντος φυλλαδίου.

Απόρριψη

Μπορείτε να απορρίψετε το προϊόν σύμφωνα με τις εθνικές νομικές διατάξεις.

Για τους ειδικούς²

Γενικές υποδείξεις

Ελέγχετε μετά την πρώτη εφαρμογή εάν το SacroLoc είναι προσαρμοσμένο τέλεια και εξατομικευμένα στον ασθενή. Οι πελότες ράχης πρέπει να προσαρμοστούν στη λεκάνη, ώστε να εφαρμόζοντn στις οπίσθιες άνω λαγόνιες άκανθες με την εσωτερική εγκοπή. Εάν χρειάζεται, πραγματοποιήστε διορθώσεις. Δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται αντικανονικές τροποποιήσεις στο προϊόν. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς η απόδοση του προϊόντος και θα αποκλειστεί η ευθύνη για ενδοχόμενα ελαττώματά του.

Σύνθεση

Πολυαμίδιο (PA), Θερμοπλαστικό ελαστομέρες (SEBS), Πολυουρεθάνη (PUR), Ελαστίν (EL), Πολυπροπυλένιο (PP), Πολυεστέρας (PES), Πολυοξυμεθυλένη (POM), Βαμβάκι (CO), Πολυαιθυλένιο (PE), Ακρυλική κόλλα (A)

– Medical Device (Ιατρική συσκευή)

– Αναγνωριστικό της μήτρας δεδομένων με τη μορφή UDI

Ενημέρωση: 2022-04

*Υπόδειξη κινδύνου για σωματικές βλάβες (κίνδυνος τραυματισμού, κίνδυνος για την υγεία και κίνδυνος ατυχήματος) ή για υλικές ζημιές (ζημιές στο προϊόν).

¹Ορθωση = ορθοπαιδικό βοηθητικό μέσο που χρησιμοποιείται για την σταθεροποίηση, ανακούφιση, ακινητοποίηση, καθώς και τον έλεγχο ή τη διόρθωση μελών ή κορμού.

²Ειδικой θεωρούνται τα άτομα που σύμφωνα με τις ισχύουσες κρατικές διατάξεις είναι εξουσιοδοτημένα να εφαρμόζουν ορθώσεις και να υποδεικνύουν τον τρόπο χρήσης ορθώσεων.

tr	türkçe
-----------------	--------

Değerli müşterimiz

Bir Bauerfeind ürününü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Her gün ürünlerimizin tıbbi etkinliğini arttırmak için çalışıyoruz, çünkü sağlığınızın kalbimize değeri var. Lütfen bu **kullanım talimatını** dikkatlice okuyun. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuza veya yetkili satıcıya başvurun.

Kullanım amacı

SacroLoc tıbbi bir üründür. Pelvisin stabilizasyonu ve sakroiliak eklemin desteklenmesi için tasarlanmış bir ortezdir¹.

Endikasyonlar

- Sakroiliak eklem hastalıkları (ISG sendromu, ISG artrozu, ISG instabilitesi)
- Pelvis kemirinde instabilite, örneğin semfiz ayrılması ve gevşemesi
- Sakroiliak eklem blokları (akut ve profilaktik)
- Pelvis bölgesinde miyalji ve tendopati
- Omurga füzyonu sonrası oluşan yapısal bozukluk (L5–S1 geçişinde)
- Pelvis kırıkları sonrasında geleneksel tedavi

Kullanım Riskleri

⚠ Dikkat*

Lütfen bu kullanım talimatlarına ve uzman personelin talimatlarına uyun.

- SacroLoc, sadece bu kullanım kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda ve uygulama alanlarında kullanılmalıdır.
- Uygun olmayan veya amacının dışında kullanımda ürün sorumluluğu ortadan kalkar.
- Ortezin¹ gebelik sırasında uygunluğuna ve kullanımına doktor karar vermelidir. Gebelik sırasında ortez² takılıyken rahatsızlık verirse, beden ayarları ve uygulama tekniği kontrol edilmeli, doktor tavsiyesi alınmalı ve gerekirse başka bir uygulama şekli denenmelidir. Anne ve fetüs açısından herhangi bir yan etki bilinmemektedir.
- Kullanım talimatları sadece uzman personel² tarafından sunulmalıdır.
- Doktorunuza danışmadan başka ürünlerle birlikte kullanmayın (örneğin kompresyon tedavisinde kompresyon çoraplarıyla).
- SacroLoc ürününü tişört veya atletiniz altına giyiniz.
- Semptomlarda artış gibi vücudunuzda normal olmayan değişiklikler fark ederseniz, hemen doktorunuza başvurun.
- Ürünün yağ, asit, merhem ve losyonlar içeren maddelerle temas etmemesini sağlayın.
- Tüm vücudu etkileyen bir yan etkiye bugüne kadar rastlanmamıştır. Ürün doğru şekilde kullanılmalıdır. SacroLoc'u çok sıkı şekilde kullanmayın, aksi halde lokal basınç semptomları baş gösterebilir. Çok ender olarak, kan damarlarında veya sinirlerde sıkışma oluşabilir.

Kontrendikasyonlar

Tıbbi bakımdan anlamlı hipersensiviteye rastlanmamıştır. Aşağıdaki klinik durumlarda, bu tür bir medikal ürün sadece doktorunuza danışıldıktan sonra kullanılabilir:

- Destek ürününün kullanıldığı bölgelerde, özellikle inflamasyon belirtileri, cilt problemleri / yaraları oluşmuşsa. Ayrıca şişme, kızartı ve aşırı ısınmayla birlikte yara izlerinde kabarma meydana gelmişse.
- Örn. şeker hastalığında (Diabetes mellitus) hassasiyet ve hareket sorunları.

Kullanım bölgesi

A – Arka ped (Masaj yastığı)

B – Parmak yuvalı sağ bağ

C – Parmak yuvalı sol bağ

D – Germe bağları

Uygulama şekli

- Ortezin¹ kenarı basenin üst kenarını aşmayacak ya da bele kadar gelecek şekilde ortezi¹ baseni ortalararak konumlandırın.
- Parmağınızı üst kısımdan bağın parmak yuvasına sokun ve kilidi aynı anda öne doğru çekin.
- Sol taraftaki bağ, karnızın üzerine presleyin ve sağ taraftaki bağı soldakinin üzerine cırt bantla sabitleninceye kadar çekin. Cırt bantla sabitleme sırasında parmağınızı önce sol ve ardından sağ parmak yuvasından çekin.
- Her iki germe bağıını iki elinizle kavrayın ve istenilen gerilme (Stabilizasyon) sağlanana kadar aynı anda ve eşit oranda öne doğru çekin.
- Ardından her iki germe bağıını birleştirip ana kapama noktasında sabitleyin.

Bakım önerileri

Uyarı: SacroLoc'u asla doğrudan ısıya (örn. ısıtıcılar, direkt güneş ışığı, araba içinde) maruz bırakmayın! Bu nedenle malzeme zarar görebilir. Bu SacroLoc'un etkisini azaltabilir.

SacroLoc ürününde ürün adı, boyut, üretici, yıkama talimatı ve CE işaretinin bulunduğu dikili etiket dokumanın iç kısmında yer alır. Gerektiğinde SacroLoc yumuşak bir temizlik maddesi ile elde yıkanabilir. Ortezi¹ havayla kurutun.

Ürünün kullanıldığı bölgeler

Endikasyonlarda belirtilen bölgeler (Pelvis, sakroiliyak eklemler). Bakınız Amaç.

Ürünün Bakımı

Doğru kullanıldığında ve bakım yapıldığında, ürünün normal şartlarda teknik bakıma ihtiyacı yoktur.

Birleştirme ve Montaj Talimatları

SacroLoc standart boyutunda ve kullanıma hazır şekilde teslim edilir.

Teknik veriler / parametreler

SacroLoc, sabit germe bağları ve çıkarılabilir arka pedleri olan bir dokumadan oluşur. Arka ped kumaşıyla ayrılmaz şekilde bağlıdır. Arka ped yenisiyle değiştirilmek üzere sipariş edilebilir.

Yeniden kullanım şartları

Ürün tek bir hastanın kişisel tedavisi için öngörülmüştür.

Garanti

Ürünün satın alındığı ülkedeki yasal hükümler geçerlidir. Bir garanti talebi halinde, lütfen önce ürünü satın aldığınız yere başvurun. Ürün, garanti için gösterilmeden önce temizlenmelidir. SacroLoc'in kullanımı ve bakımı ile ilgili talimatlara uyulmamışsa, garanti bozulabilir veya geçersiz olabilir.
Garanti aşağıdaki durumlarda geçersizdir:
• Endikasyona uygun olmayan kullanım
• Sağlık uzmanının tavsiyelerine uyulmaması
• Kendi kendine yapılan ürün değişikliği

Bildirme yükümlülüğü

Bölgesel yasal düzenlemeler nedeniyle, bu tıbbi cihazı kullanırken meydana gelen her ciddi olayı hem üreticiye hem de yetkili makama derhal bildirmeniz gerekir. İletişim bilgilerimizi bu broşürün arka sayfasında bulabilirsiniz.

Ürünün İmha Edilmesi

Ürünü ulusal yasal yönetmelikler doğrultusunda imha edebilirsiniz.

Teknik personel²

Genel Uyarılar

İlk kullanımdan sonra SacroLoc´ un size en uygun yapıda olduğunu kontrol edin. Arka pedler, iç girinti ile üst posterior iliak omurgalara dayanacak şekilde pelvis üzerindeki konumlarında ayarlanmalıdır. Ürünü hastalara uygularken doğru prosedürü takip edin. Ürün üzerinde kurallara uymayan değişiklikler yapılmamalıdır. Bu talimata uyulmaması ürünün performansını olumsuz etkileyebilir ve bu durumda üreticinin sorumluluğu ortadan kalkar.

Malzeme içeriği

Polyamid (PA), Termoplastik elastomer (SEBS), Poliüretan (PUR), Elastan (EL), Polipropilen (PP), Polyester (PES), Poliksimetilen (POM), Pamuk (CO), Polietilen (PE), Akrlat yapıştırıcı (A)

MD – Medical Device (Tıbbi cihaz)

UDI – UDI veri matrisi niteliyicisi

Son revizyon: 2022-04

* Kişilerin zarar görme tehlikesine (yaralanma, sağlık ve kaza riski) ve maddi hasara (ürün hasarı) ilişkin uyarı.

¹Ortez = kol ve bacakların veya gövdenin stabilize edilmesi, yükünün hafifletilmesi, hareketsiz hale getirilmesi, yönlendirilmesi veya düzeltilmesi gibi amaçlarla kullanılan ortopedik yardımcı gereç

²Teknik personel, ortezlerin kullanımı alanında sabitleme ve kullanım talimatlarını sunmak için geçerli yasal düzenlemeler doğrultusunda yetki sahibi olan kişidir.

ru	русский
-----------------	---------

Уважаемые клиенты!

Благодарим вас за приобретение продукции Bauerfeind.
ККаждый день мы работаем над повышением эффективности нашей медицинской продукции, поскольку ваше здоровье нам очень дорого. Внимательно ознакомьтесь с **инструкцией по использованию** и следуйте приведенным в ней указаниям. При возникновении вопросов обратитесь к своему лечащему врачу или в специализированный магазин.

Назначение

SacroLoc является продуктом медицинского назначения. Это ортез¹ для стабилизации таза и целенаправленной разгрузки крестцово-подвздошных суставов

Показания

- Заболевания крестцово-подвздошного сустава (крестцово-под-вздошный синдром, крестцово-подвздошный артроз, нестабиль-ность крестцово-подвздошного сустава)
- Нестабильность области тазового пояса, например, ослабление и расхождение лобкового симфиза
- Блок крестцово-подвздошного сустава (острая форма и профилакти-тика)
- Миалгии и тендопатии области таза
- Структурные нарушения после спондилодезов (в переходе L5–S1)
- Консервативное лечение после переломов таза

Риск при использовании изделия

⚠ Внимание*

В точности следуйте информации в данной инструкции по использованию и указаниям специалистов.

- SacroLoc следует применять в строгом соответствии с настоящей инструкцией и только на указанных в ней областях тела (частях тела, для которых применяется данное изделие).
- Производитель не несет ответственности за ненадлежащее использование изделия или за его использование не по назначению.
- Возможность и особенности применения ортеза¹ во время беременности необходимо в каждом отдельном случае согласовывать с врачом. Если во время ношения ортеза¹ при беременности возникает дискомфорт, следует проверить регулировку размера и технику наложения, проконсультироваться с врачом и, возможно, отказаться от дальнейшего применения. Побочные эффекты для матери и плода неизвестны.
- Инструктаж по применению должен проводить только квалифицированный специалист².
- Заранее обсудите с Вашим лечащим врачом возможное применение данного ортеза в сочетании с другими изделиями, например, с компрессионным трикотажем.
- Носите ортез SacroLoc поверх футболки или майки.
- Если жалобы усиливаются или появились необычные изменения в вашем теле, незамедлительно обратитесь к своему врачу.

- Избегайте применения вместе с данным изделием мазей, лосьонов или любых веществ, содержащих жиры и кислоты.
- На сегодняшний день неизвестно никаких побочных эффектов, оказывающих влияние на организм в целом. Данное изделие следует надевать и использовать надлежащим образом. Не затягивайте ортез SacroLoc слишком туго, иначе изделие может оказывать чрезмерное давление на некоторые участки тела. В редких случаях могут быть пережаты кровеносные сосуды или нервы.

Противопоказания

До сих пор не сообщалось о клинически значимых реакциях в связи с повышенной чувствительностью. При перечисленных ниже клинических картинах применение и ношение изделия возможно только после консультации с врачом:

- заболевания / повреждения кожи на соответствующей области тела, особенно при появлении признаков воспаления, а также при наличии шрамов, выступающих над поверхностью кожи, отеков, покраснений или при появлении чувства жара;
- нарушение чувствительности и двигательных функций, например, при сахарном диабете (diabetes mellitus).

Область применения

A – задняя подушка (массажная прокладка)

B – правая застежка Velcro с захватом для пальца

C – левая застежка Velcro с захватом для пальца

D – ремни

Наложение ортеза

¹ Наложите ортез¹ посредине таза таким образом, чтобы его верхняя кромка не выходила за верхний край подвздошной гребня или достигала линии талии.
² Вставьте пальцы в предусмотренные для этого карманы, находящиеся на застежке Velcro, и равномерно потяните застежку вперед.
³ Теперь прижмите левую застежку Velcro в области живота и наложите правую застежку Velcro на левую таким образом, чтобы Вы смогли ее наложить за левую. При наложении выньте сначала пальцы из левого, а потом из правого кармана.
⁴ Теперь возьмите каждой рукой ремни, одновременно и равномерно потяните их вперед, пока не почувствуете необходимую для стабилизации силу давления на таз.
⁅ В заключение наложите оба ремня рядом друг с другом на большую застежку Velcro.

Руководство по уходу

Указание: Никогда не подвергайте ортез SacroLoc действию прямого теплового излучения (например, не оставляйте его вблизи обогревателей, под прямыми солнечными лучами, в автомобиле)! Возможны повреждения материала. В таком случае лечебное действие ортеза SacroLoc может быть ослаблено.

Вшитая этикетка ортеза SacroLoc, на которой указано наименование изделия, размер, производитель, инструкции по стирке и знак CE, расположена на внутренней стороне трикотажа.

В случае необходимости ортез SacroLoc можно постирать вручную, используя мягкое моющее средство. Просушите ортез¹ на воздухе.

Часть тела, для которой применяется данное изделие

В соответствии с показаниями (таз, крестцово-подвздошный сустав). См. назначение.

Указания по техническому уходу

Изделие не требует особого ухода при правильном обращении и хранении.

Указания по конструкции изделия и его сборке

Ортез SacroLoc поставляется стандартного размера и готов к применению.

Технические характеристики / параметры

SacroLoc состоит из трикотажа с прочными ремнями и съемной задней подушкой. Задние подушки неотъемлемы соединена с чехлом из махровой ткани. Задняя подушка может поставляться в качестве запасной части.

Указания по повторному использованию

Изделие предназначено для индивидуального использования одним пациентом.

Гарантия

Действуют законодательные положения страны, в которой приобретено изделие. Если вы предполагаете, что имеет место гарантийный случай, обращайтесь сразу к тому, у кого было приобретено данное изделие. Прежде чем обращаться за гарантийным обслуживанием, изделие следует очистить. Если указания по обращению с банджом SacroLoc и уходу за ним не были соблюдены, гарантийные обязательства производителя могут быть ограничены или исключены.

Гарантия исключается в случае:

- Использования изделия не по назначению
- Несоблюдения рекомендаций специалистов
- Самостоятельного изменения изделия

Обязанность извещения

В соответствии с предписаниями регионального законодательства, о каждом серьезном инциденте, произошедшем при использовании данного медицинского изделия, следует незамедлительно извещать как производителя, так и компетентный орган. Наши контактные данные указаны на обратной стороне брошюры.

Утилизация

Утилизируется с бытовым мусором.

Информация для специалистов²

Общие указания

Если пациент использует ортез SacroLoc впервые, проверьте оптимальную посадку ортеза и его соответствие индивидуальным особенностям лучезапястного сустава пациента. Положение задних подушек должно быть подогнано к тазу так, чтобы они своей внутренней выемкой ложились на верхние задние ости подвздошной кости. Покажите пациенту, как следует правильно надевать ортез. Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия. Иначе это может негативно сказаться на его лечебном действии – в таком случае производитель не несет ответственности за изделие.

Состав материала

Полиамид (PA), Термопластичный эластомер (SEBS), Полиуретан (PUR), Эластан (EL), Полипропилен (PP), Полиэстер (PES), Полиоксиметилен (POM), Хлопок (CO), Полиэтилен (PE), Акрилатный клей (A)

MDI – Medical Device (Медицинское оборудование)
UDI – Классификатор матрицы данных как UDI

Состояние информации: 2022-04

^{*}Указание на опасность и возможность причинения личного ущерба (риск получения травм, риск для здоровья, риск несчастного случая) или материального ущерба (повреждения изделия).

¹ Ортезы – ортопедические вспомогательные и лечебные средства, служащие для восстановления или замещения нарушенных или потеряных биомеханических функций опорно-двигательного аппарата (ОДА).

²Квалифицированный специалист – это лицо, которое в соответствии с действующими нормами законодательства имеет право проводить подгонку ортезов и давать указания относительно их надлежащего применения.

et eesti

Lugupeetud klient!

et eesti

Lugupeetud klient!

Suur tänu, et olete otsustanud Bauerfeindi toote kasuks! Iga päev töötame oma toodete meditsiinilise kasutamise parendamise nimel, sest Teie tervis läheb meile korda. Lugege ja järgige käesolevat **kasutusjuhendit** hoolikalt. Kui teil on küsimusi, siis pöörduge oma arsti või oma edasimüüja poole.

Otstarve

SacroLoc on meditsiinitoode. See on ortoos¹ vaagna stabiliseerimiseks ja iliosakraalliigese koormuse sihipäraseks vähendamiseks.

Näidustused

- Iliosakraalliigese haigused (sündroom, artroos, ebastabiilsus)
- Vaagnaring, nt sümfüüsi eraldumine ja lõdvenemine
- Iliosakraalliigese blokeerimg (akuutne ja profülaktiline)
- Vaagnapiirkonna müalgiad ja tendopaatiad
- Struktuuraalsed häired pärast spondülodeesi (üleminekus L5–S1)
- Konservatiivne ravi pärast vaagna luumurdu

Ohud kasutamisel

Ettevaastus*
Palun järgige hoolikalt selles kasutusjuhendis olevaid andmeid ja spetsialisti juhtnöore.

- SacroLoci tohib kanda üksnes vastavalt käesoleva kasutusjuhendi juhistele ja loetletud rakenduskohtades (kasutuskoht).
- Toote mitteotstarbekohaselt või valel eesmärgil kasutamisel on tootevastutus välistatud.
- Ortoosi¹ näidustamine ja kasutamine raseduse ajal tuleb iga juhtumi korral eraldi arstiga kooskõlastada.
- Sündroom raseduse ajal ebamugav, siis tuleb suuruse seadistust ja pealepaneku tehnikat kontrollida, arstiga konsulteerida või ortoosi edasisest kasutamisest loobuda. Kõrvalmõjudisid emale ega lootele pole täheldatud.
- Kohandada ja paigaldada tohib üksnes koolitatud spetsialist².
- Ortoosi kombineerimine teiste toodetega (nt kompressioonsukad kompressioonravi käigus) tuleks eelnevalt teie raviarstiga kooskõlastada.
- Kandke SacroLoci särgi või alussärgi peal.
- Kui teie vaevused suurenevad või märkate enda juures ebaharilikke muutusi, pöörduge kohe oma arsti poole.
- Vältige toote kokkupuutumist rasvu ja happeid sisaldavate vahendite, salvide ja ihupimadega.
- Kõrvaltoimeid, mis puudutavad kogu organismi, ei ole siiani teada. Eeldatakse otstarbekohast kasutamist / pealepanekut. Ärge paigaldage SacroLoci liiga tugevalt, kuna see võib muljuda. Harvadel juhtudel esineb veresoonte ja närvide kokkusurumist.

Vastunäidustused

Kliinilises tähenduses ülitundlikkust ei ole siiani teada. Allpool loetletud haiguspiiltide puhul on niisuguse abivahendi paigaldamine ja kandmine näidustatud ainult pärast oma arstiga konsulteerimist.

- Nahahaigused ja vigastused ravitavas kehapiirkonnas, eriti põletikulised ilmingud, samuti naha pinnale tõusnud haavaarmid, millega kaasneb paistetust, punetust ja ülekuumenemine.
- Tundehäired ja liikumise häired, nt suhkruhaiguse (Diabetes mel-litus) korral.

Kasutusjuhised

A – seljapadjand (massaažipolster)

B – sõrmetaskuga parempoolne kinnituspool

C – sõrmetaskuga vasakpoolne kinnituspool

D – pingutusvöö

Paigaldamine

1 Paigutage ortoos¹ vaagna keskele, nii et ortoosi¹ ülemine hall vooderdatud äär ei ulatuks kõrgemale niudeluu ülemisest äärest ega ulatuks taljeni. **2** Lükake nüüd sõrmest ülevalet selleks ettenähtud sõrmetaskutesse kinnises ja tõmmake kinnis ühtlaselt ettepoole.

3 Suruge nüüd vasak kinnisepool kõhule ja pange parem kinnisepool nii palju üle vasaku, et neid on võimalik kinni panna. Kinnitamisel tõmmake sõrmed esmalt vasakust ja seejärel paremast sõrmetaskust välja. **4** Võtke nüüd mõlemad pingutusvööd mõlemasse kätte ja tõmmake neid korraga ja ühtlaselt ettepoole, kuni on saavutatud soovitud jõurakendus (stabiliseerimine). **5** Lõpuks kinnitage mõlemad pingutusvööd tihedalt üksteise kõrvale suurele kinnitusele.

Puhastamisjuhised

Nõuanne. Ärge jätke SacroLoci kunagi otsese kuumuse (nt küttekeha, päiksekiired, autos hoiustamine) kätte. Kuumus võib materjali kahjustada. Selle tagajärjel ei pruugi SacroLoc enam nii tõhusalt toimida. Järgige SacroLoci tekstiilitietikil olevaid hooldusjuhiseid. Selle leiate kootud materjali sisepoolelt.

Vajaduse korral saate toodet SacroLoc õrnatoimelise pesuvahendiga käsitsi puhastada. Pärast seda laske ortoosi¹ õhu käes kuivada.

Kasutuskoht

Näidustuste kohaselt (vaagen, iliosakraalliiges). Vt jaotist sihtots-tarve.

Hooldusjuhised

Toote õige käsitsemise ja korrashoiu korral on toode praktiliselt hooldusvaba.

Kokkupanek

SacroLoc tarnitakse standardsuuruses ja kasutusvalmis olekus.

Tehnilised andmed / parameetrid

SacroLoc koosneb kootud pingutusvöödest ja eemaldatavast seljapadjandist. Seljapadjandid on lahutatumatult seotud froteeümbrisega. Seljapadjandid on tarnitavad varuosana.

Juhised taaskasutuseks

Toode on mõeldud kliendile individuaalseks kasutamiseks.

Garantii

Kehtivad selle riigi seadussätted, kus toode osteti. Kui kahtlustate, et tegemist on garantiijuhtumiga, pöörduge otse toote müüja poole. Toode tuleb enne garantiile üle andmist puhastada. Kui SacroLoc kasutamisel ja hooldamisel ei ole järgitud juhiseid, võib see garantiid kahjulikult mõjutada või selle välistada. Garantii on välistatud, kui:

- Kasutamine ei vasta näidustustele
- Ei ole järgitud spetsialistide nõuandeid
- Toodet on omavoliliselt muudetud

Teatamise kohustus

Tulenevalt riigi poolt kehtestatud õigusaktidest on Teil kohustus viivitamatult teavitada nii tootjat kui ka pädevat ametiasutust mis tahes tõsisest juhtumist seoses selle meditsiinitoote kasutamisega. Meie kontaktandmed leiate selle brošüüri tagaküljelt.

Jäätmekäitlus

Toode kuulub käitlemisele kasutuskoha riigis kehtivate eeskirjade kohaselt.

Spetsialist²

Üldised nõuanded

Kontrollige SacroLoci optimaalset ja keha eripära arvestavat sobivust. Seljapatjade asend tuleb kohandada vaagnani nii, et nende sisemine süvend toetuks ülemistele tagumistele niudeluuogadele. Harjutage koos patsiendiga õiget paigaldamist. Toodet ei tohi mitteotstarbekohaselt muuta. Muidu võivad toote omadused halveneda ja garantii kaotab kehtivuse.

Materjali koostis

Polüamiid (PA), Termoplastiline elastomeer (SEBS), Polüuretaan (PUR), Elastaan (EL), Polüpropüleen (PP), Polüester (PES), Polüoksümetüleen (POM), Puuvill (CO), Polüetüleen (PE), Akrülaatliim (A)

MDI – Medical Device (Meditsiineseade)

UDI – Andmemaatriksi kvalifitseerija UDI-na

Teave seisuga: 2022-04

^{*}Isikukahjude (vigastusoht, tervise- ja õnnetuserisk) ja võimaliku materiaalse kahju (toote kahjustus) riskide juhis.

¹Ortoos = ortopeediline abivahend jäsemete või torso stabiliseerimiseks, koormuse vähendamiseks, fikseerimiseks, suunamiseks või korrigeerimiseks

²Spetsialist on isik, kellel on riigis kehtivate õigusaktide järgi õigus kohandada ja juhendada ortooside kasutamist.

lv latviešu

Cienijamā kliente, godātais klient!

Liels paldies, ka izvēlējāties Bauerfeind izstrādājumu.

Mēs katru dienu strādājam, lai uzlabotu mūsu izstrādājumu medicīnisko efektivitāti, jo jūsu veselība mums ir svarīga. Lūdzu, rūpīgi izlasiet un ievērojiet šo **lietošanas instrukciju**. Sūdzību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu vai jautājiet specializētajā tirdzniecības vietā.

Mērķis

SacroLoc ir medicīnas produkts. Tā ir ortoze¹ iegurņa stabilizēšanai, kā arī mērķtiecīgai krustu kaula un zarnkaula locītavu atslodzei.

Indikācijas

- Krustu kaula un zarnkaula locītavas saslimšanas (SI locītavu sindroms, SI locītavu osteoartrīts, SI locītavu nestabilitāte)
- Iegurņa justas daļas nestabilitāte, piem., simfizes diastāze un valģijums
- Krustu kaula un zarnkaula locītavas blokāde (akūta un profilak-tiska)
- Mialģija un tendinopātija iegurņa daļā
- Strukturālie traucējumi pēc spondilodēzes (pārejā L5–S1)
- Konservatīva ārstēšana pēc iegurņa lūzumiem

Risks izstrādājuma lietošanas laikā

Uzmanību*

Lūdzu, ievērojiet šajā lietošanas instrukcijā noteiktās prasības un speciālistu norādes.

- SacroLoc drīkst lietot vienīgi saskaņā ar šīs lietošanas pamācības norādījumiem un minētajās izmantošanas vietās (attiecīgām ķermeņa daļām).
- Nepareizas izmantošanas gadījumā vai, izmantojot to citiem nolūkiem, izstrādājuma garantija nav spēkā.
- Ortozes¹ pielāgošana un izmantošana grūtniecības laikā ir jāizvērtē atsevišķi katrā individuālā gadījumā. Ja ortozes¹ nēsāšana grūtniecības laikā šķiet neērta, nepieciešams pārbaudīt izmēra iestatījumus un uzlikšanas veidu, kā arī jākonsultējas ar ārstu un, ja nepieciešams, jāpārtrauc tās lietošana. Nav zināmas blakusparādības, kas ietekmētu māti un augli.
- Instruk tāžu drīkst veikt vienīgi kvalificēts personāls².
- Par kombinēšanu ar citiem izstrādājumiem, piem., kompresijas terapijas ietvaros (ar ārstnieciskajām kompresijas zeķēm), vispirms konsultējieties ar savu ārstu.
- Valkājiet SacroLoc vīrs T-krekla vai apakškrekla.
- Ja jūsu sūdzības pastiprinās vai konstatējat neparastas ķermeņa pārmaiņas, nekavējoties informējiet savu ārstu.
- Sargājiet šo izstrādājumu no saskares ar taukus un skābi saturošiem līdzekļiem, ziedēm un losjoniem.
- Līdz šim nav zināmas blakusparādības, kas ietekmētu visu ķermeni. Izstrādājums jāuzliek un jānēsā pareizi. SacroLoc nevajadzētu uzlikt pārāk cieši, jo tas var radīt lokālu spiediena sajūtu. Retos gadījumos pastāv iespēja nospiest asinsvadu un nervus.

Kontrindikācijas

Nav zināms, ka pastāvētu medicīniski nozīmīga hipersensitivitāte. Ar tālāk minētām klīniskām izpausmēm šāda veida palīglīdzekļa uzlikšana un nēsāšana ir atļauta vienīgi pēc konsultācijas ar ārstu:

- ādas slimības / traumas tajā ķermeņa daļā, kurā tiek nēsāts atbalsts, jo īpaši, ja ir iekaisuma pazīmes; piepalcantas rētas ar uztūkumu, apsārtumu un pārkāršanas pazīmēm;
- jutīguma un kustību traucējumi, piem., cukurslimības gadījumā (Diabetes mellitus).

Lietošana

A – aizmugures polsteris (masāžas polsteris)

B – labās puses aizdare ar pirkstu atbalstu

C – kreisās puses aizdare ar pirkstu atbalstu

D – nospriegotāji

Uzlikšana

1 Novietojiet ortozi¹ iegurnim pa vidu tā, lai augšējā ortozes¹ mala nepārsniegtu krustu kaula augšējo malu, resp., nenosēgtu vidukli. **2** No augšas ievietojiet pirkstus tiem paredzētajā aizdares

pirkstu cilpā un vienmērīgi pavelciet aizdari uz priekšu. **➊** Pēc tam piespiediet kreisās puses aizdari pie vēdera un pārlieciet labās puses aizdari tik tālu pāri kreisajai pusei, līdz varat piestiprināt to uz kreisās daļas. Veicot piestiprināšanu, vispirms izņemiet pirkstus no kreisās un pēc tam no labās pirkstu cilpas. **➋** Ar abām rokām satveriet nospriegotājus un vienlaicīgi un vienmērīgi velciet tos uz priekšu, līdz ir panākts vēlamois nospriegojums (stabilizēšana).

➌ Pēc tam piestipriniet abus nospriegotājus cieši vienu pie otra uz lielās aizdares.

Kopšanas pamācība

Norādījums: SacroLoc nedrīkst pakļaut tiešai karstuma iedarbībai (piemēram, no sildītāja, saules, atstājot automašīnā)! Tādējādi var sabojāt materiālu, samazinot SacroLoc efektivitāti.

SacroLoc iestrūta etiķete ar informāciju par izstrādājuma nosaukumu, izmēru, ražotāju, mazgāšanas norādēm un CE marķējumu atrodas adījuma iekšpusē.

Nepieciešamības gadījumā SacroLoc ortozi var mazgāt ar rokām, izmantojot saudzējošu mazgāšanas līdzekli. Ļaujiet ortozei¹ nožūt dabiski.

Šī izstrādājuma lietošanai paredzētās ķermeņa daļas

Atbilstoši indikācijām (iegurnis, krustu kaulu locītavas).

Skatīt mērķi.

Apkopes norādījumi

Ja izstrādājums tiek pareizi lietots un kopts, tam nav nepieciešama īpaša apkope.

Salikšanas un montāžas pamācība

SacroLoc tiek piegādāts standarta izmērā, gatavs lietošanai.

Tehniskie dati / parametri

SacroLoc sastāv no adījuma ar stingriem nospriegotājiem un nopemamiem aizmugures polsteriem. Aizmugures polsteri nav atdalāmi no frotē pārvalka. Aizmugures polsterus iespējams iegādāties kā rezerves daļas.

Norādījumi par atkārtotu izmantošanu

Izstrādājums ir paredzēts individuālai lietošanai tikai vienam pacientam(–tei).

Garantija

Ir spēkā tās valsts tiesību akti, kurā izstrādājums ir iegādāts. Ja Jūsprāt runa ir par garantijas gadījumu, vispirms sazinieties ar uzņēmumu, no kura Jūs iegādājāties izstrādājumu. Pirms garantijas gadījuma pieteikuma izmazgājiet izstrādājumu. Neievērojot SacroLoc lietošanas un kopšanas norādes, garantijas prasības var mainīties vai tikt atceltas.

Garantijas prasības tiek atceltas šādos gadījumos:

- Izstrādājums netiek lietots atbilstoši indikācijām
- Neievērojot speciālistu instrukcijas
- Pašrocīgi izmainot izstrādājumu

Pienākums ziņot

Pamatojoties uz reģionālajiem juridiskajiem nosacījumiem jums ir nekavējoties jāziņo ražotājam un arī atbildīgajai iestādei par šī izstrādājuma lietošanas apjoma palielināšanos. Mūsu kontaktdatus atradīsiet šīs brošūras aizmugurē.

Likvidēšana

Likvidējiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Kvalificēts personāls²

Vispārīgi norādījumi

Pēc pirmās aprūpes pārbaudiet, vai SacroLoc pieguļ optimāli un atbilstoši ķermeņa individuālajām īpatnībām.

Aizmugures polstera pozīcija ir jāpielāgo iegurnim tā, lai polstera iekšējie padziļinājumi piegultu aizmugurējā mugurējā zarnu kaula smailei.

Parādiet pacientam, kā ortoze pareizi jāuzliek.

Izstrādājumam nav atļauts veikt neatbilstošas izmaiņas. Pretējā gadījumā var tikt ietekmēta izstrādājuma efektivitāte, līdz ar to nebūs spēkā izstrādājuma garantija.

Materiāla sastāvs

Poliamīds (PA), Termoplastiskais elastomērs (SEBS), Poliuretāns (PUR), Elastāns (EL), Polipropilēns (PP), Poliesteris (PES), Polioksimetilēns (POM), Kokvilna (CO), Polietilēns (PE), Akriļlāta līme (A)

MD – Medical Device (Medicīniska ierīce)
UDI – Datu matricas apzīmētājs, UDI

Informācija sagatavota: 2022-04	
[*] Norāda uz miesas bojājumu (traumu, veselības un negadījumu risku) vai materiālu zaudējumu (izstrādājuma bojājumu) risku. ¹ Ortoze = ortopēdisks palīg līdzeklis locekļu vai ķermeņa stabilizācijai, atslagošanai, turēšanai miera stāvoklī, korekcijai. ² Kvalificēts personāls ir jebkura persona, kura saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošo likumdošanu ir pilnvarota veikt ortožu pielāgošanu un sniegt norādes par ortožu lietošanu.	

lt lietuvių

Mielas pirkėjau,

dēkojame, kad pasirinkote Bauerfeind gaminį.

Kiekvieną dieną tobuliname savo gaminių gydomąjį poveikį, nes mums rūpi Jūsų sveikata. Atidžiai perskaitykite ir laikykitės šios **naudojimo instrukcijos**. Jei kyla klausimų, kreipkitės į gydytoją arba specializuotą paduotuvej.

Paskirtis

SacroLoc yra medicininės paskirties gaminys. Jis yra ortezas¹, skirtas dubeniui stabilizuoti ir kryžmeninio klubo sąnarių apkrovai sumažinti.

Indikacijos

- Kryžmeninio klubo sąnario ligos (KKS sindromas, KKS osteoartri-tas, KKS nestabilumas)
- Dubens lanko nestabilumas, pvz., gaktinės sąvaržos plyšimas ir išsiskyrimas
- Dubens / kryžmens sąnario blokavimas (ūmus ir profilaktinis)
- Raumenų ir sausgyslių skausmai dubens srityje
- Struktūrinis pažeidimas po spondilodezės (perėjime L5–S1)
- Konservatyvus gydymas po dubens lūžių

Naudojimo rizika

⚠ **Atsargiai***

Tiksliai laikykitės šios naudojimo instrukcijos ir kvalifikuoto personalo nurodymų.

- SacroLoc galima mėvėti tik laikintas šios naudojimo instrukcijos nurodymų ir tik pagal nurodytą produkto paskirtį (naudojimo vietą).
- Jei produktas netinkamai naudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, gamintojas atsakomybės neprisiima.
- Nėštumo metu dėl ortoze¹ tinkamumo ir naudojimo kiekvienu konkrečiu atveju reikia pasitarti su gydytoju. Jei nėštumo metu nešioti ortezą¹ būtų nepatogu, reikėtų patikrinti dydžio nuostatas ir uždėjimo būdą, pasitarti su gydytoju ir tam tikrais atvejais toliau jo nebenaudoti. Šalutinio poveikio motinai ir vaisiui nepastebėta.
- Instruktuoti gali tik specialistas².
- Norėdami naudoti kartu su kitais produktais, pavyzdžiui, atliekant kompresinę terapiją (gydomosios kompresinės kojinės), pasitarkite su Jus prižiūrinčiu gydytoju.
- Užsimaukite SacroLoc ant marškinėlių arba ant apatinių baltinių.
- Jei pradėtumėte jaustis pasččiau arba pastebėtumėte neįprastų kūno pakitimų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Saugokite produktą, kad jis nesilieštų su priemonėmis, kurių sudėtyje yra riebalų ir rūgščių, su kremais ir losjonais.
- Šalutinio poveikio visam organizmui nebuvo pastebėta. Būtina sąlyga yra tinkamas naudojimas / užsimovimas. Per stipriai neužveržkite SacroLoc, nes kitaip galimas vietinis spaudimas. Retais atvejais gali būti užspaustos kraujagyslės ir nervai.

Kontraindikacijos

- Klinikinės reikšmės padidėjusio jautrumo atvejų nebuvo pastebėta. Toliau išvardytų sindromų atvejais, tokią pagalbinių priemonę užsimauti ir mėvėti galima tik pasitarus su gydytoju:
- odos ligos / sužalojimai tam tikrose kūno dalyse, ypač uždegiminės reakcijos, taip pat ištinę, paraudę ir kaistantys randai;
- jautrumo ir judėjimo sutrikimai, pavyzdžiui, sergant cukriniu diabetu (Diabetes mellitus);

Naudojimo sritys

A – nugaros paminkštinimas (masažuojanti pagalvėlė)

B – dešinei rankai skirta kišenėlė su pirštų laikikliu

C – kairei rankai skirta kišenėlė su pirštų laikikliu

D – įtempimo dirželiai

Kaip užsimauti

- Uždėkite ortezą¹ ant centrinės dubens srities taip, kad viršutinis ortoze¹ kraštas būtų ne aukščiau už viršutinį didžiosios sėdimosios įlankos kraštą, t. y. jis neturi siekti liemens.
- Dabar įkiškite pirštus į tam skirtas kišenes, tvirtai apsijuoskite diržu. Priekinėje dalyje sukljuokite lipdukus.
- Prie pilvo prispauskite kairiąją įtvaro dalį ir ant jos uždėkite bei pritvirtinkite dešiniąją įtvaro dalį. Pritvirtinę įtvara, iš pradžių ištraukite iš kišenėlių kairiosios rankos pirštus, po to – dešiniosios.
- Dabar paimkite už tamprių dirželių ir tempkite juos į priekį, kol pajusite reikiamą stabilizaciją.
- Pritvirtinkite abu tamprius dirželius vieną šalia kito. Jie prilipdomi ant didžiojo diržo.

Priežiūros instrukcija

Nurodymas: saugokite SacroLoc nuo tiesioginio karščio (pvz., radiatoriaus, saulės spindulių, nelaikykite automobilyje)! Karštis gali pažeisti medžiagą. Tai gali pakenkti SacroLoc efektyvumui.

SacroLoc etiketė, kurioje nurodytas produkto pavadinimas, dydis, gamintojas, skalbimo instrukcija ir CE ženklas yra vidinėje mezginio dalyje.

Prireikus SacroLoc galite išskalbti rankomis, naudodami švelnią skalbimo priemonę. Tada leiskite ortezui¹ išdžiūti ore.

Naudojimo vieta

Pagal indikacijas (dubens / kryžmens sąnariai).

Žr. paskirtį.

Techninės priežiūros nurodymai

Tinkamai naudojant ir prižiūrint, techninės priežiūros produktui atlikti nereikia.

Surinkimo ir montavimo instrukcija

SacroLoc pristatomas standartinio dydžio, paruoštas naudoti.

Techniniai duomenys / parametrai

SacroLoc sudaro mezginy su įtempimo dirželiais ir nuimamais nugaros paminkštinimais. Nugaros paminkštinimai neatskiriamai sujungti su frotinu apvalkalu. Nugaros paminkštinimai pristatomi kaip atsarginė dalis.

Nurodymai dėl pakartotinio naudojimo

Gaminys skirtas individualiam vieno paciento gydymui.

Garantija

Gatijoja tos šalies, kurioje gaminys pirktas, įstatymai. Jei manote, kad gaminiiui konkrečiu atveju galėtų būti taikoma garantija, pirmiausiai kreipkitės į tą asmenį, iš kurio gaminį įsigijote. Prieš pateikiant reikalavimą dėl garantijos, gaminį reikia išvalyti. Jei nesilaikoma bjoynz back support naudojimo ir priežiūros instrukcijos nurodymų, garantija gali būti apribota arba nustoti galioti. Garantija negalioja, kai:

- Naudojama neatsižvelgiant į indikacijas
- Nesilaikoma kvalifikuoto personalo instrukcijos
- Savavališkai modifikuojamas gaminys

Pareiga pranešti

Pagal vietinius teisinius potvarkius esate įpareigoti nedelsiant informuoti gamintoją ir atsakingai institucijai apie bet kokio pobūdžio incidentą, įvykusį naudojant šį medicininės paskirties produktą. Kontaktiniai duomenys pateikti šio lankstinuko paskutiniame puslapyje.

Šalinimas

Produktą galite pašalinti pagal šalyje galiojančius teisinius nurodymus.

Specialistai²

Bendrieji nurodymai

Apžiūrint pirmą kartą, patikrinkite, ar SacroLoc padėtis yra optimali ir individualiai pritaikyta.

Nugaros įdėko padėtis turi būti priderinta prie dubens taip, kad jis savo vidinėmis įdubomis remtųsi į klubų viršutinę dalį iš nugaros pusės.

Išmokykite pacientą teisingai užsimauti.

Draudžiama netinkamai keisti produktą. Nepaisant šių nurodymų gali būti pakenkta produkto efektyvumui ir gamintojas tokiais atvejais neprisiima atsakomybės.

Medžiagos sudėtis

Poliamidas (PA), Termoplastinis elastomeras (SEBS), Poliuretanas (PUR), Elastanas (EL), Polipropilenas (PP), Poliesteris (PES), Polioksimetilenas (POM), Medvilnė (CO), Polietilenas (PE), Akriolato klijai (A)

MD – Medical Device (Medicininis prietaisas)
UDI – Duomenų matricos identifikatorius kaip UDI

Informacija parengta: 2022-04	
[*] Nuoroda dėl pavojaus žmonėms (sužalojimo pavojus, žalos sveikatai ir nelaimingo atsitikimo rizika) ir materialinių nuostolių (produkto sugadinimas). ¹ Ortezas – ortopedinė pagalbinių priemonė galūnėms arba liemeniui stabilizuoti, apkrovai sumažinti, ramybės būsenai nustatyti, taip pat nukreipti ir koreguoti ² Specialistas – bet kuris asmuo, kuriam pagal jūsų šalyje galiojančias taisykles suteikta teisė pritaikyti ortezus ir instruktuoti, kaip juos naudoti.	

バンドを腹部に押し付け、右固定バンドで左固定バンドを覆うようにして、右固定バンドを左固定バンドに重ね、ベルクロファスナーで貼り合わせます。指は、最初に左のフィンガーポケット、次に右のフィンガーポケットの順で抜きます。**❷** 指を抜いたら、左右のテンションストラップをそれぞれ左右の手に取り、装具が適度に安定するまで、両側のテンションストラップを左右均等な力で同時に前方へ引きます。**❸** 続いて、左右両側のテンションストラップを大きいベルクロファスナーに、クロス状になるよう隙間なく貼り付けます。

お手入れ方法

ご注意いただきたいこと: SacroLoc は、高温の熱 (例:暖房器具、直射日光、車内の保管など) に直接さらさないでください! 熱によって、素材を傷める原因になることがあります。素材が傷めば、SacroLoc の機能を低下するおそれがあります。
編み地の内側にSacroLocのタグが縫い込んであり、そのタグに製品名、サイズ、メーカー名、お洗濯の方法、CEマーキングの情報が記載されています。
必要に応じてSacroLocをマイルドな洗剤で手洗いがすることができます。拭いた後は、矯正装具¹を自然乾燥してください。

装着箇所

適応症に準じる (骨盤、仙腸関節)

適応症例は、用途の欄をご覧ください。

装着箇所

適応症に準じる (骨盤、仙腸関節)

適応症例は、用途の欄をご覧ください。

お手入れにあたっての注意:

この製品は、お取り扱いとお手入れを適切に行えば、実用上、メンテナンスの必要はありません。

組立・取付の手順

SacroLocは標準サイズの製品をすぐにご使用いただける状態でお手元にお届け致します。

テクニカルデータ/パラメータ

SacroLocは、一体ものの編み地に、固定用テンションストラップと取り外し可能な背中パッドが付属する構成です。この背中パッドは、テリクロス地のカバーと一体になっておりますので、取り外しはできません。また、背中パッドは交換用のものをご用意しております。

再使用にあたっての注意

本製品は、お一人の患者様のみにご使用いただく設計となっております。

保証

保証につきましては、この装具をお買い求めいただいた場所の国が定める法令の規定が適用されます。保証の適用対象となるとお考えの場合はまず、本製品をお買い求めいただいた際の代理店等へ直接、お問合せください。本製品は保証の届け出の前にご洗浄ください。SacroLocの取り扱いおよびお手入れに関する指示が守られていない場合、保証が制限されたり、保証の対象外とされる可能性があります。

- 次の場合は保証の対象となりません。
- 適用症例に該当しない使用
- 専門技能者の指示に従わない使用
- 独断による製品の改造

届出義務

地域の法規制により、本医療機器使用の際に重大な問題が生じた場合は、製造元および管轄当局の両方に遅滞なく届け出る義務があります。当社の連絡先はこのパンフレットの裏面に記載されています。

廃棄

この製品は、お住まいの国の法律が定める規定に則って、廃棄処分いただけます。

医療従事者の方へ

一般的な注意

SacroLocは、初めて装着される際には、最適な状態で適合しているかどうか確認してください。
背中パッドは、その内側の凹みがとともに上部腸骨棘に合わるよう、骨盤上の位置で調整する必要があります。
患者様に正しくご装着ください。

日本語 ja

お客様各位、

Bauerfeind 製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございますでした。

当社は日々、当社製品の医療的効能改善のために鋭意努力しております。というのも、お客様の健康は当社にとって重大関心事からです。この取扱説明書を読んで記載の通りに従ってください。ご質問がある場合は、かかりつけの医師または、ご利用の専門店にご相談ください。

用途

SacroLocは医療製品です。本製品は、骨盤の安定および仙腸関節の的確な負荷軽減のための矯正器具¹です。

適応症例

- 仙腸関節疾患（仙腸関節症状、仙腸関節症、仙腸関節不安定症）
- 骨盤帯の不安定性、例えば恥骨結合の離開および緩み
- 仙腸関節障害（急性および予防）
- 骨盤領域の筋肉および腱の痛み
- 腰椎固定術後の組織障害（L5ーS1の過渡期）
- 骨盤骨折後の保存的治療

ご使用によるリスク

- △ 使用上のご注意**
本取扱説明書に記載された注意事項および専門スタッフの指示を厳格に従ってください。
- SacroLocは、必ず、この使用説明書の指示事項に従い、記載してある使用部位（装着箇所）以外には、ご使用にならないでください。
- 不適切な使用、または用途外の使用をされたときは、製造物責任にかかわる責任を負いかねます。
- 妊娠中には一貫して矯正装具¹の適合性と使い方について医師に個別の事情に応じてご相談ください。この矯正装具¹の着用が妊娠期間中に不快に感じた場合、サイズ調整と装着技術を確認し、医師に相談して場合によってはその後の使用をお控えください。母体や胎児への副作用があることは知られていません。
- 指導は専門技能者²の方が行ってください。
- その他の製品と併用してご使用になる場合には、(例:弾性ストッキング等の圧迫療法) 事前にかかりつけの医師にご相談ください。
- SacroLocはTシャツや下着の上から装着して下さい。
- 痛みが増したり、身体の異常な変化に気づいたら、必ず担当の医師に診てもらってください。
- この製品は、薬品、軟膏、ローションで、油脂や酸を含むものと接触させないようしてください。
- 身体に影響が及ぶ副作用につきましては、現在に至るまで、報告されておりません。ただし、それには適切にご使用、ご装着いただくことが前提です。
- SacroLocは過度に締め付けないで下さい。局部的な圧迫症状が生じる恐れが
- あります。まれなケースですが、血管や神経の狭窄が起こるときがあります。

禁忌症例

- 疾病に起因する過敏症につきましては、現在に至るまで、報告されておりませ
- ん。疾病のパターンが以下に挙げられるような場合、こうした補助具の装着および着用は、必ずかかりつけの医師とご相談の上、お知らせ下さい。
- 皮膚障害または皮膚の損傷 (特に炎症が認められる場合、腫れ、発赤、高
- の発熱を伴った隆起瘢痕が認められる場合)
- 感覚障害、運動障害 (例:糖尿病)

適用範囲

- A ー 背中パッド(マッサージパッド)
- B ー 右固定バンド、フィンガーポケット付き
- C ー 左固定バンド、フィンガーポケット付き
- D ー テンションストラップ

装着

❶ 装具¹の先端が腸骨稜の上端を超えない或いはウエストに届かないようにして、装具¹を腰の中央に当てます。
❷ 左右の各固定バンドに付いた専用のフィンガーポケットに数本の指を挿入し、両方のファスナーバンドを左右均等に前方へ引きます。
❸ その状態で、左固定

he

לקוחות יקרים,

אנו מודים לכם על בחירת מוצר של חברת Bauerfeind.

אנו פועלים כיום כדי לשפר את היעילות הרפואית של המוצרים שלנו, כי בריאותכם חשובה לנו. נג לקרוא בעיון **הוראות שימוש** אלו ולהישמע היטב לנאמך בהן. אם יש לכם שאלות כלהלן פנו להופא או לחנות שבה רכשתם מוצר זה.

יעוד המוצר

SacroLoc הינו מוצר רפואי. המוצר הוא סד¹ תומך גב שמועד לייצב את אגן הירכיים ולהקלה ממוקדת של המפרק העצי-כסלי².

התוויות

- כאבים שמקורם במפרק העצי-כסלי² (כאבי גב תחתון שמקורם במפרק העצי-כסלי², דלקות יונויות במפרק העצי-כסלי² - SacroArthrosis, אי יציבות במפרק העצי-כסלי²)
- אי יציבות עצמות החיק, כגון תחושת היפרדות והתרופפות
- חסימה של המפרק העצי-כסלי² (תמורה שמצריכה טיפול מונע)
- כאבי שרירים ופגיעות בגידים של אגן הירכיים
- עוות מבני לאחר איחוי של עמוד השדרה (בין החוליות S1 – L5)
- טיפול שמרני עקב שברים באגן

סיכוני יישום

⚠️ זהירות

שים לב למפרט בהוראות שימוש אלה ולהנחיות אנשי המקצוע.

- יש להשתמש ב-SacroLoc רק בהתאם להוראות השימוש במדריך זה ולתחומי שימוש (אזורי הגוף) המצוינים בו.
- האחריות שניתנה למוצר לא תחול אם נעשה בו שימוש לא נכון או שאינו בהתאם ליעוד המוצר.
- התאמה ושימוש בחמרה1 במהלך היריון מצריכים אישור של רופא עבור כל מקרה ומקרה. אם לבשת החמרה1 במהלך היריון יוצרת אי נעימות, יש לבחון התאמת הגודל וטכניקת הלבשה, להתייעץ עם הרופא ובמידת הצורך, להפסיק את השימוש. תופעות לוואי העשויות להיגרם לאם או לעובר לא דוחו.
- רק איש מקצוע² רשאי להדריך את המטופל.
- אין להשתמש במוצר זה ביחד עם מוצרים אחרים, כגון טיפול באמצעי לחץ (גרבי לחץ), ללא התייעצות עם הרופא המטפל.
- לבשו את SacroLoc על חולצת טי או על גופייה.
- כאשר יש החמרה בכאבים או שאתם מבחינים בשניונים חריגים בגופכם, פנו מיד להופא שלכם.
- הקפידו להרחיק את המוצר מחומרים שוניםים וחומציים, קרמים ומשחות. תופעות לוואי המשפיעות על הגוף כולו לא דוחו עד כה. יש ללבוש ולהשׂ תמש במוצר בהתאם להוראות. אין להדק יותר מדי את חגורת ה-SacroLoc על הגוף בעת הלבשה. הדבר עלול לגרום לסמיני לחץ מקומיים. במקרים נדירים, הידוק יתר עלול לגרום להצרה של כלי דם ועצבים.

התוויות נגד

- תגובות רגישויות יתר בעלות משמעות קלינית לא דוחו עד כה. במקרים הבאים השימוש ואופן היישום של המוצר מותר רק לאחר התייעצות עם הרופא שלך:
- מחלות עור / פצעים בחלקי הגוף הנתמכים, במיוחד במצבים דלקתיים, וכן באזור עלקתי המראה סימני נפיחות, אדמומיות וחום
- הפרעות רגישות והפרעות תנועה כגון סוכרת (Diabetes mellitus)

הערות יישום

- A – כרית גב (כרית עיסוי)
- B – החצי הימני של תפס הסגירה עם כיס לאצבעות
- C – החצי השמאלי של תפס הסגירה עם כיס לאצבעות
- D – רצועת משיכה

לבישה

- ❶** מקמו את החמרה¹ במרכז האגן כך שהשוליים העליונים של החמרה¹ לא יעברו את שולי עצם הכסל, או עד ששולי החמרה העליונים יגיעו למותניים.
- ❷** החליקו את האצבעות אל הכיס המתאים להן בשני חלקי התפס ומשכו את התפס במידה שווה קדימה. הדקו את החצי השמאלי של התפס אל הבטן ומשכו את החצי הימני על השמאל¹ עד שתוכלו להצמידו מבורת הצמ² דגם. במהלך ההצמדה הוציאו תחילה את האצבעות מהכיס השמאלי ואחר את האצבעות מהכיס הימני. **❹** החזיקו את שתי רצועות המשיכה בשתי הידיים ומשכו אותן קדימה במידה שווה, עד להשגת המתח (הייצוב) הרצוי.
- ❺** לבסוף הצמידו את שתי רצועות המשיכה זו ליד זו על התפס הגדול.

הוראות ניקוי

הערה: יש להימנע מחשיפה של SacroLoc למקור חום ישיר (כגון גוף חימום, קרינת שמש, תא האחסון ברכב)! החומר שממנו עשוי המוצר עלול להיזקק. יעילות ה-SacroLoc עלולה להשתבש.

ענין בהנחיות הניקוי המופיעות בתווית שעל גבי ה-SacroLoc. התווית נמצאת במשטח הפנימי של הארגי.

במקרה הצורך ניתן לנקות את ביד SacroLoc, בעזרת סבון כביסה עדין. יש לדאוג לייבש את הסד¹ על ידי אוויר.

אופן השימוש

בהתאם להתוויות (אגן, מפרק עצי-כסלי²).

ראה, "ייעוד המוצר".

הוראות תחזוקה

בטיפול ושימוש נאותים, המוצר כמעט ואינו דורש תחזוקה.

הוראות הרכבה והתקנה

ה-SacroLoc מסופקת בגודל סטנדרטי ומוכנה לשימוש.

נתונים/ פרמטרים טכניים

SacroLoc מורכב מארץ עם רצועת משיכה קבועות וכריות גב הניתנות להסרה. כריות הגב עטופות בבד מגבת שאינו ניתן להסרה. ניתן לרכוש כריות גב להחלפה.

הערות לשימוש חוזר

המוצר מיועד לטיפול אישי במטופל או במטופלת.

אחריות

על המוצר חלות האחריות החוק של המדינה בה נרכש המוצר. בכל מקרה בהקשר של האחריות למוצר, יש לפנות תחילה למשווק שממנו נרכש המוצר. יש לנקות את המוצר לפני הבאתו לצורך מימוש האחריות. אי מילוי אחר הוראות הניקיון והאחזקה של SacroLoc, עלול לפגוע באחריות או לבטל אותה. האחריות לא תקפה במקרים הבאים:

- שימוש שאינו על פי ההנחיות
- אי מילוי הוראות איש המקצוע
- שינוי בלתי מורשה במוצר

חובת דיווח

בשל חקיקה אזורית, הנכם נדרשים לדווח ללא דיחוי על כל אירוע חמור הקשור למוצר רפואי זה הן ליצרן והן לרשות המוסמכת. פרטי הקשר שלנו נמצאים בחלק האחורי של עלון זה.

סילוק

ניתן להשליך את המוצר בהתאם לדרישות החוק המקומיות.

איש מקצוע²

מידע כללי

בחנו לאחר הלבשה הראשונה שה-SacroLoc יושבת בצורה המיטבית בהתאם לגוף. יש להתאים את מיקום כרית הגב לאגן כך שתתנוע עם השקע הפנימי על קוצי הכסל האחוריים העליונים. תרגל מעט תקין על ידי המטופל.

אין לבצע שינוי חריג במוצר. אי הקפדה על ההוראות עלולה לפגוע בביצועי המוצר, ולכן האחריות לא תחול במקרה זה.

הרכב החומרים

פוליאמיד (PA), חומר אלסטי תרמופלסטי (SEBS), פוליאוריתן (PUR), ספנדקס (EL), פוליפרופילן (PP), פוליאקסטר (PES), פוליאוקסימתילן (POM), כותנה (CO), פוליאיתילן (PE), דבק אקריליט (A)

^{MD} Medical Device (מכשור רפואי)

^{UDI} מנדיר של DataMatrix כ-UDI

תאריך עדכון המידע: 2021-04-04

^{*} הערה בנוגע לסיכון של פציעה אישית (פציעה, סיכון בריאותי ותאונות) ונזק (נזק למוצר).

¹ סד = אמצעי עזר אורתופדי לייצוב, הפחתת עומס, קיבוע, תמיכה או תיקון של הגפיים או של הגו

² איש מקצוע הוא כל אדם אשר מורשה ם בכפוף לתקנות התקפות לגביו במדינה הרלוונטית ם לבצע התאמתו של סדים ולתת הנחיות בנוגע לשימוש בהם.

عميلنا العزيز، عميلتنا العزيزة،

شكرًا جزيلًا لاختيارك أحد منتجات Bauerfeind.

نحن نعمل يومياً على تحسين الفعالية الطبية لمنتجاتنا، وذلك لأن صحتك عزيزة على قلوبنا. يُرجى قراءة ومراعاة **إرشادات الاستعمال** هذه بعناية. إذا كانت لديك أية أسئلة يرجى التوجه إلى طبيبك أو إلى المتجر المتخصص الذي اشتريته منه المنتج .

الغرض من الاستعمال

SacroLoc هو منتج طبي. وهو عبارة عن جهاز تقيمي¹ لتعزيز الاستقرار في منطقة الحوض وتخفيف الضغط عن المفاصل العجزية الحرقفية.

دواعي الاستعمال

•أمراض المفاصل العجزية الحرقفية (متلازمة أو التهاب أو عدم استقرار المفاصل الموصلة بين الجزء الخلفي من الحوض وأعلى عظم الفخذ)
•عدم استقرار حلقة الحوض، مثلا انقصال ارتفاق العانة وارتحانها
•انسداد المفاصل العجزية الحرقفية (الحاد والوقائي)
•آلام في العضلات والأوتار في منطقة الحوض
•اضطراب البنية المجهرية بعد التحام الفقار (في وصلة S1 – L5)
•العلاج المُحافظ بعد التعرض لكسور في الحوض

مخاطر الاستخدام

⚠️ احترس*

يُرجى مراعاة المواصفات الواردة في إرشادات الاستعمال هذه والتعليمات من الموظفين المتخصصين جيدًا.

- لا يجب ارتداء مقوام SacroLoc إلا طبقًا لإرشادات الاستعمال وفي مجالات الاستخدام التي تم ذكرها.
- لا تتحمل الشركة المنتجة أية مسؤولية عن المنتج في حالة استخدامه بشكل خاطئ أو في غير الغرض المخصص له.
- يجب التوافق على صلاحية جهاز التقييم¹ واستخدامه أثناء فترة الحمل في كل حالة على حدة. وإذا ما كان ارتداء الجهاز التقييمي¹ في مرحلة الحمل غير مريح، فلا بد من فحص إعدادات الحجم وتقنية الربط، والتشاور مع الطبيب، وصرف النظر عن مواصلة استخدامه حين الضرورة. ولا تعرف الآثار الجانبية الناتجة على الأم والجنين.
- لا تتم عملية التدريب على الاستخدام إلا بواسطة فنيين متخصصين ومدربين².
- ينبغي عدم استعمال المنتج مع أية منتجات أخرى، على سبيل المثال في إطار العلاج بالضغط (الجوارب الضاغطة) إلا بعد استشارة الطبيب المعالج أولاً.

- قم بارتداء مقوام SacroLoc على القميص قصير الكمين الخاص بك أو القميص الداخلي.
- في حالة زيادة شكوك أو إذا لاحظت أن هناك تغيرات غير عادية طرأت على جسمك، يرجى زيارة طبيبك على الفور.
- يجب عدم ترك المنتج يلامس موادًا تحتوي على دهون أو أحماض أو مراهم أو غسول.
- من غير المعروف حتى الآن ما هي الآثار الجانبية التي تؤثر على الجسم بأكمله. يشترط الاستخدام/التثبيت بطريقة سليمة. يجب عدم ربط مقوام SacroLoc بإحكام، حيث أنه قد يؤدي إلى الشعور بالضغط في مكان الارتداء. وفي حالات نادرة يمكن حدوث انقباض في الأوعية الدموية والأعصاب.

موانع الاستعمال

لا توجد حتى الآن حساسيات مفردة معروفة تسبب الأمراض. في حالة وجود أي من الأمراض التالية، تجب استشارة الطبيب أولاً قبل تثبيت واستخدام هذا المنتج:

•الأمراض والإصابات الجلدية في ذلك الجزء من الجسم الذي يتم ارتداء الجهاز فيه، وخاصة عند وجود أعراض التهابات، وكذلك وجود آثار تدبات مع تورم واحمرار وارتفاع في درجة الحرارة
•اضطرابات الاحساس والحركة على سبيل المثال عند الإصابة بمرض السكري

إرشادات الاستخدام

- A - مسند للظهر (وسادة تدليك)
- B - النصف الأيمن من أداة التثبيت مع ماسكة للأصابع
- C - النصف الأيسر من أداة التثبيت مع ماسكة للأصابع
- D - أحزمة الضغط

الارتداء

❶ قم بضبط موضع جهاز التقييم¹ على الحوض بحيث أن ارتفاع الحافة العليا من الجهاز التقيومي¹ لا يتجاوز الطرف العلوي من الحافة العليا لعظم الفخذ، أي لا تتعدى الوسط.
❷ والأن ضع أصابعك من الأعلى في ماسكات الأصابع الموجودة في أداة التثبيت واسحب نصفي الأداة حول الجانب الأمامي من الجسم مع موازنة قوة الشد.
❸ اضغط الآن النصف الأيسر من لاصقة فيلكرو على البطن وضع النصف الأيمن من لاصقة فيلكرو فوق النصف الأيسر

פקي

이 제품은 해당 국가의 법규정에 맞게 폐기할 수 있습니다.

전문가2

일반 지침

최초 처치 후에 SacroLoc의 이상적이며 개별적인 맞춤 위치를 확인하십시오.
등 패드의 위치를 골반에 맞게 조정하여 안쪽 오목한 부분이 있는 상후 장골극에 안착되도록 해야 합니다.
환자와 함께 올바른 착용 위치를 익히십시오.
항부로 제품을 변경해서는 안 됩니다. 이 지침에 따르지 않을 경우 제품의 성능이 저해될 수 있으며 그로 인해 제품 보증에서 제외될 수 있습니다.

재료 성분

폴리아미드(PA), 열 가소성 엘라스토머(SEBS), 폴리우레탄(PUR), 스팽덱스(EL), 폴리프로필렌(PP), 폴리에스터(PES), 폴리옥시메틸렌(POM), 면(CO), 폴리에틸렌(PE), 아크릴산염-접착제(A)

MD – Medical Device (의료 기기)
UDI – DataMatrix의 UDI 식별자

작성일: 2022-04

*상해(부상, 건강상 위험 및 사고 위험) 혹은 경우에 따라 재산상 피해(제품 손상)에 관한 안내
1보조기 = 팔다리나 몸통의 기능을 안정, 지지, 고정, 유도 또는 교정하기 위한 정형외과적 보조 장치
2전문가란 해당 국내 법률의 규정에 따라 정형외과용 인공 보장구를 맞춰주고 사용법을 알려줄 수 있는 권한을 부여받은 사람을 말합니다.

금기사항

임상적으로 유의미한 과민 반응은 지금까지 발견되지 않았습니다.
다음과 같은 증상을 보이는 경우에는 반드시 담당 의사와 충분히 상의한 후에 이러한 보조기를 사용해야 합니다.
•착용 부위에 피부병이 있거나 피부에 상처가 있는 경우, 특히 염증이 발생하거나 흉터가 터져 벌겋게 부어 오르고 열이 나는 경우
•감각 장애나 동작에 장애가 있는 경우, 예를 들어 당뇨병(Diabetes mellitus)

사용 방법

A – 등 패드(마사지 쿠션)
B – 손가락 포켓이 있는 오른쪽 조임 장치
B – 손가락 포켓이 있는 왼쪽 조임 장치
D – 신축성 스트랩

착용

❶ 보조기¹를 골반 중앙에 배치하여, 보조기¹의 위쪽 가장자리가 장골 능선 위쪽 가장자리를 넘지 않거나 허리 아래에 위치하도록 합니다.
❷ 이제 조임 장치에 있는 손가락 포켓으로 위에서부터 손가락을 삽입하여 앞으로 조임 장치를 고르게 당기십시오.
❸ 왼쪽 조임 장치 반쪽을 배 쪽으로 누르면서 벨크로에 고정될 때까지 오른쪽 조임 장치 반쪽을 왼쪽 위에 두십시오. 고정할 때 먼저, 왼쪽 손가락 포켓의 손가락을 끌어당긴 다음 오른쪽 손가락 포켓의 손가락을 끌어당기십시오.
❹ 이제 양손으로 벨트를 잡고 원하는 압박 효과 (안정화)가 생길 때까지 앞으로 동시에 고르게 당기십시오.
❺ 다음을, 양 벨트를 대형 조임 장치에 바삭 밀착시켜 고정합니다.

세척상의 주의사항

주의: SacroLoc을 절대로 직접적인 열원(예: 히터, 직사광선, 자동차 보관)에 노출되지 않도록 하십시오! 제품이 손상될 수 있습니다. 이로 인해 SacroLoc의 효과가 저해될 수 있습니다.
SacroLoc의 라벨에 있는 취급 시 주의사항에 유의하십시오. 라벨은 니트 직물 안쪽에 있습니다.
필요하면 SacroLoc을 중성 세제로 손세탁하십시오. 보조기¹는 자연 건조하십시오.

착용 위치

해당 적용중에 따릅니다(골반, 천장관절).
용도 참고.

유지 관리 안내

제품을 올바르게 취급하고 관리할 경우 유지 관리가 별도로 필요하지 않습니다.

제품의 조립과 착용 안내

SacroLoc은 표준 사이즈로 사용할 수 있게 제공됩니다.

기술 지원 /수치

SacroLoc은 고정된 신축성 벨트 및 탈착식 등 패드가 포함된 니트 직물로 구성되어 있습니다. 등 패드는 테리 클로스(타월 면직물) 커버와 분리할 수 없게 결합되어 있습니다. 등 패드는 예비 부품으로 구매할 수 있습니다.

재사용에 관한 안내

본 제품은 환자 한 명에 대한 개별적인 치료를 위한 제품입니다.

보증

제품 구매 국가의 법률 규정이 적용됩니다. 보증 청구를 해야 하는 경우, 가장 먼저 제품을 구매처에 직접 문의하십시오. 보증 서비스 청구를 하기 전에 제품을 세탁해야 합니다. SacroLoc의 취급 및 관리 수칙을 준수하 지 않은 경우, 보증 서비스가 제한되거나 제외될 수 있습니다.

보증 서비스 제외 사항:

- 적용중에 적합하지 않은 사용
- 전문가의 지시를 따르지 않은 경우
- 제품 무단 변경

고지의무

현지 법률 규정에 따라 사용자는 본 의로기기를 사용하면서 발생하는 모든 심각한 사례를 제조사 및 관계 당국에 지체 없이 알려야 합니다. 당사 연락처 정보는 이 브로셔의 뒷면에 참조하십시오.

製品には、改造を加えないでください。改造を加えた場合、製品の働きが低下するおそれがあるため、製造物責任にかかわる責任は負いかねます。

素材成分

ポリアミド(PA)、熱可塑性エラストマー(SEBS)、ポリウレタン(PUR)、エラストン(EL)、ポリプロピレン(PP)、ポリエステル(PES)、ポリオキシメチレン(POM)、綿(CO)
ポリエチレン(PE)、アクリル系接着剤(AIAC)

MD – Medical Device (医療装置)
UDI – DataMatrixをUDIとするマーンガ

作成日：2022-04

* 人的損害の危険（負傷、健康、事故の各リスク）にかかわるご注意ください。
場合により、物的損害（製品の損害）が含まれます。
1矯正装具＝四肢または胴体の安定化、負荷の軽減、固定、ガイドまたは補正のための整形医療用補助具
2専門技能者とは、装具の調整と使用開始時の指導に関する国の適用規則に従ってあなたのために処置する資格がある人材です。

한국어

소중한 고객 여러분,

Bauerfeind 제품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다.

여러분의 건강을 진심으로 걱정하므로, 자사 제품의 의료 효과를 향상시키기 위해 바우어파인트는 매일 최선을 다하고 있습니다. 이 **사용 설명서**를 주의 깊게 읽고 유념 하십시오. 문의 사항이 있으시면 담당 의사나 제품 판매처에 문의해 주십시오.

용도

SacroLoc은 의료기기입니다. 본 제품은 골반 안정화 및 천장관절의 정확한 위치의 집중적인 하중 분산을 위한 보조기¹입니다.

적응증

- 천장관절 질환(천장관절 증후군, 천장관절 관절증, 천장관절 불안정성)
- 골반골 불안정성(예: 섬유연골결합 파열 및 이완)
- 골반관절 고착(급성 및 만성)
- 골반 부위의 건염 및 근육통
- 척추유착술에 따른 미세구조 파열(L5 – S1 연결부에서)
- 골반 골절에 따른 보존적 치료

사용 시 발생할 수 있는 위험

⚠️ 주의*

이 사용 설명서의 사양과 전문가가 제공하는 정보를 주의 깊게 확인해 주십시오.

- SacroLoc은 이 사용 설명서의 지시사항과 열거된 적용 부위(사용 위치) 대로만 착용할 수 있습니다.
- 올바르게 사용하지 않았거나 본래의 용도와 다르게 사용한 경우 품질 보증을 받을 수 없습니다.
- 임신 기간에 본 보조기¹의 적합성 및 사용은 사례별로 의사와 상의해야 합니다. 임신 중에 본 보조기를 착용하는 것이 불편하게 느껴지면, 사이즈 설정 및 착용 방법을 점검하고 의사와 상의해야 하며 때에 따라서는 더는 착용하지 말아야 합니다. 산모와 태아에 대한 부작용으로 알려진 것은 없습니다.
- 사용 안내는 자격을 갖춘 전문가²에게만 허용됩니다.
- 예를 들어, 압박 요법을 받고 있는 경우처럼 다른 제품(압박 스타킹)과 같이 사용하는 경우에는 반드시 사전에 담당 의사와 상의하십시오.
- 티셔츠나 속옷 위에 SacroLoc을 착용하십시오.
- 통증이 심해지거나 신체상의 특이한 변화가 나타나면 경우 즉시 담당 의사와 상담하십시오.
- 제품이 유분이나 산성 물질이 포함된 치료제, 연고, 로션 등이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 신체 전반에 대한 부작용으로 지금까지 알려진 것은 없습니다. 이는 올바른 사용 / 착용을 전제로 한 것입니다. SacroLoc을 너무 꽉 조이지 마십시오. 꼭 조일 경우 국소 압박 증상이 발생할 수도 있습니다. 드물게 혈관과 신경이 압박으로 인해 수축될 수도 있습니다.

* احذر من خطر التعرض لإصابة بدنية (خطر التعرض للإصابة أو المخاطر الصحية أو وقوع حادث) أو أية أضرار مادية (خسائر في المنتج).
 1 الجهاز التقويمي = جهاز تقويمي يُستخدم لتدعيم الجذع أو الأطراف وتخفيف الضغط عنها وتثبيتها والتحكم فيها أو تصحيحها
 2 يقصد بالموظفين المتخصصين كل من يسمح له بمواءمة أجهزة تقويمية للعظام والتدريب على استخدامها وذلك وفقاً للوائح الحكومية المطبقة عليك.

بحيث يتطابق معه. بعد تثبيت الشريط الشائك، قم أولاً بإخراج أصابعك من ماسكة الأصابع اليسرى ثم من ماسكة الأصابع اليمنى. 4. والآن أمسك حزامي الضغط بيديك اليمين واليسار في نفس الوقت وببنفس القوة حتى يتحقق الضغط المطلوب (الوصول إلى درجة الاستقرار). 5. قم بعد ذلك بتثبيت حزامي الضغط في أداة التثبيت الكبيرة، مع ربطهما معاً.

إرشادات التنظيف

ملحوظة: لا تُعرّض مقوم SacroLoc لمصادر السخونة المباشرة (أي مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة أو تقوم بتخزينه في إحدى السيارات!) فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى إحداث أضرار. كما قد يؤدي ذلك إلى التأثير سلباً على مقوم SacroLoc.
 يُرجى مراعاة إرشادات العناية المدونة على الملصق المحيط بمقوم SacroLoc الخاص بك. ويوجد هذا الملصق على الجانب الداخلي من النسيج المحبوك. يمكنك تنظيف مقوم SacroLoc يدوياً بمادة غسل لطيفة عند الحاجة. اترك المقوم¹ يجف في الهواء.

موضع الاستخدام

وفقاً لدواعي الاستعمال (الحوض، المفاصل العجزية الحرقفية).
 انظر العرض من المنتج.

إرشادات الصيانة

لن يحتاج المنتج عملياً إلى صيانة في حالة استخدامه والعناية به بشكل سليم.

إرشادات التركيب والتجميع

مقوم SacroLoc متوفر بمقاسات معيارية وجاهز للاستخدام.

البيانات الفنية / البارامترات

يتكون منتج SacroLoc من حزام ضغط ثابت ومساند ظهر قابلة للخلع. مساند الظهر لا يمكن فصلها وهي متصلة مع بعضها بنسيج وري يغلفها. مساند الظهر متوفرة كقطع غيار.

إرشادات خاصة بإعادة الاستعمال

المنتج مخصص للعناية بمرضى واحد فقط بشكل فردي.

الضمان

تسري اللوائح القانونية المعمول بها في البلد الذي تم فيه شراء المنتج. إذا ساورك الشك في شيء متعلق بالضمان، يُرجى التوجه أولاً إلى الشخص الذي اشترى منه المنتج مباشرة. يجب تنظيف المنتج قبل الإبلاغ عن المطالبة بالضمان. في حالة عدم مراعاة الإرشادات الخاصة بكيفية التعامل مع المنتج SacroLoc والعناية به، فقد يتأثر الضمان بذلك أو يتم استبعاده.
 يتم استبعاد الضمان في الحالات التالية:
 • الاستخدام غير المطابق لدواعي الاستعمال
 • عدم اتباع تعليمات الخبير الطبي
 • تعديل المنتج بشكل غير مصرح به

واجب التبليغ

وفقاً للوائح القانونية الإقليمية، فأنت ملزم بإبلاغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة، عن أي حادث خطير يحدث عند استخدام هذا المنتج الطبي، دون تأخير. بيانات الاتصال الخاصة بنا موجودة على الجهة الخلفية لهذا الكتيب.

التخلص من المنتج

يُرجى التخلص من المنتج بعد نهاية الاستخدام وفقاً للقواعد المحلية.

للموظفون المتخصصون²

إرشادات عامة

بعد حصول المريض على مقوم SacroLoc، يرجى التأكد من ضبطه بحيث يناسب جسمه جيداً.
 يجب تعديل موضع مساند الظهر على الحوض بحيث تستقر على الأشواك الحرقفية الخلفية العلوية مع التجويف الداخلي.
 تدرب على تثبيت الضمادة بشكل صحيح مع المريض.
 من غير المسموح إدخال أية تعديلات غير مناسبة على المنتج. وفي حالة عدم الالتزام بذلك، قد يتأثر أداء المنتج وبذلك لا تتحمل جهة الصنع أية مسؤولية.

تكوين المواد

متعدد الأמיד (PA)، لإستومر لدائن حرارية (SEBS)،
 بولي يوريثين (PUR)، إيلاستان (EL)، بولي بروبيلين (PP)،
 بوليستر (PES)، متعدد أكسي الميثيلين (POM)، قطن (CO)،
 بولي إيثيلين (PE)، غراء أكريليت (A)

Medical Device (إجهاز طبي)

UDI – معرّف DataMatrix مثل UDI